

MANUAL DO USUÁRIO

# MOTOR S2

MOTOR DE BANCADA



ODONTOMEGA





## ÍNDICE

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>ORIENTAÇÕES E GARANTIA .....</b>        | <b>4</b> |
| <b>RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS .....</b>      | <b>5</b> |
| <b>PROBLEMAS E SOLUÇÕES .....</b>          | <b>7</b> |
| <b>CUIDADOS DE SEGURANÇA.....</b>          | <b>8</b> |
| <b>GUIA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA .....</b> | <b>9</b> |

Leia as instruções antes de utilizar o equipamento.  
Obrigado por comprar nossos produtos.



## 1. Orientações gerais

Este é o manual de usuário do motor de bancada S2 da linha S de motores Odontomega. O design e especificações deste produto podem sofrer alterações de projeto objetificando sempre oferecer o melhor equipamento da categoria para nossos clientes.

Parabéns por adquirir um motor Odontomega! Pedimos que se atenha aos cuidados gerais e manutenção periódica de seu equipamento visando estender ao máximo a longevidade de seu equipamento. Guarde esse manual para consultas futuras ou faça o download da versão mais recente em nosso site [www.odontomega.com.br](http://www.odontomega.com.br)

Ao buscar atendimento no setor de assistência técnica Odontomega sempre informe o modelo correto e o número de série para facilitar e agilizar o seu atendimento pelos nossos profissionais.

Todos os motores Odontomega são testados individualmente antes de serem enviados, caso o seu motor não esteja funcionando corretamente entre em contato com a revenda imediatamente após o recebimento.

## 2. Garantia

- *CAIXA CONTROLADORA* : **1 ano à partir da data da compra;**
- *PEDAL* : **1 ano à partir da data da compra;**
- *PEÇA DE MÃO (CANETA)* : **3 meses à partir da data da compra.**

A garantia **NÃO** cobrirá danos causados por **USO INADEQUADO** do aparelho, nem o desgaste natural das peças: pinça, rolamentos, cabo, bem como marcas, arranhões, manchas ou trincas oriundas de desgaste de uso, quedas ou acidentes com o equipamento.

## 3. Taxa de serviço

Será aplicada a taxa de serviço em casos de falha ou mal funcionamento devido ao uso inadequado ou indevido por parte do usuário, tais como:

- Ligar o aparelho em voltagem errada;
- Quedas, tombos e acidentes com o aparelho;
- Utilizar peças ou acessórios não recomendados pelo fabricante;
- Mal funcionamento devido ao reparo em locais não indicados pelo fabricante;
- Uso indevido ou inadequado.



## 4. Recomendações de Operação

Siga as recomendações abaixo durante a operação de seu equipamento:

1. Certifique-se que o motor esteja desligado antes de plugar na tomada;
2. Coloque a velocidade de rotação do motor em 0 antes de ligar;
3. Conecte a peça de mão na parte **FRONTAL** da caixa controladora;
4. Conecte o pedal na parte **TRASEIRA** da caixa controladora;
5. Verifique se o mandril da peça de mão está travado;
6. Segure a peça de mão com uma das mãos e ligue o motor com a outra;
7. Verifique a velocidade de rotação da peça de mão;
8. Desligue o motor e conecte o pedal para confirmar se o pedal está funcionando corretamente;
9. Desligue o motor para alterar a direção de rotação através do botão “Esquerda / Direita”.

## 5. Cuidados e condições operacionais

### 1. EVITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM LOCAIS HUMIDOS E SEM VENTILAÇÃO


Busque sempre um local bem ventilado e seco afim de evitar curto circuito e superaquecimento dos componentes eletrônicos.

### 2. CONDIÇÕES OPERACIONAIS RECOMENDADAS

|                               |                           |                 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>CONDIÇÕES OPERACIONAIS</b> | Temperatura (°C)          | 10 - 40 °C      |
|                               | Umidade relativa (%)      | 30 - 75 %       |
|                               | Pressão atmosférica (hPa) | 700 - 1.060 hPa |

### 3. CONDIÇÕES OPERACIONAIS RECOMENDADAS

- Dimensões: 2,35mm x 3mm (ISO 7785-2 TIPO 2);
- Encaixe mínimo: 10mm;
- Comprimento máximo: 35mm quando o mandril está próximo;
- Evitar brocas enferrujadas ou dobradas, isso pode causar desgaste excessivo nos rolamentos;
- Siga as recomendações do fabricante em relação a velocidade máxima das brocas utilizadas.

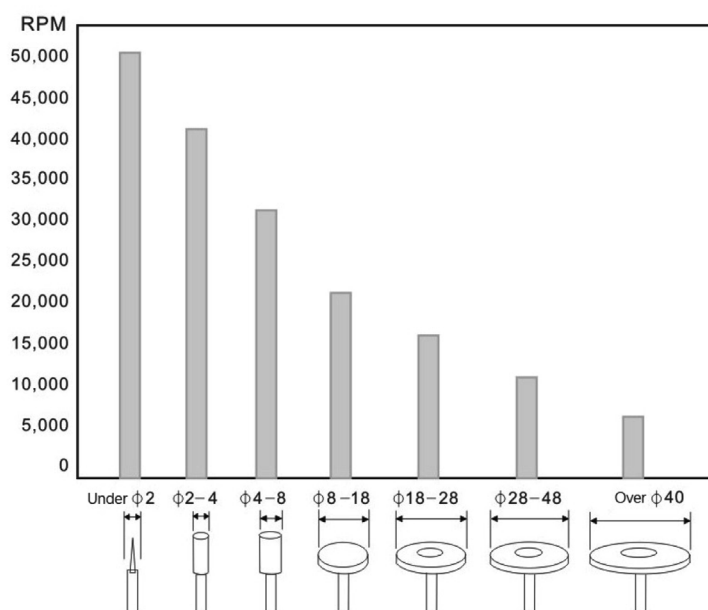

4. Antes de trabalhar com altas velocidades, verifique em baixa velocidade, se existe algum problema, como a vibração da broca.

5. Não realize alterações de velocidade de forma brusca.

6. Utilize fusível 220v / 230v / 240v / 2A para a caixa controladora.

7. Evite quedas e pancadas na peça de mão (caneta). Quedas são a maioria das causas de problemas como quebra de rolamentos.

8. Caso a peça de mão caia no chão, verifique em rotação lenta se houver algum dano, em seguida, verifique também a integridade física da broca.

9. **NUNCA** abra o mandril durante o funcionamento do motor (pode causar um curto-circuito no motor).

10. Para evitar acidentes causados pelo funcionamento inesperado do aparelho, verifique se a caixa controladora se encontra desligada (Botão Liga/Desliga) antes de conectar o cabo de energia na tomada.

11. Verifique a integridade dos fusíveis e evite a sobrecarga de trabalho ao motor.

12. Mantenha sempre uma broca engatada na peça de mão mesmo quando o motor não estiver em uso.

13. Espere sempre a rotação da broca parar por completo antes de apoiar a peça de mão na mesa ou descanso de caneta.

14. Verifique se o cabo de energia da caixa controladora está fora da tomada antes de mover o aparelho de lugar. Evite puxões no cabo de energia.

15. Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

16. Verificar as velocidades indicadas pelo fabricantes para cada tipo de broca.

17. Utilize roupa e equipamento de proteção adequada, incluindo uma máscara contra poeira e óculos de proteção. Usar uma unidade de sucção adequada e um ventilador.

18. Mantenha o local de trabalho limpo. Resíduos podem causar acidentes.

19. **NUNCA** aplique óleo ou água nas peças da caixa controladora, peça de mão ou pedal.





20. Ajustar a velocidade de rotação para "0" (zero).

21. Verificar se o mandril da peça de mão está travado, girando a manopla da peça de mão ou puxando a broca para fora.

22. Segurar a peça de mão com uma de suas mãos e ligar a energia da caixa de controle com a outra.

23. Conforme indicando pelas setas, ao pressionar o interruptor de energia e ligar o aparelho, uma luz vermelha acenderá. Ao pressionar o botão novamente, desligando o aparelho, a luz vermelha apagará.

24. Para alterar o sentido de rotação, pressionar o botão "Direita / Esquerda" na lateral da caixa de controle.



25. Após ligar o aparelho, ajustar a velocidade de rotação através da manopla localizada na parte frontal da caixa de controle. Girando em sentido horário a velocidade aumenta, e no sentido anti-horário diminui.



26. Para utilizar o pedal, conectar o mesmo somente com o motor desligado. Ajustar a velocidade de rotação conforme desejado e pisar no pedal para iniciar o processo, a velocidade deve aumentar gradualmente.

## 6. Problemas comuns e possíveis soluções

### PEÇA DE MÃO

| Problema                                                       | Verificar                                                     | Solução                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| A peça de mão não funciona mesmo com o mandril estando fechado | Se a conexão do cabo da caneta está na parte frontal do motor | Entrar em contato         |
| A peça de mão esquenta durante o uso                           | Se teve contato com água ou óleo                              | Entrar em contato         |
| Ruído e vibração durante o uso                                 | Se o mandril ou broca está torto                              | Trocar o mandril ou broca |



## CAIXA CONTROLADORA

| Condição                  | Verificar                        | Solução                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luz de energia não acende | Caixa de controle                | O cabo de energia está bem conectado?                                                                    |
|                           | Caixa de fusíveis                | Substituir fusíveis.                                                                                     |
|                           | Interruptor de Energia           | Substituir o interruptor de energia.                                                                     |
| Peça de mão aquecendo     | A peça de mão está quente?       | A peça de mão aquece quando utilizada continuamente. Fazer uma pausa até a temperatura voltar ao normal. |
|                           | A peça de mão está muito quente? | Evitar sobrecarregar continuamente a peça de mão, isto causa superaquecer e pode danificar a peça.       |
| Peça de mão não gira      | O mandril está aberto?           | Fechar o mandril corretamente.                                                                           |

## 7. Cuidados de segurança



1. Não utilizar o aparelho com cabo de força, plugue e tomada danificados ou defeituosos, isto pode ocasionar incêndios e choques elétricos.
2. Ao desconectar o cabo de força da tomada, segurar o plugue e não tocar com as mãos molhadas.
3. Não dobrar o cabo de energia excessivamente e não pressionar o cabo com objetos pesados.
4. Não colocar perto de equipamentos aquecidos, velas, cigarros ou outros objetos que possam causar fogo.
5. Manter o produto longe do alcance de crianças.
6. Utilizar condutor ou aterramento. Quebra ou vazamento elétrico podem causar choque elétrico.
7. Não conectar muitos equipamentos elétricos na mesma tomada, nem na mesma extensão.
8. Não colocar e nem manejar o produto em locais úmidos e chuvosos.
9. Não derrubar nem danificar a peça de mão. Em caso de mau funcionamento, queda e umidade, não utilizar! Entre em contato conosco.
10. Utilizar o equipamento de forma apropriada conforme as instruções.
11. Não nos responsabilizamos por acidentes causados pelo não cumprimento das instruções.






## 8. Substituições de fusível

O fusível se encontra na traseira do equipamento, em uma pequena caixa próxima ao encaixe do cabo de energia. Abrir a caixa dos fusíveis, retirar o fusível e, em seguida, substituí-lo. Especificações técnicas do fusível (20V-T3 15A/250V, 230V-T2A/250V)

## 9. Substituindo o mandril

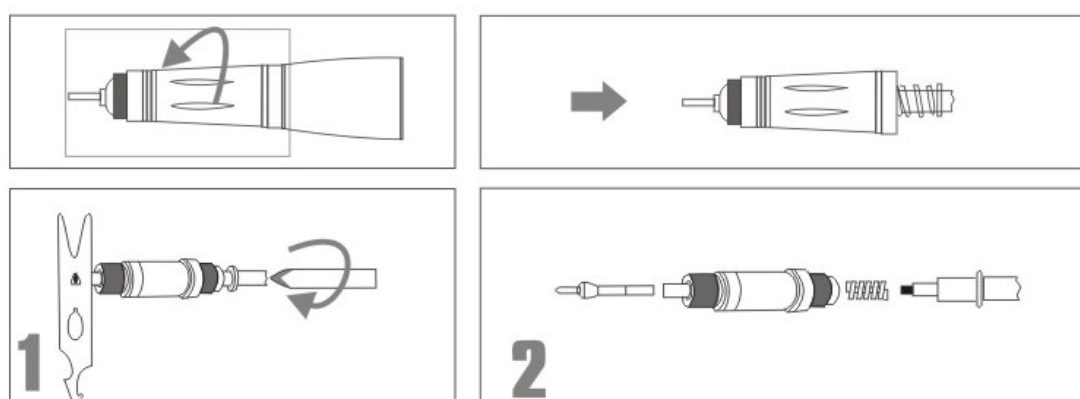

1. Desparafusar a peça de mão.
2. Fixar o mandril com a chave e conectar a chave de fenda na junta delrin.

### CUIDADOS

Instalar o novo mandril, manter a ponta limpa.





O reparo e substituições de peças deve ser feito por profissionais. Caso contrário, podem ocorrer problemas e danos aos equipamentos.

Caso tenha desmontado os aparelhos e houver dificuldades na remontagem, entrar em contato conosco. A montagem feita de forma equivocada pode ocasionar danos por vibração, ruído, calor e rolamentos.

Se o mandril não estiver aberto, girá-lo com a chave duas ou três vezes.







## 10. Substituindo o rolamento dianteiro

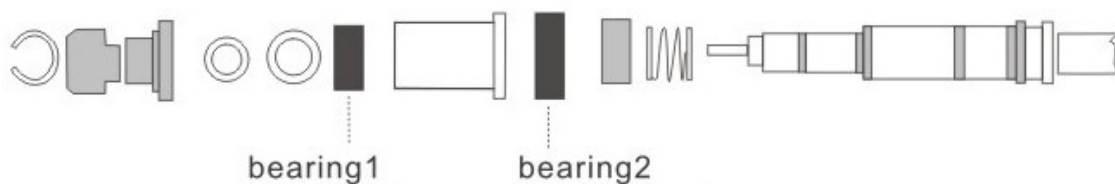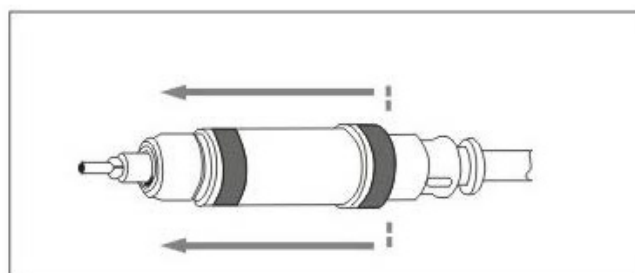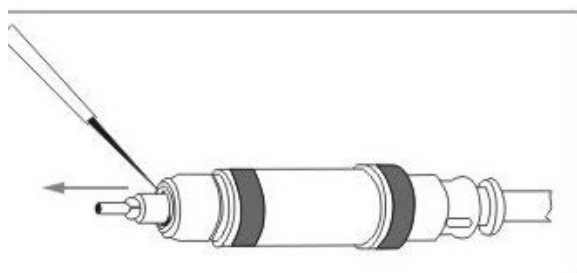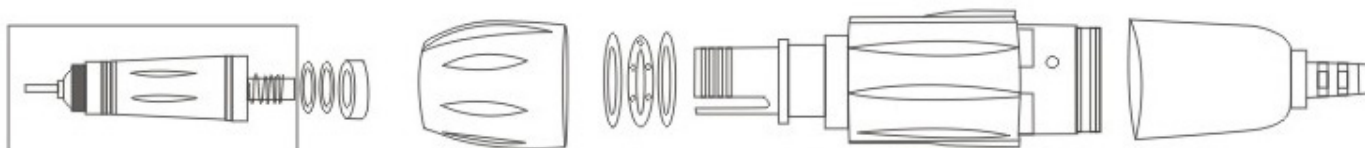

更換


bearing1

bearing2

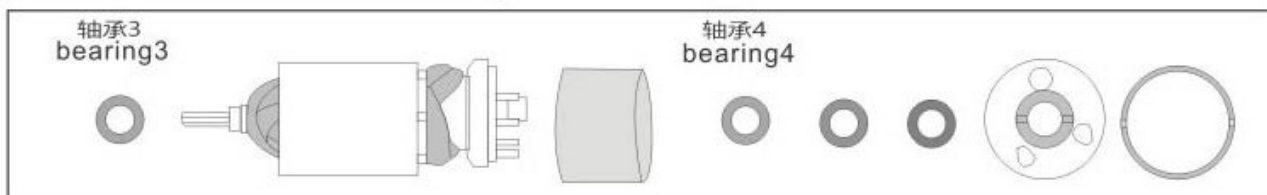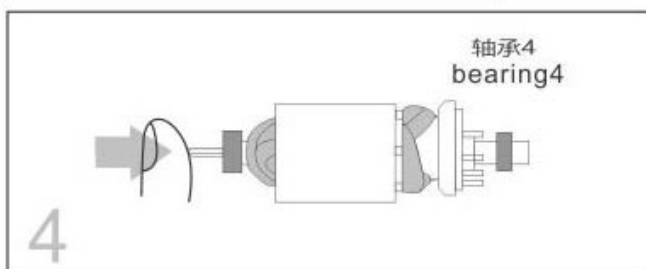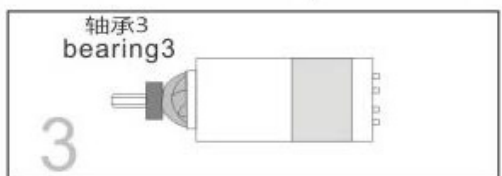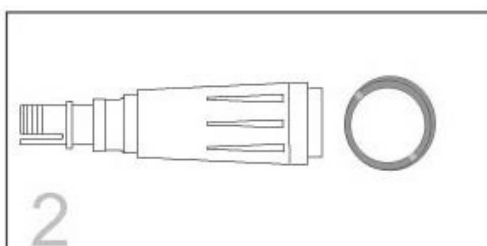




## 11. Substituindo a parte inferior

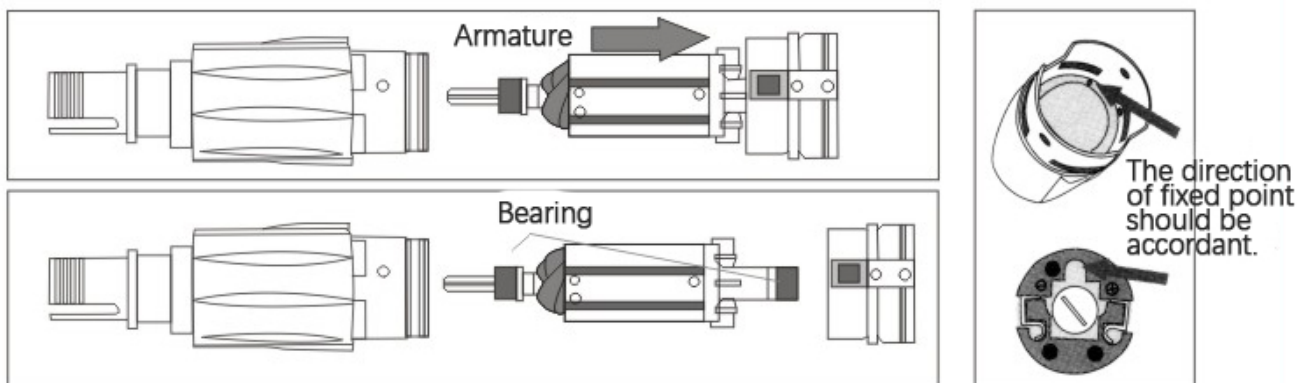


## 12. Manutenção da peça de mão

1. Manter o local em volta da peça de mão, limpo, livre de pó e resíduo.
2. Remover a poeira apenas com álcool isopropílico. Não utilizar óleo ou água para realizar a limpeza. A graxa dentro do rolamento pode derreter devido ao contato com esses líquidos.
3. A limpeza com ar comprimido é aceitável, porém, deve-se atentar a pressão utilizada, pois, isto pode afetar gravemente a peça de mão ou motor.
4. Para inserir uma broca na peça de mão, girar a manivela na direção de abertura para abrir o mandril. Com o mandril aberto, é possível trocar ou colocar uma nova broca. Girar a mesma manivela para a direção de fechamento, fechando o mandril, assim a broca é travada. **\*Gire o anel até ouvir um "click".**

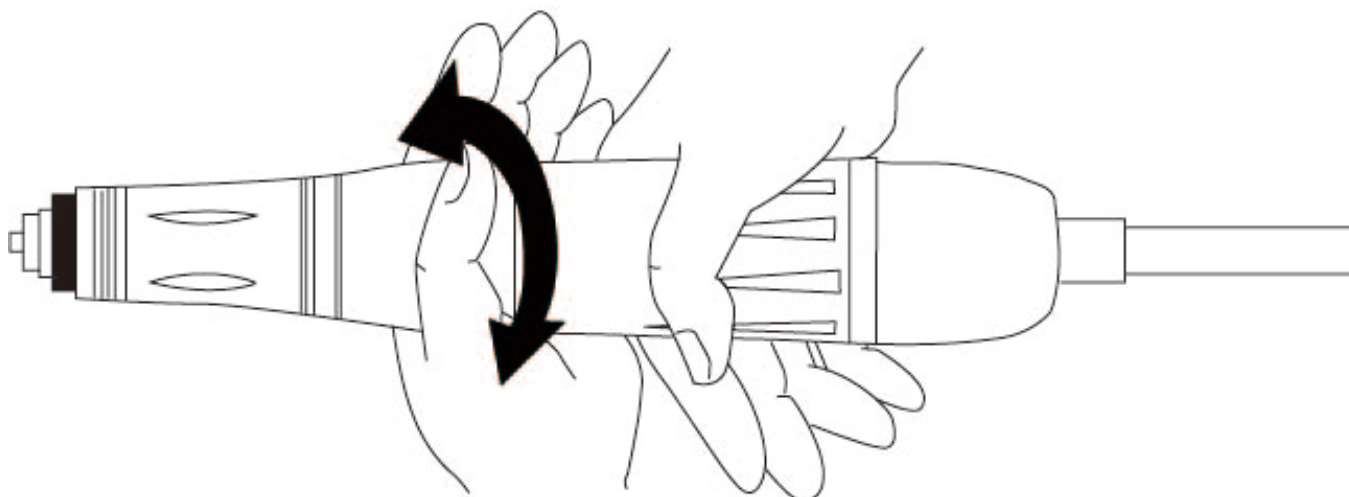




## 13. Nome das peças

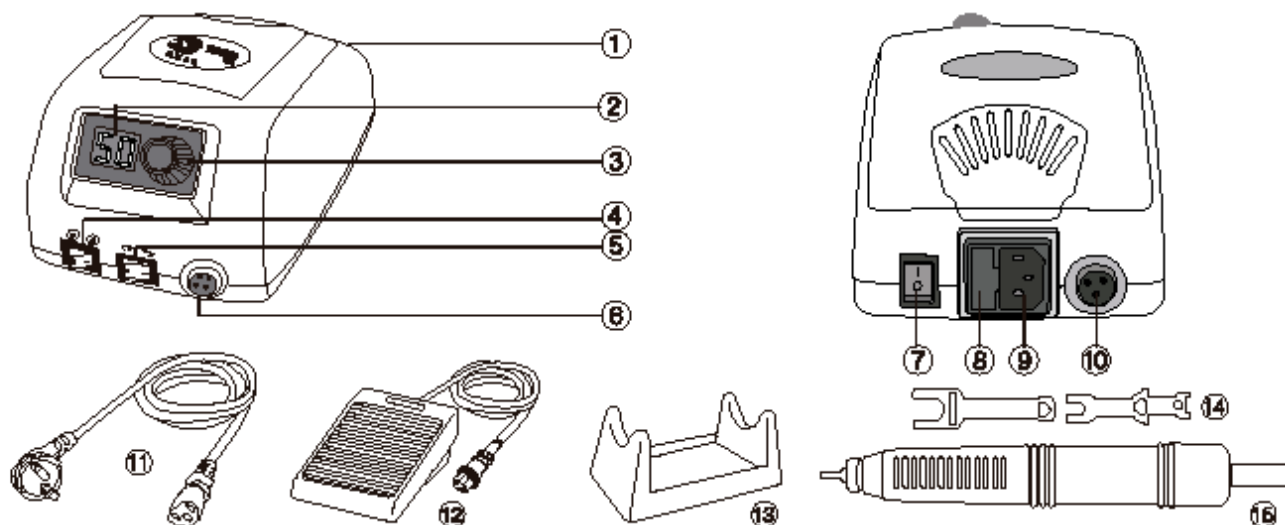

1. Caixa de controle
2. Visor digital
3. Controle de velocidade da rotação
4. Alterna entre a função Manual/Pedal
5. Botão Sentido da Rotação (normal/reverso)
6. Conector Peça de Mão
7. Botão Liga/Desliga
8. Caixa de Fusíveis
9. Conector de Energia
10. Conector do Pedal
11. Cabo de Energia
12. Pedal
13. Suporte para Peça de Mão
14. Chave
15. Peça de Mão



## S2 - PEÇA DE MÃO

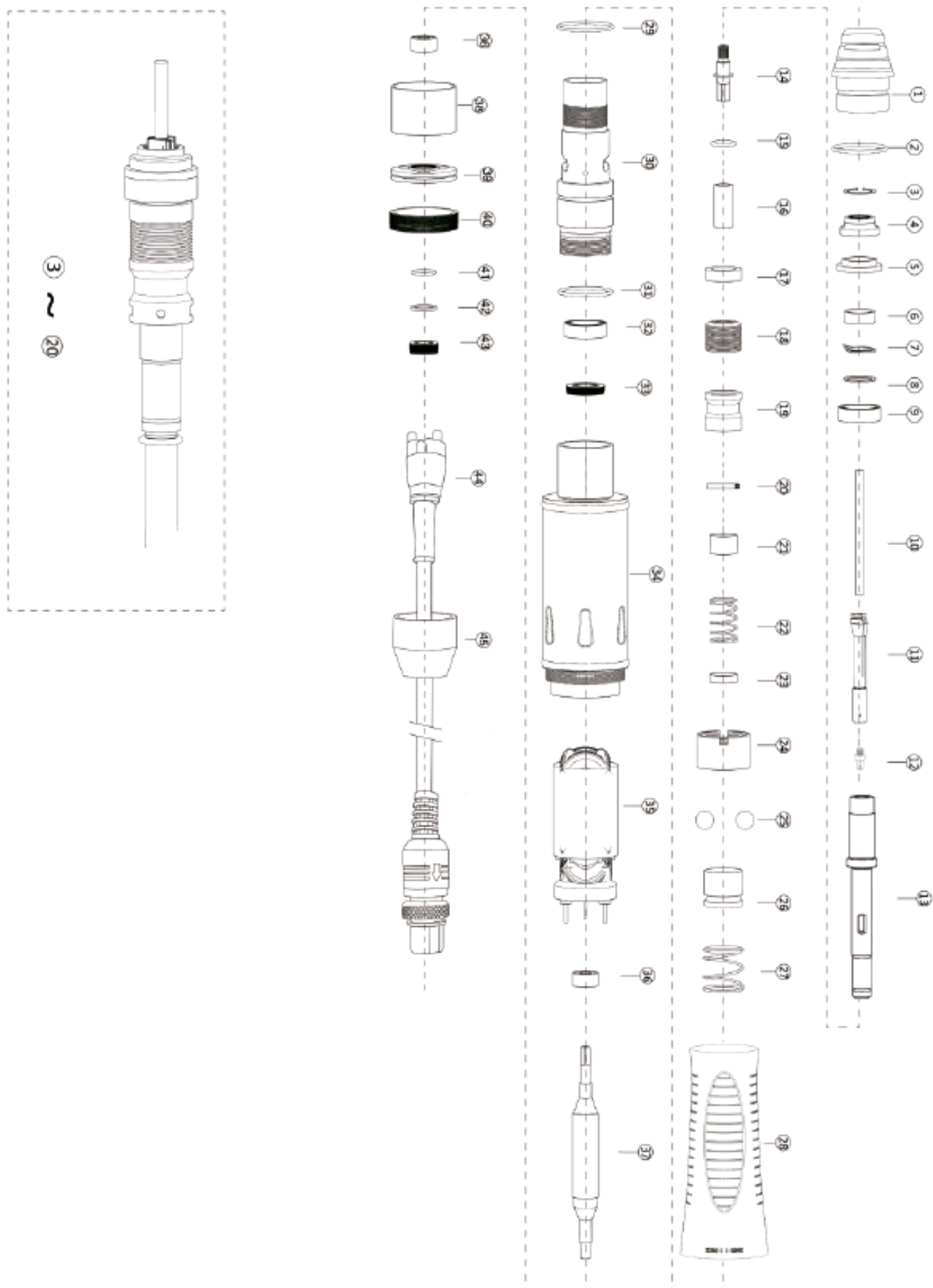

## CONTATOS



**[assistencia@odontomega.com.br](mailto:assistencia@odontomega.com.br)**

*Rua Rui Barbosa, 640 - Centro / Ribeirão Preto - SP*



**(16) 98103-5836**



**(16) 3610-9636**



**ODONTOMEGA**