


# Rosetta® Instruções de Uso

HS-IFU-702 VER 02 (2019.02.05)

## 1. Geral

- Categoria de produto: Bloco de cerâmica feldspática com leucita;
- Nome do produto: Rosetta BM;
- Finalidade de uso: Este produto é usado para fabricação de dentes artificiais para restaurar a função e o aspecto estético do dente;
- Embalagem: Veja a etiqueta do produto.

## 2. Instruções

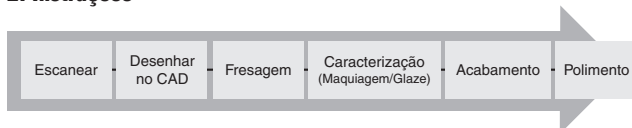

## 3. Precauções

### 1- CUIDADOS ANTES DO USO

- (1) Checar se o produto não está danificado ou com rachuras.
- (2) Não danificar a fresa do CAD/CAM ao inserir ou retirar o bloco.
- (3) Cuidado com as mãos ao manusear o produto perto da fresa.
- (4) A presilha deve ser encaixada no local adequado.
- (5) Limpar a poeira que vir a ser formada com a operação da máquina de CAD/CAM.
- (6) Não derrubar o produto no chão ou aplicar força excessiva, isso pode vir a danificar o produto.
- (7) Manter o produto fora do alcance de crianças.

### 2- ARMAZENAGEM E MANUTENÇÃO APÓS USO

- (1) Armazenar o produto em temperatura ambiente e em local livre de umidade.
- (2) Manter o produto fora do alcance de crianças.
- (3) Embalar e armazenar o produto apropriadamente para que ele não seja danificado.
- (4) Não derrubar o produto no chão ou aplicar força excessiva, isso pode vir a danificar o produto.
- (5) Armazenar o produto em temperaturas que possam ir de 0°C~40°C e umidade relativa de 10%r.H ~90%r.H, em pressão atmosféricas de 500hPa~1060Hpa.

## 4. Propriedades físicas e mecânicas

- (1) Material: Cerâmica feldspática leucite.
- (2) Resistência compressiva: acima de 120 Mpa.
- (3) Solubilidade química: Abaixo de 100 ug/cm<sup>2</sup>.
- (4) Coeficiente de expansão termal: 10.0 (±0,5) x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>

## 5. Pictograma

	Não reutilizar		Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Lote		Código do produto
	Fabricante		Não usar com embalagem danificada
	Cuidado		Não estéril
	Data de fabricação		Consultar instruções de uso



Importador :  
OdontoMega Importação e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.  
Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto, SP CEP 14015-120  
Tel: (16) 3610.9636 CNPJ: 01.380.483/0001-60 Autorização ANVISA: 103520-4

# Rosetta® Instructions for Use

HS-IFU-702 VER 02 (2019.02.05)

## 1. Overview

- Product Category : Feldspatic ceramic leucite Block;
- Product Name : Rosetta BM;
- Intended Use of the Device: This product is used to make artificial tooth in order for damaged tooth to get its function and beauty restored;
- Packaging Unit : Refer to HASS standard package.

## 2. Instructions for use

### (1) Preparation for use

Check the defects of the product for any damage or crack before use.



## 3. Cautions

### (1) CAUTIONS BEFORE USE

- Check the defects of the product for any damage or crack before use.
- Be careful not to damage the milling tool of the CAD/CAM machine when attaching or detaching the product.
- Be careful not to get your hand caught in the milling tool.
- The jig should be attaching to an accurate location.
- Suppress or remove the dust which may occur during the operation of CAD/CAM machine.
- Do not drop the product on the ground or apply heavy force as it may damage the product.
- Keep the product out of reach of infants and children.

### (2) STORAGE AND MAINTENANCE BEFORE USE

- Store the product at room temperature in a dry place.
- Pack and store the product properly to ensure that it is not damaged.
- Store the product at temperatures ranging from 0°C~40°C, in combination with relative humidity of 10% r.H ~ 90% r.H, under atmospheric pressures ranging from 500 hPa ~ 1060 hPa.

## 4. Mechanical and Physical Properties

- Material : Feldspatic ceramics leucite.
- Flexural Strength : over 120 MPa.
- Chemical Solubility : below 100 ug/cm<sup>2</sup>.
- Coefficient of Thermal Expansion : 10.0 (±0.5) x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>

\*This is a single use product \*Do not reuse.

## 5. Pictograph

	Do not reuse		Authorized Representative in the European Community
	Batch Code		Catalogue Number
	Manufacturer		Do not use if package is damaged
	Caution		Non Sterile
	Date of Manufacture		Consult Instructions for Use



Importer:  
OdontoMega Importação e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.  
Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto, SP CEP 14015-120  
Tel: (16) 3610.9636 CNPJ: 01.380.483/0001-60 Autorização ANVISA: 103520-4