

2021

# Catálogo ●



# SONIC 4K



Rapidez  
Estabilidade  
Ultra precisão


A Sonic 4K realiza impressões como nenhuma outra.



# Índice

Acabamento e Polimento - Laboratório.....	4
Acabamento e Polimento - Clínica.....	10
Brocas de Tungstênio DFS.....	17
Brocas Diamantadas e Sinterizadas DFS.....	19
Brocas de Tungstênio e Diamantadas Turbocut.....	20
Discos Diamantados.....	21
Enceramento e Escultura.....	24
Escovas de Polimento.....	27
Acessórios Diversos.....	29
Gesso Snow Rock.....	35
Revestimento MegaVest Press.....	36
Liga NiCr Kera N.....	37
Óxido e Esfera de Jateamento.....	38
Pincéis.....	39
Equipamentos.....	42
Equipamentos e Resinas 3D.....	51
Rosetta - Dissilicato de Lítio (LiSi2).....	60
Amber Mill - Dissilicato de Lítio (LiSi2).....	63
Linha de Cimentação.....	64
InSync MC - Cerâmica para Metal.....	68
InSync LiSi2/ZrO2.....	70
MiYo - Cerâmica Líquida.....	72
ZirkOM - Blocos de Zircônia.....	76
Fresas e Discos CAD/CAM.....	80
Informativos.....	82
Suporte.....	83

# DiaTurbo

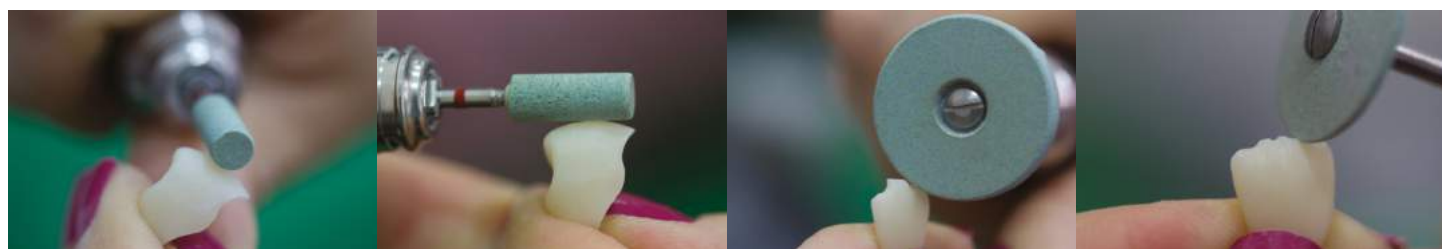


Pedras diamantadas com alto poder de corte e abrasão, para acabamento em dissilicato de lítio (LiSi<sub>2</sub>), zircônia e demais materiais cerâmicos.

### Características:

- Ideal para a técnica Metal free;
- Alta carga de diamantes naturais, garantindo maior durabilidade para a pedra;
- Remove facilmente o material trabalhado, devido á composição otimizada de diamantes;
- Grande variedade de formatos.

### Aplicações:

- Dissilicato de Lítio LiSi<sub>2</sub>;
- Zircônia;
- Materiais cerâmicos.

 8' - 12000 rpm

Veja o vídeo



					
<b>CÓDIGOS</b>	DT01	DT02	DT03	DT04	DT07
<b>MEDIDAS (mm)</b>	6,5x13	5x13	4,5x13	6x8	22x2

					
<b>CÓDIGOS</b>	DT08	DT09	DT10	DT11	DT12
<b>MEDIDAS (mm)</b>	22x4,5	15x3,5	13x2	20x2	15x2

## Pedras Flash

Pedras para acabamento em cerâmicas. As Pedras Flash possuem abrasivo de carbeto de silício, realizando um acabamento suave e macio na porcelana.

### Características:

- Formatos ideais para todo tipo de trabalho;
- Alta durabilidade;
- Abrasividade regulada para o trabalho com cerâmicas;
- Caixa com 10 unidades.

### Aplicações:

- Cerâmicas.

				
<b>CÓDIGOS</b>	PF11	PF13	PF20	PF45
<b>NOMES</b>	Disco	Ponta	Cone	Cone com ponta



# EVE Diacon


EVE Diacon são polidores diamantados TURBO. Uma fase mais grossa que os tradicionais Diapol fase grossa (Azul). São abrasivos, ideais para trabalho com dissilicato de lítio e zircônia. Oferecem maior poder de desgaste sem aquecimento da peça, preservando a estrutura do dissilicato e da zircônia. Desgasta com mais facilidade do que os polidores tradicionais, o modelo Diacon TURBO é ideal para o trabalho com os materiais atuais que são mais resistentes.

**Características:**

- Alta durabilidade e eficiência no desgaste;
- Permite o trabalho em lentes e facetas finas, sem o risco de trincas;
- Reduz a geração de calor no desgaste;
- Alta concentração de diamantes.

**Aplicações:**

- Dissilicato de lítio;
- Zircônia.

 8' - 12000 rpm



CÓDIGOS	DI-L26m	DI-R22m	DI-R17m	DI-13m
TAMANHOS	26x2,5	22x3	17x3	4x10


# EVE Diasynt



**Características:**

- Pedra com alta carga de diamante;
- Baixíssima geração de calor;
- Pode ser usado sem resfriamento com água;
- Para reduzir coroas e remover contatos;
- Alto grau de desgaste em materiais cerâmicos.

**Aplicações:**

- Zircônia (Pedra verde);
- Dissilicato de Lítio (Pedra rosa);
- Cerâmicas.

 8' - 12000 rpm

-  Zircônia
-  Dissilicato de Lítio



KIT 18-392



KIT 18-391



DYP22/4G DYP22/2G DYP8g DYP9g DYP13g DYP14g DYP15g



DYP22/4m DYP22/2m DYP8m DYP9m DYP13m DYP14m DYP15m



# EVE Diapol

**Características:**

- Polidor com alta carga de diamantes naturais;
- A terceira fase proporciona glaze mecânico, sem necessidade de queima de glaze;
- Os melhores e mais vendidos polidores no mundo.

**Aplicações:**

- Todas as cerâmicas.

7' - 12000 rpm

**Veja o vídeo**



- 1ª Fase | Grossa → Desgaste
- 2ª Fase | Média → Acabamento
- 3ª Fase | Fina → Alto Brilho (Glaze)
- Sentido correto da rotação: anti-horário

KIT 18-394



Conheça a fase de alto desgaste DIACON - pg. 3



# EVE Diapro

**Características:**

- Resultados excelentes e duradouros das restaurações;
- Durabilidade fantástica dos polidores, devido a alta concentração de diamantes;
- A segunda fase proporciona glaze mecânico, sem necessidade de queima de glaze;
- Os únicos polidores desenvolvidos especialmente para dissilicato de lítio.

**Aplicações:**


- Dissilicato de lítio.

7' - 12000 rpm

- 1ª Fase | Média → Acabamento
- 2ª Fase | Fina → Alto Brilho (Glaze)

Sentido correto da rotação: anti-horário

KIT 18-391

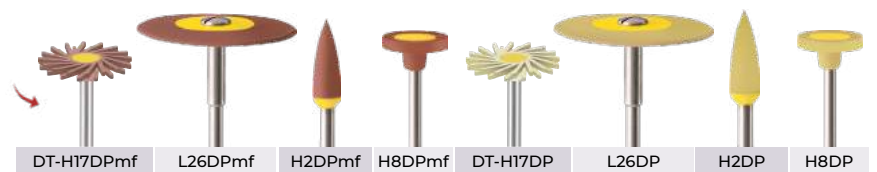

# EVE Diacera

**Características:**

- Polidor com elevada concentração de diamantes, garante a durabilidade dos polidores e eficiência do polimento;
- A segunda fase proporciona glaze mecânico, sem necessidade de queima de glaze;
- Os únicos polidores desenvolvidos especialmente para zircônia.

**Aplicações:**


- Zircônia Monolítica.

7' - 12000 rpm

- 1ª Fase | Média → Acabamento
- 2ª Fase | Fina → Alto Brilho (Glaze)

Sentido correto da rotação: anti-horário

KIT 18-392

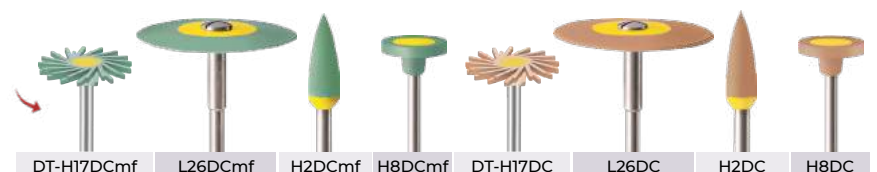


# EVE Diatemp Twist

**Características:**


- Para um polimento com glaze mecânico e alto brilho em materiais acrílicos;
- Indicado para diversos materiais de CAD/CAM;
- Eficiente para restaurações provisórias e permanentes.

**Aplicações:**

- Materiais acrílicos temporários e provisórios;
- PMMA;
- Cerâmicas híbridas;
- Compósitos híbridos;
- Laminados de resina.

 7' - 15000 rpm

 1ª Fase | Fina → Polimento

 Sentido correto da rotação: anti-horário




# EVE Technik

**Característica:**

- Para alisamento e pré-polimento de resinas acrílicas.


**Aplicações:**


- Resinas de prótese total;
- Aparelhos ortodônticos;
- Protetores bucais esportivos;
- Placas de clareamento;
- Provisórios.

 7' - 15000 rpm

 1ª Fase | Grossa → Desgaste e Correção

 2ª Fase | Média → Acabamento

 3ª Fase | Fina → Polimento

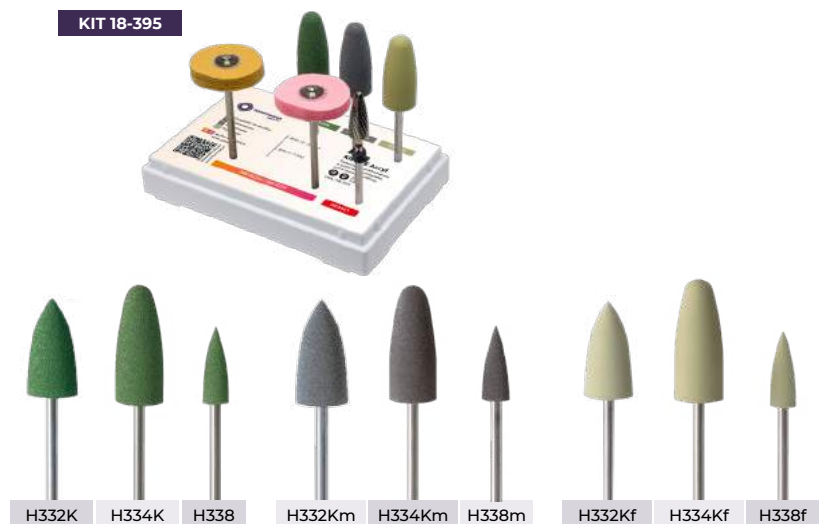

# EVE Soft Wheels

**Características:**


- Flexibilidade para polimento nas interproximais;
- Brilho fantástico sem pasta;
- Abrasividade por óxido de alumínio.

**Aplicações:**


- Superfícies acrílicas;
- Resinas de prótese total;
- Aparelhos ortodônticos;
- Provisórios.



Veja o vídeo



 5' - 7000 rpm

 1ª Fase | Média → Brilho

 2ª Fase | Fina → Alto Brilho

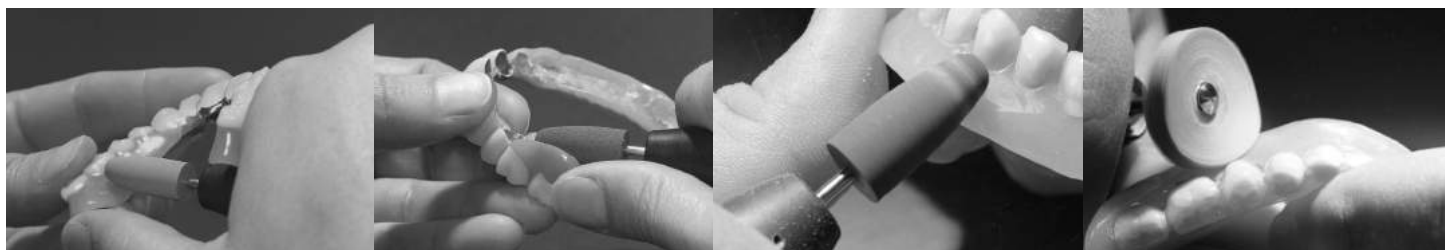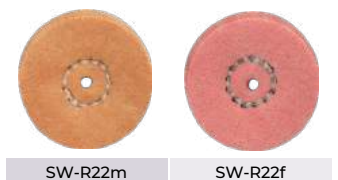

# EVE Ecoceram



**Características:**

- Polidores com abrasivo de carbeto de silício;
- Economia no trabalho com cerâmicas;
- Desgaste eficiente.

**Aplicações:**

- Cerâmicas.

7' - 10000 rpm

1ª Fase | Média → Desgaste

2ª Fase | Fina → Acabamento (Brilho Mate)

KIT 18-306



# EVE Universal

**Características:**

- Polidores universais para todo tipo de material;
- Liga siliconada com abrasivo de carbeto de silício;
- Vários formatos para diferentes aplicações.

**Aplicações:**

- Cerâmicas;
- Compósitos;
- Metais;
- Acrílicos.

7' - 10000 rpm

1ª Fase | Média → Acabamento

2ª Fase | Extra Fina → Brilho Mate





# Kits para laboratório

## EVE Diapol Plus para cerâmicas

- Polidores diamantados para desgaste, acabamento e alto brilho (glaze).
- Brocas diamantadas para desgaste.
- Disco diamantado para acabamento.



KIT 18-394

## EVE Diamante para Lisi2


- Pedras diamantadas para desgaste da estrutura de dissilicato de lítio.
- Polidores diamantados para acabamento e alto brilho (glaze).
- Disco MegaDisc para cortar os sprues.



KIT 18-391

## EVE Zircônia

- Pedras diamantadas para desgaste de zircônia.
- Polidores diamantados para acabamento e alto brilho (glaze).
- Disco MegaDisc para corte dos elementos.
- Broca de tungstênio para acabamento em zircônia pré-sinterizada.

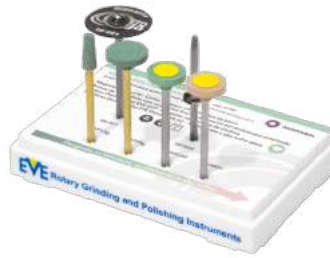

KIT 18-392

## EVE Ecoceram para cerâmicas


- Polidores com carbeto de silício para desgaste e acabamento.
- Polidor diamantado para alto brilho com glaze.
- Disco diamantado para acabamento.
- Brocas diamantadas para desgaste.



KIT 18-306

## EVE Acryl para resina acrílica

- Polidores para acabamento e pré-polimento.
- Broca de tungstênio para acabamento.
- Flanelas impregnadas com carbeto de silício para brilho fantástico.

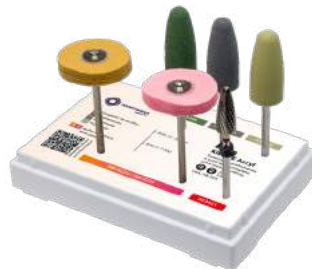

KIT 18-395

## EVE Diapol H8 para cerâmicas

- O mais vendido do Brasil.
- Polidores diamantados para desgaste, acabamento e polimento.
- A 3ª Fase realiza glaze mecânico em todo tipo de material cerâmico.



KIT 18-303

## EVE Rosetta para Lisi2

- Kit completo para acabamento e polimento das pastilhas e blocos Rosetta dissilicato de lítio LiSi2.
- Broca diamantada para desgaste e ajustes.
- Disco MegaDisc Diamante para corte e separação.
- Polidor EVE Universal para desgaste superficial.
- Pedra Diamantada Diaturbo alto poder de desgaste.




KIT 18-316

## DFS Troquelização

- Kit completo para trabalhar o modelo de gesso e troquelização.
- Contém brocas e discos diamantados de alta durabilidade.
- Broca para localização do pino de troquel.



KIT 18-307

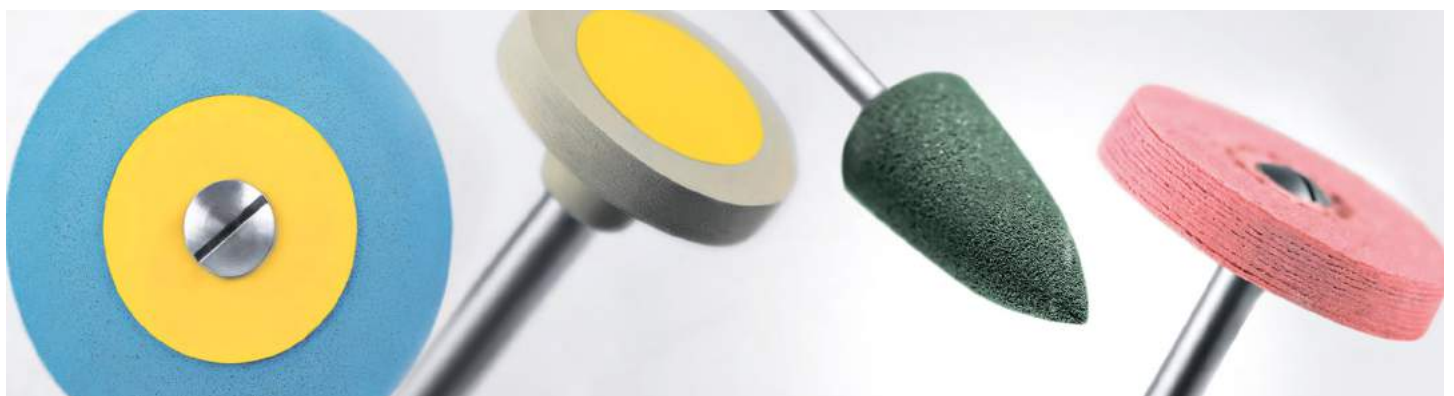

# EVE Diapol

**Características:**

- Polidor com alta carga de diamantes naturais;
- A terceira fase proporciona glaze mecânico, sem necessidade de queima de glaze;
- Os melhores polidores e mais vendidos no mundo.

**Aplicações:**

- Todas as cerâmicas.

7' - 12000 rpm

Autoclaváveis

1ª Fase | Grossa → Desgaste

2ª Fase | Média → Acabamento

3ª Fase | Fina → Alto Brilho (Glaze)

→ Sentido correto da rotação: anti-horário



KIT 18-121



KIT 18-105



# EVE Diapro

**Características:**

- Resultados excelentes e duradouros das restaurações;
- Durabilidade fantástica dos polidores, devido a alta concentração de diamantes;
- A segunda fase proporciona glaze mecânico, sem necessidade de queima de glaze;
- Os únicos polidores desenvolvidos especialmente para dissilicato de lítio.

**Aplicações:**

- Dissilicato de lítio.

1ª Fase | Média → Acabamento

2ª Fase | Fina → Alto Brilho (Glaze)

→ Sentido correto da rotação: anti-horário

7' - 12000 rpm

Autoclaváveis



KIT 18-106



# EVE Diacera

**Características:**

- Polidor com elevada concentração de diamantes, garante a durabilidade dos polidores e eficiência do polimento;
- A segunda fase proporciona glaze mecânico, sem necessidade de queima de glaze;
- Os únicos polidores desenvolvidos especialmente para zircônia.

**Aplicações:**

- Zircônia Monolítica.

1ª Fase | Média → Acabamento

2ª Fase | Fina → Alto Brilho (Glaze)


→ Sentido correto da rotação: anti-horário

7' - 12000 rpm

Autoclaváveis



KIT 18-107

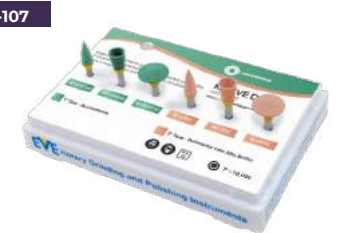

# EVE Diacomp Plus

**Características:**

- Maior flexibilidade e melhor acesso a áreas de difícil acabamento;
- Polidor diamantado de duas fases;
- Durabilidade altíssima;
- Alto brilho em todos compósitos;
- Novo modelo Twist em formato espiral.

**Aplicações:**

- Compósitos.

3' - 8000 rpm

Autoclaváveis

1ª Fase | Média → Acabamento e Pré Polimento

2ª Fase | Fina → Alto Brilho

→ Sentido correto da rotação: anti-horário

**Veja o vídeo**



KIT 18-102



KIT 18-122



# EVE Diacomp Ultra

**Características:**

- Polidor diamantado de uma fase;
- O profissional controla a abrasão e o alto brilho do polimento apenas ajustando a pressão;
- Alta durabilidade.

**Aplicações:**

- Compósitos.

3' - 10000 rpm

Autoclaváveis

1ª Fase | Fina → Acabamento e Polimento de Alto Brilho

KIT 18-101



# EVE Ecoceram

**Características:**

- Polidores com abrasivo de carbeto de silício;
- Economia no trabalho com cerâmicas;
- Desgaste eficiente.

**Aplicações:**

- Cerâmicas.

7' - 15000 rpm

Autoclaváveis

1ª Fase | Grossa → Desgaste

2ª Fase | Média → Acabamento

3ª Fase | Fina → Brilho

KIT 18-204



# EVE Flexi D

Discos flexíveis com abrasivo de óxido de alumínio para trabalho em resinas compostas, ouro ou amálgama.

**Características:**

- Ideais para ajustes interproximais;
- Podem ser utilizados em diversos movimentos, puxando ou empurrando;
- Abrasivos em um lado para melhor controle do ajuste.



**Aplicações:**

- Resinas compostas, ouro ou amálgama.

**18-210 | KIT 10mm**

- 25x Azul - Grossa - FD-10g - 10x0,21mm
  - 25x Rosa - Média - FD-10m - 10x0,17mm
  - 25x Amarela - Fina - FD-10f - 10x0,14mm
  - 25x Branca - Extra-Fina - FD-10sf - 10x0,11mm
- 1x Mandril 95RA

**18-214 | KIT 14mm**

- 25x Azul - Grossa - FD-14g - 14x0,21mm
  - 25x Rosa - Média - FD-14m - 14x0,17mm
  - 25x Amarela - Fina - FD-14f - 14x0,14mm
  - 25x Branca - Extra-Fina - FD-14sf - 14x0,11mm
- 1x Mandril 95RA

7' - 10000 rpm



<b>CÓDIGOS</b>	FD-10g	FD-10m	FD-10f	FD-10sf	FD-14g	FD-14m	FD-14f	FD-14sf
<b>MEDIDAS</b>	10 x 0,21mm				14 x 0,21mm			

# EVE Flexistrips

Tiras com abrasivo de óxido de alumínio para trabalho em resinas compostas, ouro ou amálgama.

**Características:**

- Ideais para ajustes interproximais;
- Utilizado em resinas compostas ou metais;
- Com um espaço livre de abrasivos no meio para melhor utilização;
- Apenas um lado com abrasivo de óxido de alumínio.

**KIT 18-250**



**Aplicações:**

- Resinas compostas, ouro ou amálgama.

- Azul | Grossa - Espessura: 0,21mm.
- Rosa | Média - Espessura: 0,17mm.
- Amarela | Fina - Espessura: 0,14mm.
- Branca | Extra-Fina - | Espessura: 0,11mm

<b>CÓDIGOS</b>	FS-60/40	FS-20/7
<b>MEDIDAS</b>	4x150mm (50 peças por kit, 25 de cada)	

# EVE Diasynt Plus

Pedras abrasivas para desgaste e corte de materiais cerâmicos resistentes, como dissilicato de lítio e zircônia. Especialmente desenvolvidas para trabalhos intraorais, pois, não aquecem a peça.

**Características:**

- Impregnada com diamante natural;
- Alto grau de abrasividade e baixa geração de calor;
- Ideal para ser utilizada sem irrigação;
- Pode ser usado para reduzir as margens de coroas.

8' - 12000 rpm

 Autoclaváveis

**Aplicações:**

- Materiais cerâmicos resistentes, como dissilicato de lítio e zircônia.

● 1ª Fase | Granulação Grossa

● 2ª Fase | Granulação Fina



DYP-W9g DYP-W11g DYP-W13g DYP-W9m DYP-W11m DYP-W13m

# EVE Diastrips

EVE Diastrips tiras metálicas diamantadas para acabamento e desgaste interproximal.

## Vantagens:

- Ideais para ajustes interproximais;
- Com um espaço livre de abrasivos no meio para melhor utilização;
- As perfurações removem o material desgastado durante o uso.

## Aplicações:

- Cerâmicas;
- Dissilicato de lítio;
- Resinas compostas;
- Ligas Metálicas;
- Esmalte original.

 Autoclaváveis



## 18-225 | SET PDL2,5

- 9 Tiras de 2,5mm por 150mm de comprimento;
- 3x Azuis Granulação Grossa | Espessura: 0,11mm.
  - 3x Vermelhas Granulação Média | Espessura: 0,10mm.
  - 3x Amarelas Granulação Fina | Espessura: 0,07mm.

## 18-224 | SET PDL4

- 9 Tiras de 4mm por 150mm de comprimento;
- 3x Azuis Granulação Grossa | Espessura: 0,11mm.
  - 3x Vermelhas Granulação Média | Espessura: 0,10mm.
  - 3x Amarelas Granulação Fina | Espessura: 0,07mm.


# EVE Brush

## Características:

- Escovas com abrasivos à base de carbeto de silício;
- Brilho fantástico sem uso de pasta;
- Polidores de alta durabilidade;
- Excelente custo/benefício.

## Aplicações:

- Compósitos.

 5' - 7000 rpm

 Autoclaváveis

 1ª Fase | Média → Brilho

KIT 18-202




WT1 WZ1 WS1

# EVE Ecocomp

## Características:

- Polidor de silicone impregnado com carbeto de silício;
- Indicado para um desgaste eficiente e econômico, alisamento e brilho de resinas, cerômeros e dentes naturais;
- Duas fases.

 7' - 10000 rpm

 Autoclaváveis

## Aplicações:

- Compósitos;
- Dentes naturais.

 1ª Fase | Grossa → Desgaste e Acabamento

 2ª Fase | Fina → Polimento

KIT 18-201



EC11m EC3Km EC7m EC18m EC11f EC3Kf EC7f EC18f

# EVE Universal

**Características:**

- Polidores de silicone impregnado com carbeto de silício;
- Desgaste eficiente e econômico;
- Ideal para acabamento em preparos.

**Aplicações:**

- Cerâmicas, compósitos, metais, acrílicos, amálgama.

7' - 10000 rpm

Autoclaváveis

1ª Fase | Média → Desgaste e Polimento

KIT 18-205



# EVE Unibrush

**Características:**

- Escovas de nylon para polimento de porcelanas, compósitos e metais utilizando pasta de polimento;
- Tratamento profilático;
- Baixa geração de calor;
- Grande seleção de formatos.

**Aplicações:**

- Cerâmicas, compósitos, metais, tratamento profilático.

5' - 7000 rpm

Autoclaváveis

1ª Fase | Duro

2ª Fase | Médio

3ª Fase | Super Macio

KIT 18-203



# EVE Bracket

**Características:**

- Polidor para remoção de resíduos adesivos dos brackets;
- Os polidores retiram a cola e dão brilho ao dente sem desgaste do esmalte.

5' - 7000 rpm

Autoclaváveis

**Aplicações:**

- Resíduos adesivos de aparelhos ortodônticos.

1ª Fase → Desgaste e polimento

KIT 18-206



# EVE Prophyclean

**Características:**

- Granulação otimizada para não danificar o esmalte e cerâmica;
- Feito inteiramente com abrasivos e livre de látex, livre de fibras.

**Aplicações:**

- Remover placa, tártaro, manchas e cáries iniciais, excesso de cimento;
- Alisamento da raiz subgingival;
- Opção mecânica de profilaxia para pacientes sensíveis ao ultrassom.

5' - 10000 rpm

Autoclaváveis

1ª Fase | Grossa

2ª Fase | Média



# Kits para clínica

## EVE Diapol Basic para cerâmicas

- Kit econômico de polidores diamantados para cerâmica.
- Desgaste, acabamento e polimento de alto brilho com 6 peças, taças e pontas.
- Alta durabilidade.



KIT 18-195

## EVE Diapol para cerâmicas

- Polidores diamantados de alta durabilidade.
- Desgaste, acabamento e alto brilho.
- A 3ª Fase realiza glaze mecânico.
- O melhor kit para restaurações cerâmicas.



KIT 18-105

## EVE Diapol Twist para cerâmicas

- Polidores Twist diamantados.
- Desgaste, acabamento e alto brilho em todos materiais cerâmicos.
- A 3ª Fase realiza glaze mecânico.
- Formato inovador para polimento de toda a superfície do trabalho.



KIT 18-121

## EVE Cerâmicas Dr. Arbex

- Desgaste, acabamento e polimento com brilho glaze em todos materiais cerâmicos.
- Ideal para dissilicato de lítio, metal-cerâmicas, zircônia e demais cerâmicas feldspáticas.



KIT 18-373

## EVE Diacomp Twist Basic para resinas

- Kit econômico de polidores Twist para resina composta.
- Alto brilho em resinas.
- Alta durabilidade dos polidores.



KIT 18-192

## EVE Diacomp Twist para resinas

- Polidores Twist diamantados para acabamento e polimento de todas resinas compostas.
- Acabamento e alto brilho em 2 fases.
- Formato inovador para polimento de toda a superfície do trabalho.



KIT 18-122

Dicas de uso



# Kits para clínica

## EVE Diacomp plus para resinas

- Polidores diamantados de alta durabilidade.
- Acabamento e alto brilho em duas fases.



KIT 18-102

## EVE Diapro para Lisi2

- Duas fases de polimento para resultados com alto brilho (glaze).
- Feitos especialmente para correções e ajustes diretamente no paciente.
- Altamente eficiente com o mínimo trabalho.



KIT 18-106

## EVE Diacomp ultra para resinas

- Polidor diamantado de uma fase.
- O profissional controla a abrasão e o alto brilho do polimento apenas ajustando a pressão.
- Alta durabilidade.



KIT 18-101

## EVE Brackets

- Remoção de resíduos adesivos dos brackets, sem danificar o esmalte dos dentes.
- Remoção de tártaro e placa.



KIT 18-206

## EVE Universal

- Polidores com abrasivos de carbeto de silício.
- Para cerâmicas, compósitos, metais, acrílicos e amálgama.



KIT 18-205

## EVE Resinas Dr. Arbex

- Acabamento e polimento em resinas compostas.
- Com abrasivo de diamante natural, esses polidores são incrivelmente duráveis.



KIT 18-372

## EVE Diapro plus p/ Lisi2

- Pedra para desgastar pontos e ajustes.
- Polidor azul para pequenos desgastes.
- Sequência de Twist para acabamento e glaze mecânica.



KIT 18-399

## EVE Ecoceram plus para cerâmicas

- Polidores com abrasivos de carbeto de silício.
- Desgaste eficiente e econômico.
- Polidor diamantado para glaze mecânico.



KIT 18-204

## EVE Ecocomp plus para resinas

- Polidores com abrasivos de carbeto de silício.
- Desgaste, acabamento e polimento.
- Escovas para brilho fantástico.



KIT 18-202

## EVE Ecocomp para resinas

- Polidor de silicone impregnado com carbeto de silício.
- Desgaste eficiente e econômico.
- Indicado também para alisamento e brilho de resinas, cerômeros e dentes naturais.




KIT 18-201





# Brocas de Tungstênio DFS

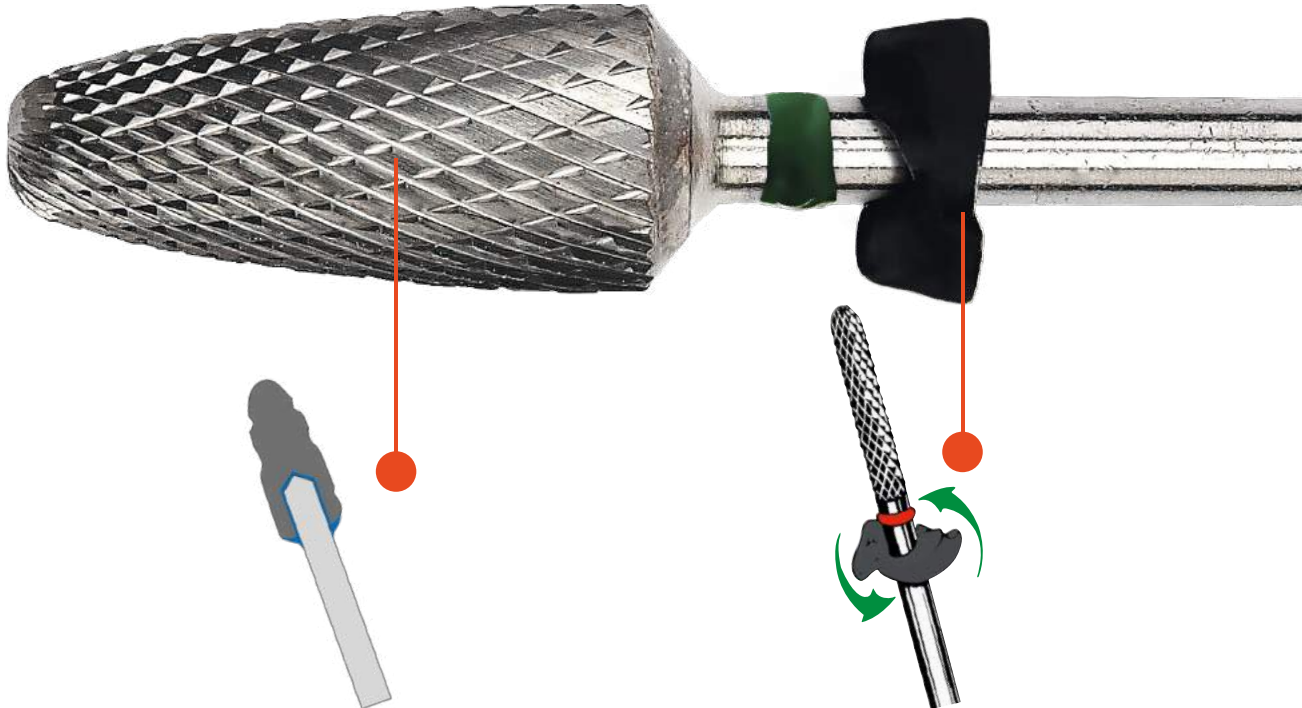

As brocas de tungstênio Odontomega são incrivelmente duráveis e com corte extremamente afiado. Excelente custo/benefício em uma broca Made in Germany. Tarjas coloridas para identificar o corte. Hélice exclusiva, impede e previne que poeira entre na peça de mão e danifique os rolamentos. Hélice exclusiva presente em todas as brocas OdontoMega DFS.

- Soldagem especial entre o mandril e cabeça da broca, garantindo durabilidade estendida.
- Controle de qualidade Made in Germany.
- Hélice exclusiva presente em todas as brocas OdontoMega. O movimento giratório da broca e da hélice emite ar, expelindo poeiras e detritos da peça trabalhada para fora da entrada da caneta do motor de bancada.
- Encaixe a broca de acordo com a figura e garanta uma maior vida útil do seu motor.

Assista ao vídeo  
pelo QR code



ou pelo link  
<https://bit.ly/3nZofh5>



# Brocas de Tungstênio

## Características:

- Diferentes cortes, separados por tarjas coloridas;
- Rigoroso processo de fabricação, com garantia de durabilidade;
- Código da broca impresso a laser no mandril, para facilitar a identificação após o uso prolongado;
- Hélice de proteção de motor inclusa, impede que a poeira entre no motor.

### CORTE LISO




- Corte Extra grosso
- Corte Grosso
- Corte Fino
- Corte Extra fino
- 15' - 30000 rpm

### Aplicações:

- Todos os metais ..... ● ● ● ●
- Resinas ..... ● ● ● ●
- Gesso ..... ●
- Moldeira ..... ●
- Zircônia não sinterizada ..... ●

### CORTE CRUZADO

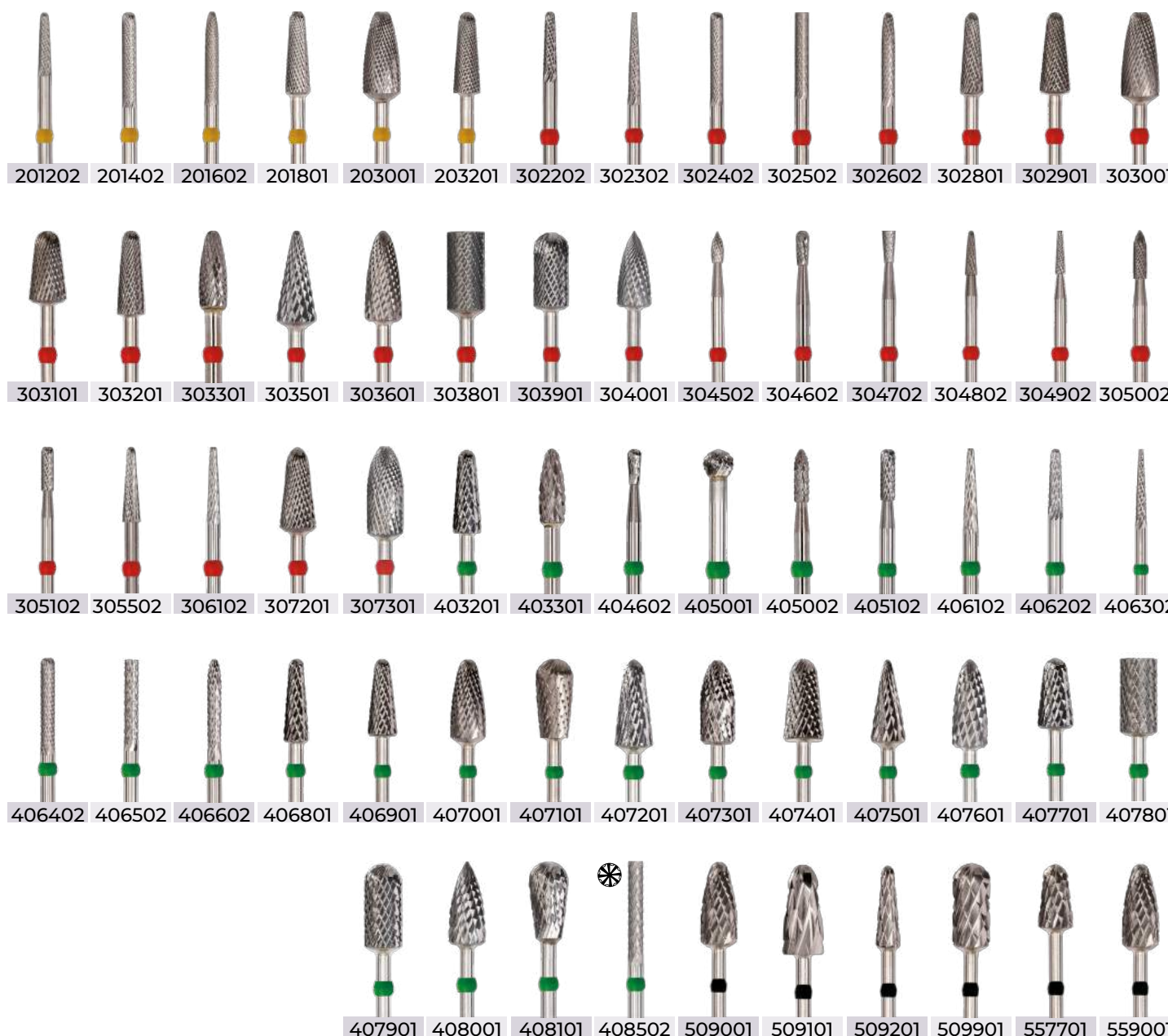

# Brocas Diamantadas




**Características:**


- Granulação de diamante otimizada;
- Durabilidade até quatro vezes maior que as concorrentes;
- Hélice de proteção de motor inclusa, impede que a poeira entre no motor;
- Código da broca impresso a laser no mandril.

\* Broca diamantada para localização do pino de troquel.

**Aplicações:**

- Cerâmicas;
- Dissilicato de Lítio;
- Resinas Compostas.

-  Média
-  Fina
-  15' - 30000 rpm

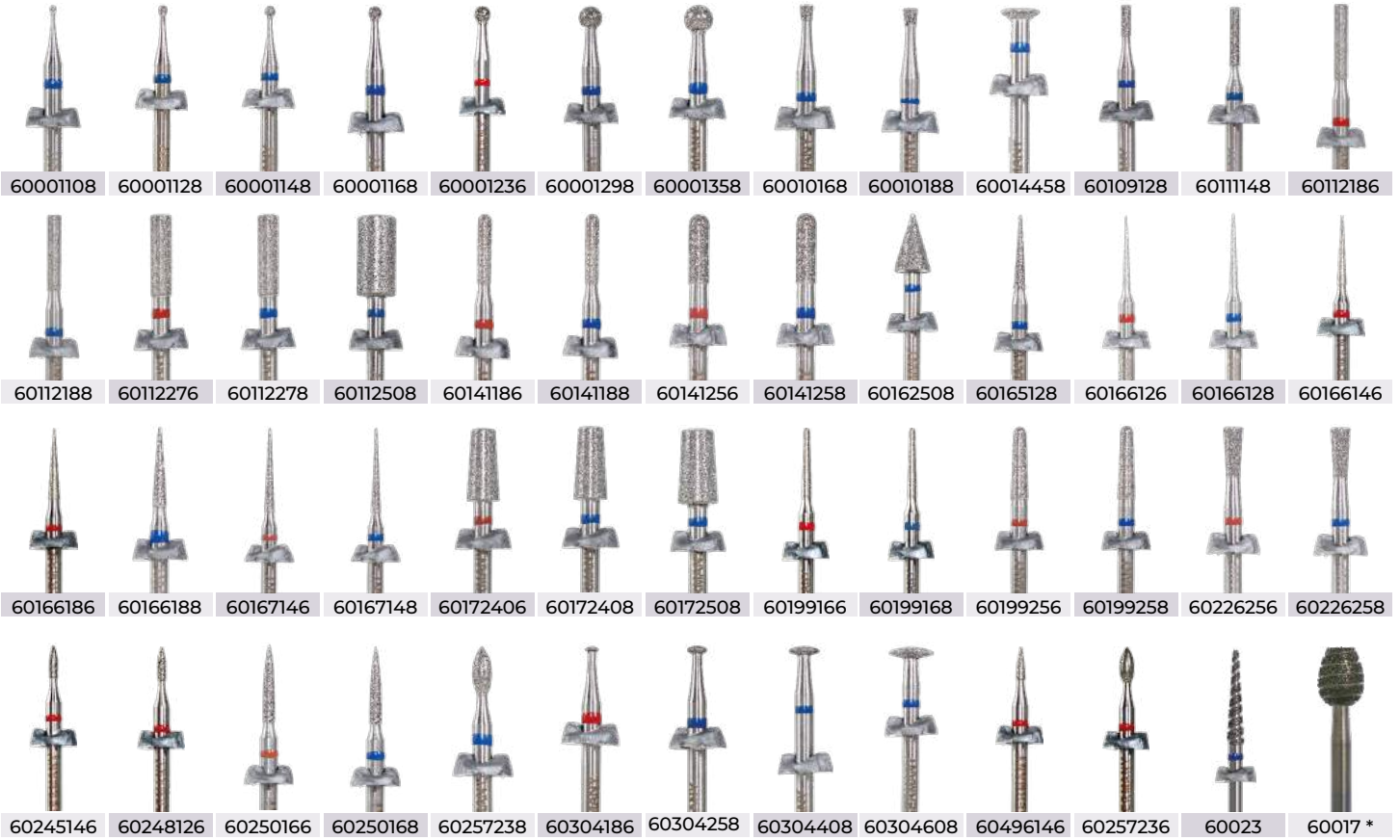

# Brocas Sinterizadas

**Características:**

- Vida útil maior que a das brocas diamantadas convencionais;
- Hélice de proteção de motor inclusa, impede que a poeira entre no motor;
- Código da broca impresso a laser no mandril.

**Aplicações:**

- Cerâmicas;
- Zircônia;
- Dissilicato de lítio.

 5' - 30000 rpm

-  Extra grossa
-  Grossa
-  Fina
-  Extra fina



# Turbocut Tungsten

Cor	Código	Corte
●	1	Extra grossa
●	2	Grossa
●	3	Média
●	4	Fina
●	5	Extra fina



# Turbocut Diamond

Granulação
● Grossa
● Média
● Fina





A linha de discos OdontoMega é completa. Oferecemos discos diamantados e sinterizados, para corte de diferentes materiais. Nos orgulhamos em fornecer produtos com incrível durabilidade e eficiência de corte, com controle de qualidade e que atendem todos os padrões europeus de fabricação.

## Disco MegaDisc Diamante

Disco impregnado com diamantes para recorte e acabamento de dissilicato de lítio, zircônia e cerâmicas.

### Características:

- Perfeito para o corte preciso de sprues de dissilicato de lítio e cerâmicas injetadas;
- Sua flexibilidade garante um acesso fácil aos locais de corte;
- Reforçado com uma camada dupla de fibra de vidro, para uma maior durabilidade;
- Baixa vibração e geração de calor, ideal para cortar cerâmica injetada;
- Acabamento de bordo incisal.

### Aplicações:

- Dissilicato de lítio;
- Zircônia;
- Cerâmicas.

MAX- 50000 rpm

Veja o vídeo



<b>CÓDIGO</b>	08-001
<b>DIÂMETRO</b>	Ø 20 mm
<b>ESPESSURA</b>	0,25 mm



## Disco Diamantado Dupla Face

### Características:

- Discos diamantados para acabamento e corte de cerâmicas;
- Alta concentração de diamantes na superfície;
- Incrível durabilidade;
- Hélice de proteção de motor inclusa, impede que a poeira entre no motor;

\* Disco 122221 também disponível na versão sem mandril pelo código 122222.

- Corte Grosso
- Corte Fino
- Corte Extra fino
- 5' - 10000 rpm

### Aplicações:

- Cerâmicas..... ● ● ●
- Resinas Acrílicas ● ● ●
- Resinas Foto ..... ● ● ●
- Dissilicato de lítio ..... ● ● ●
- Zircônia ..... ● ● ●



<b>CÓDIGOS</b>	111921 ●	112221 ●	121921 ●	122221 ●	140921 ●	142221 ●
<b>DIÂMETROS</b>	Ø 19 mm	Ø 22 mm	Ø 19 mm	Ø 22 mm	Ø 9 mm	Ø 22 mm
<b>ESPESSURAS</b>	0,19 mm	0,19 mm	0,17 mm	0,17 mm	0,17 mm	0,10 mm

# Disco Diamantado Ventilado


## Características:



- O formato permite a melhor visualização da peça trabalhada;
- Ideal para contornos;
- Hélice de proteção de motor inclusa, impede que a poeira entre no motor.



## Aplicações:

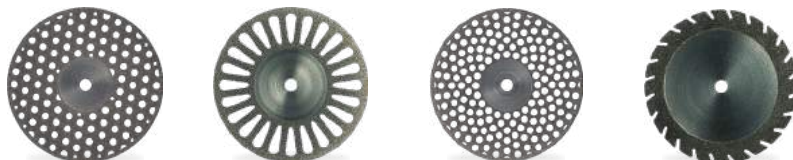- Cerâmicas;
- Resina acrílica;
- Resina foto.



-  Corte Fino
-  3' - 5000 rpm

CÓDIGOS	182251 	182221 	182231 	152221 
DIÂMETROS	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm
ESPESSURAS	0,17 mm	0,17 mm	0,17 mm	0,17 mm




# Disco Diamantado Total e Côncavo

## Características:

- Discos diamantados totais para acabamento e contornos;
- Disco côncavo ideal para técnica sem ponta.

## Aplicações:

- Cerâmicas;
- Acrílicos;
- Gesso.

-  Corte Médio
-  Corte Fino
-  5' - 15000 rpm



CÓDIGOS	112251 	112241 	162211 
DIÂMETROS	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm
ESPESSURAS	0,24 mm	0,28 mm	0,30 mm

# Disco Flash


Disco para corte ultra rápido de metais. A composição de carborundum especial garante que o metal trabalhado não se aquecerá em excesso, melhorando o trabalho.


## Características:

- Material resistente e altamente durável;
- Corte rápido e preciso;
- Reduz o aquecimento da peça trabalhada;
- Caixa com 100 unidades.

## Aplicações:

- Ligas metálicas;
- Metais nobres.

-  10' - 50000 rpm

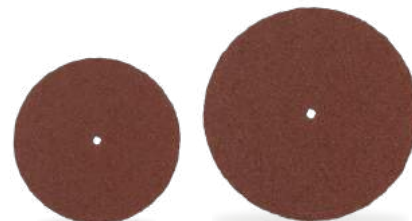

CÓDIGOS	DF25	DF38
DIÂMETROS	Ø 25 mm	Ø 38 mm
ESPESSURAS	0,6 mm	0,7 mm

## Disco Sinterizado Sidia


### Características:

- Disco com bordo maciço de diamante sinterizado;
- Os únicos com 0,15mm de espessura;
- Ideal para contornos e separações de cerâmicas.

### Aplicações:

- Cerâmicas;
- Zircônia;
- Dissilicato de lítio.

 Corte Super Fino

 3' - 5000 rpm




<b>CÓDIGOS</b>	182021 	181221
<b>DIÂMETROS</b>	Ø 20 mm	Ø 12 mm 
<b>ESPESSURAS</b>	0,15 mm	0,15 mm

## Disco Sinterizado Rígido

### Características:


- Discos sinterizados de diamantes naturais;
- Incrível durabilidade;
- Hélice de proteção de motor inclusa, impede que a poeira entre no motor;
- \* Disco 50154 também na versão sem mandril pelo código 50154UM.

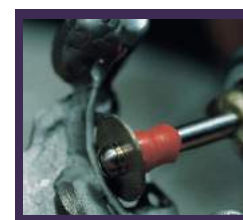




### Aplicações:

- Cerâmicas;
- Metais.

 Corte Fino

 5' - 15000 rpm

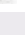

<b>CÓDIGOS</b>	50154 	50265 	50143 
<b>DIÂMETROS</b>	Ø 22 mm	Ø 16 mm	Ø 8 mm
<b>ESPESSURAS</b>	0,30 mm	0,25 mm	0,40 mm

## Disco para Gesso e Troquel


### Características:


- Alta durabilidade;
- Incrível poder de corte.

### Aplicações:

- Gesso;
- Troquel.

 Corte Fino

 5' - 10000 rpm

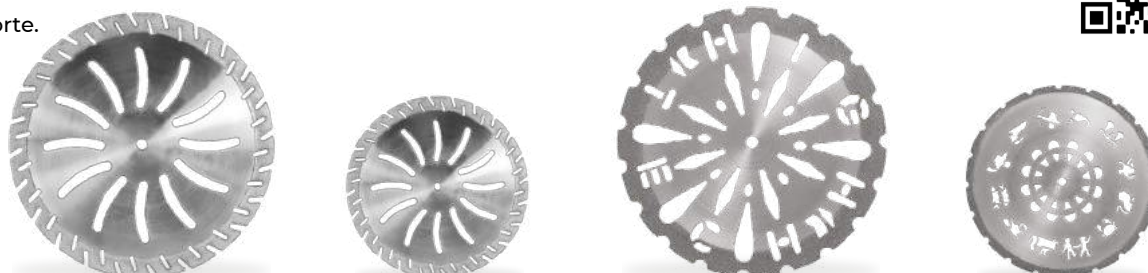

<b>CÓDIGOS</b>	DD45 	DD35 	154522 	153722 
<b>DIÂMETROS</b>	Ø 45 mm	Ø 35 mm	Ø 45 mm	Ø 37 mm
<b>ESPESSURAS</b>	0,35 mm	0,30 mm	0,26 mm	0,26 mm

Veja o vídeo



# Cera ArtWax PRESS

As ceras ArtWax Press OdontoMega são feitas na Alemanha, por uma empresa especializada na fabricação de ceras há mais de 100 anos. Linha com características especiais para o enceramento de coroas e pontes, com a técnica de enceramento progressivo ou de esculpir. Desenvolvidas especialmente para técnica de prensagem e injeção de cerâmicas, especialmente com dissilicato de lítio (LiSi2). Ideais para Mock-up.

**Características:**

- Cores opacas e intensas para facilitar a visualização dos detalhes do enceramento;
- Qualidade perfeita do enceramento, orgânicas;
- Contração mínima;
- Muito fácil de ser esculpida e raspada;
- Queima totalmente livre de resíduos.

**Aplicações:**

- Enceramento e escultura.



Priscila Rizzi



Danilo Bernardes



<b>CÓDIGOS</b>	05-101	05-102	05-103
<b>CORES</b>	ArtWax Natural 70g	ArtWax Menta Opaca 70g	ArtWax Marfim 70g



<b>CÓDIGOS</b>	05-104	05-106	05-107
<b>CORES</b>	ArtWax Cinza 70g	ArtWax Azul 70g	ArtWax Cervical Vermelha 70g



<b>CÓDIGOS</b>	05-108	05-109	05-113
<b>CORES</b>	ArtWax Verde 70g	ArtWax Marrom 70g	ArtWax Lilás 70g



SCAN

<b>CÓDIGOS</b>	05-111	05-110
<b>CORES</b>	ArtWax Amarela 70g	ArtWax ScanWax Branca 70g





# Ceras ArtWax Rugosas


Ceras com diferentes níveis de rugosidade para PPR.

## Características:

- Transparência ideal para visualização das marcações do modelo;
- Excelente qualidade de fabricação;
- Caixas com 15 unidades de lâminas de ceras;
- Adaptação perfeita e ótima aderência ao modelo;
- Medidas: 175 x 80 mm por folha.

## Aplicações:

- Prótese parcial removível.

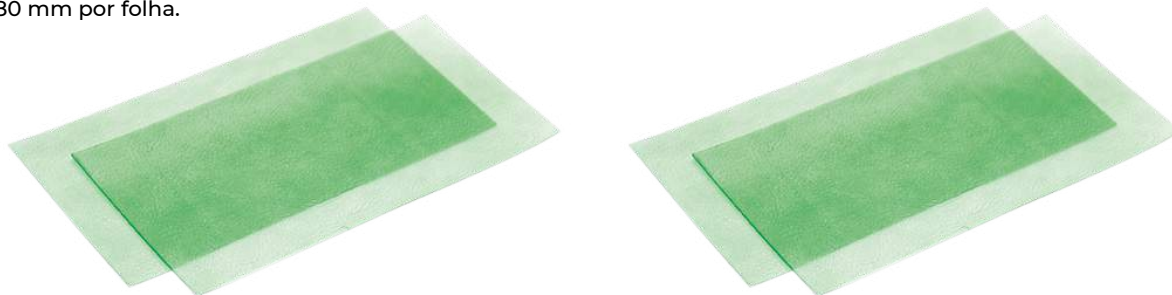

CÓDIGOS	05-214	05-215	05-216	05-224	05-225	05-226
PRODUTOS	Rugosa	Rugosa	Rugosa	Mais Rugosa	Mais Rugosa	Mais Rugosa
ESPESSURAS	0,40mm	0,50mm	0,60mm	0,40mm	0,50mm	0,60mm




# Grampos ArtWax Pré-Fabricados

Grampos em cera de forma anatômica facilmente adaptável.

Alta estabilidade e precisão.

## Características:

- Aderência perfeita ao modelo;
- Facilmente modelável e adaptável;
- Coloração verde;
- Contém 200 peças.

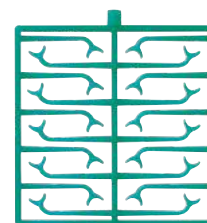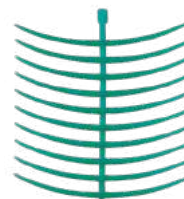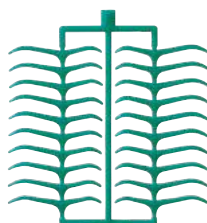

## Aplicações:

- Prótese parcial removível.



CÓDIGOS	05-303	05-305	05-310
PRODUTOS	Grampos Molares	Grampos Anelares	Grampos Bonyhard

# Cera ArtWax Retenção

Ceras de retenção de altíssima qualidade para técnicas de fundição.

## Características:

- Alta estabilidade e plasticidade;
- Facilmente adaptável;
- Coloração vermelha;
- 15 unidades por caixa.

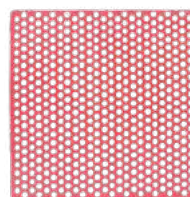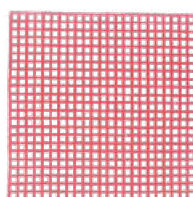

## Aplicações:

- Prótese parcial removível.

CÓDIGOS	05-500	05-501	05-502
PRODUTOS	Cela Quadrada	Cela Redonda	Reta

## Cera Sprue ArtWax

Cera especial para montagem de sprue de anéis de injeção/fundição.

### Características:

- Excelentes propriedades de queima;
- Livre de resíduos;
- Cera de média dureza, tipo verde
- Diferentes espessuras;
- Excelente maleabilidade, pode ser modelada facilmente;
- Contém 250g.



<b>CÓDIGO</b>	05-430	05-435	05-440
<b>TAMANHO</b>	3.0mm	3.5mm	4.0mm

## Cera 7 ArtWax

Cera 7 de qualidade excepcional, Made in Germany. Para todo tipo de trabalho de prótese total e protocolo. Qualidade superior devido a sua flexibilidade otimizada e pela composição de cera de abelha.

### Características:

- Endurece rapidamente após esfriar;
- Baixíssima contração;
- Composição de 50% cera de abelha e 50% parafina;
- Não distorcem na montagem, devido a sua característica plástica;
- Orgânica, livre de resíduos.

### Aplicações:

- Prótese total e protocolo.



<b>CÓDIGO</b>	05-507
<b>MEDIDAS</b>	80 x 1,5 mm
<b>PESO</b>	500g

## Cera ArtWax DIP

Desenvolvida especialmente para produção de copings de cera utilizando a técnica de imersão.

### Características:

- Elimina o risco de distorção;
- Excelente memória elástica;
- Contração mínima.

### Aplicações:

- Técnica de imersão.



<b>CÓDIGO</b>	05-431
<b>PRODUTO</b>	Cera Dip
<b>PESO</b>	300g
<b>TEMP. DE FUSÃO</b>	87°C



## Escovas de Polimento

As escovas de polimento OdontoMega são fabricadas na Alemanha, por uma empresa especializada. São escovas de altíssima qualidade, utilizando os melhores materiais do mercado para alcançar a máxima eficiência e durabilidade com seu uso.

### Características:

- Fabricado com os melhores materiais do mercado;
- Máxima eficiência durante o uso.

### Aplicações:

- Polimento de diversos materiais.



CÓDIGOS	08-212	08-213	08-214	08-215	08-216	08-217
MATERIAIS	Bison Macia	Feltro Macia	Cabra Macia	Flanela Extra Macia	Bison Cinza Média	Crina de Cavallo
DIÂMETROS	Ø 19 mm	Ø 22 mm	Ø 19 mm	Ø 22 mm	Ø 19 mm	Ø 19 mm

Veja o vídeo



Dica: A escova de Aço 08-219 é ideal para abrir os anéis de revestimento, quando se trabalha com a técnica de cerâmica prensada.



CÓDIGOS	08-218	08-219	08-224	08-226
MATERIAIS	Couro Macio	Aço	Cabra Estrela Macia	Bison Cinza Estrela Médio
DIÂMETROS	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm

## Escovas Scotch Brite

### Aplicações:

- Para desgaste, acabamento e polimento de resinas acrílicas;
- Acabamento em zircônia não sinterizada.



CÓDIGOS	08-241	08-242	08-243
GRANULAÇÕES	Grossa	Média	Fina
DIÂMETROS	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm

# Escovas de Polimento

As escovas de polimento OdontoMega são produzidas na Alemanha por uma empresa especializada nesta fabricação. São escovas de altíssima qualidade, utilizando os melhores materiais do mercado para alcançar a máxima eficiência e durabilidade com seu uso.

**Características:**

- Fabricado com os melhores materiais do mercado;
- Máxima eficiência e durabilidade durante o uso.

**Aplicações:**

- Escovas e Flanelas para uso em torno de polimento;
- Polimento de diversos materiais.



<b>CÓDIGOS</b>	08-230	08-231	08-228	08-229	08-234
<b>MATERIAIS</b>	Flanela	Flanela Grossa	Muslim Amarela	Muslim Especial Branca	Cabra
<b>DIÂMETROS</b>	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 48 mm




<b>CÓDIGOS</b>	08-235	08-236	08-237	08-238	08-239
<b>MATERIAIS</b>	Pano	Pano Macia	Pelo Sintético Preto	Couro	Microfibra
<b>DIÂMETROS</b>	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 48 mm	Ø 51 mm	Ø 51 mm

# Escovas Upofix

**Características:**

- Escovas de kevlar (material para coletes à prova de balas e capacetes de fórmula 1) impregnadas com carbeto de silício.

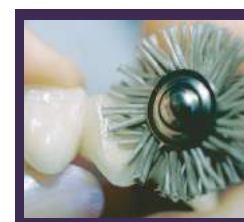

**Aplicações:**

- Para uso em metal, cerâmica ou resina foto.

- Acabamento em Metal
- Pré-polimento em Cerâmica
- Brilho mate em Resina Foto
- ⌚ 5' - 15000 rpm



<b>CÓDIGOS</b>	802239	802249	802259
<b>DIÂMETROS</b>	Ø 21 mm	Ø 21 mm	Ø 21 mm

# Mandril



<b>CÓDIGOS</b>	509077	505208	95RA
<b>USOS</b>	Discos e Polidores	Adaptador FG - PM	Adaptador Flexi-D

## Megaseal Glaze

Este selador foto é feito de um mono componente de verniz indicado para resinas acrílicas e foto. O selador possibilita uma padronização de brilho e vedamento de poros em próteses totais, parciais, aparelhos ortodônticos, provisórios e resinas foto.

### Características:

- Brilho eficiente em resina foto;
- Possibilita brilho em locais de difícil acesso;
- Veda micro poros existentes na resina, evitando assim acúmulo de placas bacterianas e facilitando na profilaxia da prótese, apresentando maior resistência aos materiais de limpeza, deixando uma superfície lisa e brilhante;
- Selamento de alto brilho sem polimento oneroso manual, superfície totalmente seca após a polimerização;
- Sela prótese total, moldeiras individuais e aparelhos ortodônticos;
- Brilho da superfície e aumento da dureza;
- Brilho em aparelhos ortodônticos.

### Aplicações:

- Brilho fantástico em resina foto e selante.



<b>CÓDIGOS</b>	08-400
<b>CONTÉM</b>	30ml

## Occlean Carbono e Scan Spray

Spray de oclusão para verificação de pontos de contato, oferece marcação perfeita e detalhada. Também utilizado para escanear materiais com alto brilho, deixando a peça opaca para facilitar a leitura do scanner (utilizado em moldagens, gengiva artificial e outros).

### Características:

- Frasco com bico aplicador para precisão. Utilizar sem bico para Scan;
- Espessura ideal, cobre perfeitamente em um único jato;
- Controle total da espessura de camada, aplicando a seco;
- Remoção facilitada com água ou jato de vapor;
- Espessura pode ser controlada com maior ou menor tempo de aplicação, entre 6-8 microns.

### Aplicações:

- Marcação de pontos de contato;
- Scan spray para facilitar leitura pelo scanner.

### Cor:

Verde 



<b>CÓDIGOS</b>	08-334
<b>CONTÉM</b>	75ml

## Megatray

Megatray é um material fotopolimerizável para a construção de moldeiras individuais.

### Características:

- O Megatray substitui as placas bases comuns, que demoram muito tempo para serem confeccionadas e causam muita sujeira no laboratório;
- Com Megatray você faz suas moldeiras individuais e outros moldes em segundos;
- 5 minutos para a polimerização;
- Excelente custo-benefício, caixa com 50 placas.



### Veja o vídeo



### Aplicações:

- Construção de moldeiras individuais;
- Moldeira de arrasto para protocolo.

<b>CÓDIGOS</b>	08-401	08-402
<b>CORES</b>	Pink	Transparente

## Pastas para Polimento

### Características:

- Alto brilho;
- Incrível durabilidade;
- Excelente custo/benefício.

### Aplicações:

- Polimento de diversos materiais.



Compósitos -  
Cerâmicas -  
Acrílico.



Metais preciosos e não  
preciosos - Armação  
- Titânio - Cerâmicas -  
Acrílico - Compósito.

<b>CÓDIGOS</b>	08-520	08-518
<b>PRODUTOS</b>	Polistar Bege 100g	Polistar Universal 50ml

# IsoPlaster

Isolante de gesso contra gesso. IsoPlaster isola o gesso deixando uma superfície super lisa, sem formar películas, vedando assim todos os poros do gesso.

### Características:

- Ideal para a técnica de troquelização;
- Aplicar com um pincel;
- Deixe o IsoPlaster agir por 10 minutos e passe uma flanela seca no modelo para se obter o brilho.

### Aplicações:

- Gesso.



<b>CÓDIGOS</b>	08-115
<b>CONTÉM</b>	250ml

# Megahard

Agente impermeabilizante e endurecedor de gesso.

### Características:

- Penetra e sela os poros do modelo, deixando uma superfície lisa para o trabalho;
- Pode ser aplicado com o pincel do frasco ou através de imersão;
- Não forma películas;
- Deixa uma superfície lisa e dura;
- Fortalece os bordos do troquel, evitando quebrar ou lascar.

### Aplicações:

- Gesso



<b>CÓDIGOS</b>	08-103
<b>CONTÉM</b>	30ml

# Megasep

Agente isolante para cera e cerâmica, livre de solvente. Isola com grande fluidez e foi desenvolvido especialmente para a técnica de imersão.

### Características:

- Não deixa marcas pretas na cerâmica após a queima;
- Não estraga o pincel do ceramista;
- Não forma películas;
- Elimina as tensões na superfície do gesso, resina acrílica e metal;
- Garante absoluta precisão no ajuste das coroas em cera;
- Não evapora;
- Acompanha pincel para aplicação.

### Aplicações:

- **Isolante:** gesso/cera, gesso/cerâmica.



<b>CÓDIGOS</b>	08-102
<b>CONTÉM</b>	30ml

# Pasta Lunar

Pasta Lunar Diamantada é excelente para o polimento em diversos tipos de materiais, especial para dissilicato de lítio, zircônia, cerâmicas híbridas e até resinas e cerômero. Com alto teor de diamante, a pasta diamantada Lunar consegue alto brilho em apenas uma etapa.

### Vantagens:

- Alta durabilidade;
- Excelente poder de polimento;
- Produto pode ser usado com diversas escovas.

\*Dica: Utilizar com escova de Cabra ou Feltro na rotação 10.000 rpm.

Veja o vídeo



<b>CÓDIGOS</b>	08-125
<b>CONTÉM</b>	50g

## EasyForm

Aditivo para porcelana. Com apenas uma gota possibilita que a porcelana adquira uma consistência pastosa, aumentando o tempo de manipulação da cerâmica.

### Características:

- Permite esculpir mínimos detalhes sem que a porcelana desmorone;
- Funciona com qualquer tipo de porcelana;
- Não influencia durante a queima;
- Evaporação mínima;
- Incolor;
- Conserva a umidade da porcelana por mais tempo.

### Aplicações:

- Cerâmicas.

### Veja o vídeo



<b>CÓDIGOS</b>	08-104
<b>CONTÉM</b>	250ml

## GelFix

Adesivo temporário GelFix, para posicionar e fixar facetas, lentes, coroas e copings no modelo de gesso, facilitando a aplicação de cerâmica ou maquiagem. Solúvel em água.

### Características:

- Fixa os elementos no modelo de gesso para facilitar a aplicação de cerâmica ou maquiagem;
- Ideal para verificar a adaptação;
- Lavável em água, não mancha e nem contamina o trabalho.

### Aplicações:

- Fixador de cerâmica, cera ou peças metálicas leves no modelo de gesso.

### Veja o vídeo



<b>CÓDIGOS</b>	08-124
<b>CONTÉM</b>	3g

## L10 micro

L10 é um isolante para êmbolos durante a injeção de LiSi2. Antes da injeção, passar por toda a superfície do êmbolo para isolar e não grudar na pastilha.

### Vantagens:

- Isola o êmbolo para não grudar na pastilha;
- Facilita a retirada do êmbolo do anel.



<b>CÓDIGOS</b>	08-135
<b>CONTÉM</b>	5g

## Resinsep

Agente isolante para resinas foto.

- Cria uma película emborrachada sobre a superfície do gesso, fazendo com que a resina não tenha adesão no preparo;
- Proporciona um alívio adequado para a cimentação;
- Cria uma película emborrachada que quando seca (secagem rápida), pode ser facilmente removida;
- Não mancha o troquel.

### Veja o vídeo



<b>CÓDIGOS</b>	08-136
<b>CONTÉM</b>	15ml

# Megafix

Material refratário ideal para manter os elementos fixos durante a queima.

**Características:**

- Ideal para lentes de contato, facetas, fragmentos e coroas;
- Fácil remoção após a queima, não deixando resíduos;
- Universal para todo tipo de cerâmica;
- Facilita o dia a dia do laboratório e agiliza o processo de queima de cerâmicas.

**Aplicações:**

- Todo tipo de cerâmica.



Veja o vídeo



<b>CÓDIGOS</b>	08-107
<b>CONTÉM</b>	12ml



# Dyvex

Líquido especial Dyvex, utilizado para eliminar a camada de reação formada no processo de injeção de cerâmicas prensadas e dissilicato de lítio (LiSi<sub>2</sub>).

**Características:**

- Limpeza de peças injetadas de dissilicato de lítio (LiSi<sub>2</sub>) em 30 minutos;
- Muito econômico, o mesmo líquido pode ser usado para até 20 limpezas;
- Identifica partículas incrustadas de revestimento no dissilicato de lítio a serem removidas com jato de areia;
- Não agride a peça;
- Após o tempo no líquido, jatear a peça com esfera de vidro ou óxido para limpeza final.



**Aplicações:**

- Remover camada de reação de prensagens.

<b>CÓDIGOS</b>	08-117
<b>CONTÉM</b>	500ml

# Anel e Êmbolo para prensagem de LiSi<sub>2</sub>

Anel de silicone ideal para prensagem de dissilicato de lítio LiSi<sub>2</sub>. Disponível em 2 tamanhos (100g e 200g), os anéis LiSi<sub>2</sub> são feitos especialmente para o dissilicato. A espessura do posicionador de sprue da base é de 13mm, portanto deve ser utilizado um êmbolo com 13mm para injeção (mesmo tamanho das pastilhas de dissilicato de lítio).

**Características:**

- Extremamente duráveis, podem ser usados e lavados diversas vezes;
- Kit completo com anel de silicone, base e topo;
- Tamanho ideal para posicionar os sprues;
- Êmbolo em alumina para diversos usos;
- Êmbolo com espessura de 13mm.

**Aplicações:**

- Prensagem de Dissilicato de Lítio LiSi<sub>2</sub>.



<b>CÓDIGOS</b>	08-131	08-132	08-123
<b>EMBALAGENS</b>	100g	200g	1 un.



## Cadinhos

Cadinhos produzidos com cristais de quartzo, fabricados para garantir incrível resistência em altas temperaturas.

### Características:

- Alta durabilidade e resistência;
- Cadinhos de quartzo;
- Vários formatos disponíveis.



### Aplicações:

- Fundição de ligas metálicas.

CÓDIGOS	08-900	08-901	08-902	08-906
TIPOS	Kerr fechado	Kerr aberto	Indução Bego	Indução Ugin
TAMANHOS	N3	N3	-	-

## Bandejas refratárias e pinos para queima


Bandejas refratárias no estilo “colmeia de abelha” para uso em forno de laboratório de prótese, ideal para técnica de metalocerâmica ou metal free.

### Características:

- Inúmeras posições para queima e de posicionamento de pinos;
- Super leve;
- Devido a sua construção em colmeia, evita trincas e manchas.

### Aplicações:

- Queima de cerâmicas.

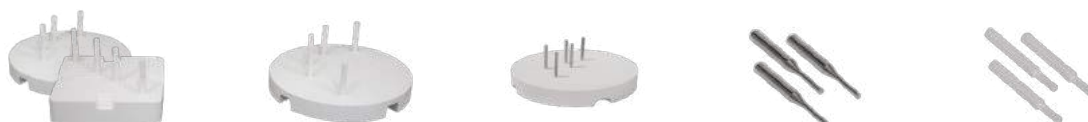

CÓDIGOS	08-903	08-904	08-908	08-905	08-907
TIPOS	Kit Quadrada 55mm + Redonda 80mm + 30 pinos cerâmicos	Redonda 80mm + 15 pinos cerâmicos	Redonda 80mm + 15 pinos metálicos	15 pinos metálicos	15 pinos cerâmicos

## Alicate Crown Master

### Características:

- Protege as mãos e os dedos de acidentes;
- Resiste até 150°C;
- Permite trabalhar em qualquer superfície de coroas e inlays.

### Aplicações:

- Coroas e inlays.



**CÓDIGO** 12019

## Jacket Grip Pinça Crownny


Pinça para copings e coroas delicadas.

### Características:

- Proporciona um maior cuidado na fixação do coping sem causar danos;
- O ceramista tem total controle da peça ao trabalhar.

### Aplicações:

- Copings e coroas delicadas.

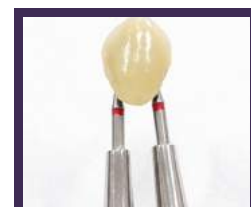

**CÓDIGO** 70004

# Silikon - Silicone A de duplicação

Silikon é um duplicador de modelos à base de silicone de adição. Fabricado na Alemanha pelo líder mundial em silicões. Silikon é o que existe de mais preciso em material de duplicação de modelos.

### Características:

- Ideal para técnica de refratário com lentes e facetas finas;
- Alta fidelidade e elasticidade;
- Grande resistência à ruptura;
- Melhor custo/benefício do mercado.



### Aplicações:

- Duplicação de modelos.

CÓDIGOS	08-209	08-309	08-222	08-322
DUREZAS	Shore 09	Shore 09	Shore 22	Shore 22
EMBALAGENS	2x250ml	2x950ml	2x250ml	2x950ml
APLICAÇÕES	Refratário com lentes finas	Refratário com lentes finas	Técnica de refratário	Técnica de refratário

# Lupa Super Scope

A lupa de cabeça mais usada pelos melhores dentistas protesistas e técnicos em prótese dentária.

### Características:

- Lente de cristal, excelente foco;
- Design ergonômico, super leve e resistente;
- Ajuste total ao formato da cabeça com fecho de velcro;
- Aumento de 3,5x;
- 275 milímetros comprimento focal.



CD. Cynthia Assis Morilla TPD. Lindoedson Santos Silva

**CÓDIGO** 08-300

# Articuladores

Articuladores em alumínio com utilização simplificada.

### Características:

- Sistema com ímãs ou travamento com pino;
- Movimentos suaves;
- Fácil de usar e de realiza a limpeza.

### Aplicações:

- Reproduzir os movimentos maxilomandibulares.



CÓDIGOS	08-050	08-051
NOMES	Articulador ARTPRO AT20	Articulador ARTPRO AT60

# Soldur

Soldas especiais para ligas metálicas, com excelentes propriedades de soldagem.

### Características:

- Excelentes propriedades para soldagem de ligas a base de CoCr;
- Excelentes propriedades para soldagem de ligas a base de NiCr.

### Aplicações:

- Para toda técnica de soldagem.



Composição Química Soldur N:					Composição Química Soldur C:			
Co	Cr	Mo	Ni	Si	Co	Cr	Mo	Si
31	22	6,5	39	1,5	62	29	5,0	4,0

CÓDIGOS	15094	15092
NOMES	Soldur C	Soldur N
EMBALAGENS	8 varetas de 0,5g cada. Total 4g.	4 varetas de 1,5g cada. Total 6g.



## Snow Rock Premium

Gesso especial tipo IV indicado para o dia a dia de todo laboratório ou clínica.

### Características:

- Alta tixotropia;
- Resinoso;
- Grande estabilidade marginal;
- Baixíssima expansão, sem alteração dimensional;
- Resistência compressiva ideal;
- Pode ser usado em CAD/CAM;
- Bio+ Propriedade antibacteriana patenteada nos EUA;
- Resistência Compressiva | 100MPa Expansão | 0,08%.
- Evita a transmissão de germes/bactérias para o modelo. O agente antibacteriano do gesso auxilia na fase inicial da cicatrização do implante, pois, mata 99,9% de todos os germes/bactérias.



CÓDIGOS	11-711	11-712	11-721	11-722
EMBALAGENS	1,5kg	25kg	1,5kg	25kg
CORES	Marfim	Marfim	Branco	Branco

## Snow Rock Stone

Gesso tipo IV com excelente custo/benefício. Qualidade excepcional aliada a um baixo custo.

### Características:

- Alta dureza;
- Modelos lisos e precisos;
- Detalhes reproduzidos com exatidão;
- Cores vivas;
- Baixo custo.
- Resistência Compressiva | 92MPa. | Expansão | 0,09%.



CÓDIGOS	11-811	11-812	11-851	11-852	11-861	11-862
EMBALAGENS	1,5kg	25kg	1,5kg	25kg	1,5kg	25kg
CORES	Marfim	Marfim	Rosa	Rosa	Verde	Verde



## Megavest PRESS

Revestimento universal fosfatado com granulação extremamente fina, para técnica de cerâmica prensada e prótese fixa. O MegaVest possui uma precisão única. Produto com qualidade excepcional Made in Germany. Após a mistura, adquire uma consistência altamente cremosa, garantindo resultados excelentes nas fundições. Produto Universal para a técnica de cerâmica prensada e também prótese fixa. Pode ser utilizado com a técnica de aquecimento rápido ou convencional.

### Características:

- Granulação extremamente fina;
- Após a mistura adquire consistência cremosa, resultando em fundições excelentes;
- Altíssimo controle de qualidade;
- Resultados confiáveis;
- Sachês com a proporção de água/líquido no verso, para diversos tipos de trabalho, ideal para minimizar erros no laboratório.



### Aplicações:

- Cerâmica prensada;
- Fundição convencional.



CÓDIGOS	11-045	11-100	11-001
PRODUTOS	MegaVest PRESS 4,5kg	MegaVest PRESS 10 kg	Mega-Liq 1L
VOLUMES	1L	2L	1L
SACHES	45x sachês de 100g	100x sachês de 100g	-





## Kera N

Liga de Níquel Cromo Premium (Ni-Cr) tipo 3, livre de berílio.

### Características:

- Biocompatível e excelente aderência a cerâmica;
- Metal extremamente macio para trabalhar, devido a dureza vickers de 185;
- Resfriamento curto;
- Níveis de escurecimento e oxidação extremamente reduzidos.

### Aplicações:

- Técnica de metalocerâmica.

### Propriedades Mecânicas:

0,2% Elasticidade limite (MPa)	340
Flexibilidade Ductil (%)	26,5
Elasticidade (GPa)	125
Resistência Elástica (Mpa)	550
Peso específico (g/cm <sup>3</sup> )	8,43
Temperatura de fundição (°C)	1450
Coefficiente de Expansão Térmica (CET) entre 25-500°C	14,1
Dureza Vickers (HV 10/30)	185
Dimensões (mm)	ø8x15
Tipo (ISO 22674)	≥ Tipo 3

### Composição Química

Ni	Cr	Mo	Si	Outros
61,4	25,9	11	1,5	<0,1



CÓDIGOS	10-103	10-102	10-101
EMBALAGENS	60g	250g	1000g

Imagens por TPD.  
Leonardo Faro.



# Mega-Ox | Óxido de Alumínio

Os óxidos de alumínio e esferas de vidro OdontoMega são importados da Alemanha. No processo de produção, são implementados os mais rígidos padrões de qualidade da União Europeia. Deste modo, o produto final é um óxido de qualidade excepcional, livre de impurezas, garantindo a saúde de quem o utiliza e preservando o equipamento de jatear.

### Características:

- Hermeticamente fechado em galões ou baldes de acrílico, que preservam a alta qualidade do produto e o mantém livre de umidade;
- A sua matéria-prima é um dos materiais mais duros existentes, o óxido de alumínio (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>);
- Grande diversidade de granulações, desde o mais fino até o mais grosso, para diferentes aplicações;
- Extremamente puro 99.7% de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> e livre de contaminantes, não causando doenças;
- Eleva a vida útil do bico do jato;
- Excelente custo/benefício.

### Aplicações:

- Jateamento de superfícies para limpeza;
- Desgaste;
- Abertura de anel de revestimento.



CÓDIGOS	14-210	14-212	14-240	14-242	14-250	14-252	14-260
MICRAS	50µ (270 Mesh)	50µ (270 Mesh)	110µ (150 Mesh)	110µ (150 Mesh)	125µ (115 Mesh)	125µ (115 Mesh)	250µ (60 Mesh)
EMBALAGENS	5kg	25kg	5kg	25kg	5kg	25kg	5kg

# Megablast | Esfera de vidro

### Características:

- Para polimento de superfícies delicadas, como porcelanas, metais preciosos e não preciosos;
- Hermeticamente fechado em galões ou baldes de acrílico, que preservam a alta qualidade do produto e o mantém livre de umidade;
- Excelente custo/benefício;
- Livre de impurezas;
- Esfera de 50µ é utilizado principalmente para jatear dissilicato de lítio.

### Aplicações:

- Jateamento de superfícies para limpeza;
- Alisamento e polimento de superfícies.



CÓDIGOS	14-110	14-112	14-150
MICRAS	50µ (270 Mesh)	50µ (270 Mesh)	125µ (115 Mesh)
EMBALAGENS	5kg	25kg	5kg

## Skyline Kolinsky


Pincéis feitos com pelos naturais de Marta vermelha tipo Kolinsky. Originário das regiões frias da Rússia, o pelo de marta utilizado na linha Skyline é especialmente comprido e resistente, oferecendo a elasticidade e durabilidade necessária para o ceramista. A linha SkyLine é o que existe de melhor em pincéis Kolinsky. Com cabo de acrílico e esferas para ajudar na formação da ponta e um modelo N°8 robusto, confie no sistema SkyLine para seu dia a dia como ceramista.

### Características:

- Pelo de Marta Kolinsky da melhor qualidade;
- Ponta do pincel fina e com flexibilidade ideal;
- Pelos com grande capacidade de absorção de líquidos e incrível resistência;
- 4 tamanhos para uso individual;
- Modelo N°8 robusto, com mais pelos que os demais modelos no mercado.

### Aplicações:

- Estratificação e caracterização.



<b>CÓDIGOS</b>	15-102	15-104	15-106	15-108
<b>TAMANHOS</b>	N° 2	N° 4	N° 6	N° 8



## Blueline Kolinsky


Pincéis de pelos Kolinsky feitos a mão pelo melhor fabricante de pincéis na Alemanha. A qualidade e durabilidade dos pelos utilizados são os fatores principais em pincéis para ceramistas. A linha BlueLine Kolinsky oferece para o técnico o que existe de melhor em qualidade e custo/benefício. Além do design, e da leveza do cabo, os tamanhos 4, 6 e BigBrush contam com esferas que ajudam na formação da ponta do pincel.

### Características:

- Alta qualidade de pelos Kolinsky;
- Esferas que auxiliam na formação da ponta do pincel;
- Alta durabilidade e elasticidade;
- Excelente custo/benefício.

### Aplicações:

- Estratificação e caracterização.



<b>CÓDIGOS</b>	15-320	15-330	15-332	15-300	15-302	15-304	15-306	15-388
<b>TAMANHOS</b>	Opaco	N° 3/0	N° 00	N° 0	N° 2	N° 4	N° 6	BigBrush



# AllBlack


Os pincéis AllBlack possuem pelos de poliamida selecionada Toray e coloração preta. A coloração garante ao pincel um contraste com a cerâmica trabalhada, facilitando a manipulação e aplicação. Além disso, os pelos sintéticos possuem uma durabilidade estendida, que supera a dos demais pincéis.

## Características:

- Elasticidade ideal para suportar qualquer quantidade de cerâmica;
- Longo comprimento de pelo para dentro do pincel, o que aumenta a resistência e elasticidade;
- Pelos de poliamida selecionada Toray com incrível durabilidade;
- Pelos pretos que contrastam com a cerâmica;
- Esferas para auxiliar na formação da ponta;
- Design atrativo e com cabo ergonômico.

## Aplicações:

- Estratificação e caracterização.



CÓDIGOS	15-220	15-222	15-200	15-202	15-204	15-206	15-208
TAMANHOS	Nº 3/0	Nº 00	Nº 0	Nº 2	Nº 4	Nº 6	Nº 8



# AllWhite


A linha AllWhite apresenta para o usuário um pincel de baixíssimo custo e com incrível durabilidade e qualidade. Feitos na Alemanha, os pincéis AllWhite são perfeitos para quem busca a melhor qualidade em pelos sintéticos tipo Toray. Os modelos 4 e 6 possuem esferas que auxiliam na formação da ponta.

## Características:

- Pelo tipo Toray com incrível durabilidade;
- Pelo alaranjado diferenciado;
- Excelente design;
- É usado uma mistura perfeita de pelos com 3 diâmetros diferentes para oferecer uma grande densidade ao pincel;
- Esferas que auxiliam na formação da ponta.

## Aplicações:

- Estratificação e caracterização;
- Resina composta.



CÓDIGOS	15-420	15-400	15-401	15-402	15-404	15-406
TAMANHOS	Opaco	Nº 0	Nº 1	Nº 2	Nº 4	Nº 6





# Keramik


Pincel com tipo de pelo diferenciado, unindo as vantagens do pelo sintético e pelo natural. O pelo é muito comprido para dentro do pincel, o que garante a durabilidade e elasticidade ideal.

## Características:

- Uma ponta sempre perfeita, devido a elasticidade do pelo sintético;
- Grande absorção de água mantendo a umidade, uma característica de pelos naturais;
- Elasticidade suficiente para conseguir pegar grande quantidade de cerâmica;
- Pelos com pontas extremamente finas para formar e definir melhor a ponta do pincel;
- A ponta pode ser modelada como espátula, voltando facilmente ao formato de ponta inicial.

## Aplicações:

- Estratificação e caracterização.



CÓDIGOS	15-830	15-832	15-802	15-804	15-806	15-808
TAMANHOS	Nº 3/0	Nº 00	Nº 2	Nº 4	Nº 6	Nº 8



# Maestro Kolinsky

Maestro Kolinsky. A evolução.


Para o mestre ceramista. Mix e formato ideal de pelos naturais 100% Kolinsky. Máximo compromisso com a qualidade, utilização dos pelos naturais mais raros encontrados na natureza. Com a linha Maestro o técnico expressa toda a criatividade que apenas a ponta do pincel consegue alcançar.

## Características:

- Pelos Kolinsky com máxima capacidade de absorção de água;
- Design e formato de ponta desenvolvido por técnicos renomados;
- Elasticidade dos pelos controlada para otimizar a manipulação de porcelana;
- Made in Germany.

## Aplicações:

- Estratificação e caracterização.



CÓDIGOS	15-902	15-904	15-906	15-908 by Pablio Caetano
TAMANHOS	Nº 2	Nº 4	Nº 6	Nº 8



# Espin - Esponja para pincéis

## Características:

- Esponja para pincéis prensada, Made in Germany;
- Fabricada em celulose regenerada, não agride os pelos dos pincéis;
- Alta durabilidade;
- Preserva e mantém a flexibilidade dos pelos naturais.

## Aplicações:

- Limpeza de pincéis.



**CÓDIGO** 08-015

Dica: Para conservar os pelos de seus pincéis, é recomendado uma limpeza regular com sabão neutro ou de coco. Este tipo de sabão deixa os pelos naturais e sintéticos mais elásticos e macios. Lave a ponta do pincel cuidadosamente com água morna e aplique o sabão, forme a ponta do pincel e guarde. Uma gota do líquido Easyform ajuda a manter a qualidade do pelo do pincel. Nunca use detergente, pois, esse tipo de sabão resseca os pelos dos pincéis.

# Mega Lux

Solução para captura da cor real com aparelhos de celular. Mega Lux proporciona uma luz similar a luz natural do dia (temperatura de 5.500K / Renderização de cor index 90 RA+) utilizando LED para uma tomada de cor mais real. Mega Lux foi projetado para ser acoplado a todos smartphones atuais (entre 55mm e 89mm de largura) para fotos melhores e mais naturais (talvez seja necessário remover capas protetoras do seu celular). Iluminação no estilo 2 em 1, pode ser utilizado tanto em modo Circular quanto em Twin.

- **Circular:** Otimizado para tomada de cores. • **Twin:** Otimizado para fotos odontológicas.

No modo Circular, pode ser usado com um polarizador (incluso), ideal para fotos de dentes anteriores, minimizando os reflexos. O polarizador proporciona a cor real do dente (imagem abaixo).

## Características:

- Proporciona uma luz similar a luz natural do dia;
- Temperatura de 5.500K / Renderização de cor index 90 RA+;
- Iluminação no estilo 2 em 1, modo Circular e Twin;
- Polarizador incluso para uso em Modo Circular;
- Pode ser acoplado a todos smartphones atuais (entre 55mm e 89mm de largura).

## Aplicações:

- Solução para captura da cor real com aparelhos de celular.



**CÓDIGO** 09-016



## Motor S1 - Micromotor Elétrico

Motor de bancada S1. Excelente custo em micromotor.

- Controle de rotação direita e esquerda;
- Pedal ON / OFF;
- Suporte para caneta;
- Alta durabilidade de rolamentos;
- Caneta a carvão com reposição inclusa;
- Caneta com protetor de rolamento.

<b>CÓDIGO</b>	09-598
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt
<b>RPM</b>	35.000
<b>TORQUE MÁX</b>	2,8N.cm



\*Disponível também na versão E-type.

<b>CÓDIGO</b>	09-599
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt
<b>RPM</b>	35.000
<b>TORQUE MÁX</b>	2,8N.cm



## Motor S2 - Micromotor Elétrico de Indução


Motor de indução com preço super econômico.

- Display digital de velocidade;
- Controle a velocidade no pedal ou comando;
- Controle de rotação direita e esquerda;
- Rolamentos com durabilidade elevada e baixa emissão de ruído e vibração;
- Caneta por indução;
- Caneta com protetor de rolamento.

Veja o vídeo



<b>CÓDIGO</b>	09-591
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt
<b>RPM</b>	50.000
<b>TORQUE MÁX</b>	4,8N.cm

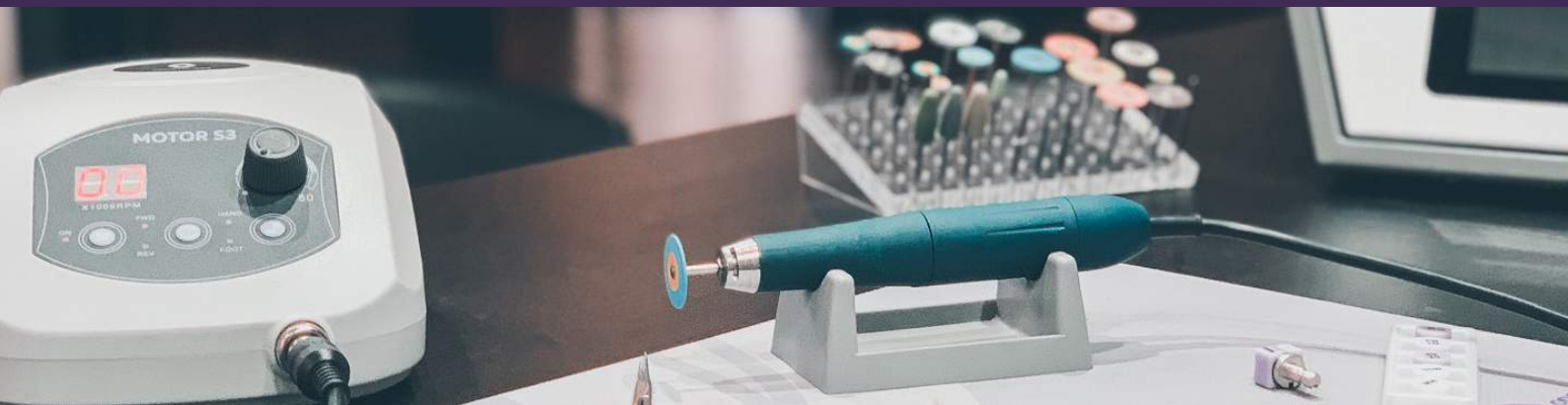

## Motor S3 - Micromotor Elétrico de Indução

Potência e força que seu laboratório precisa no motor de indução mais forte do mercado.

- Display digital de velocidade;
- Caneta leve e ergonômica;
- Controle de rotação direita e esquerda;
- Pedal de velocidade;
- Caneta por indução, sem vibração e ruídos;
- Caneta com protetor de rolamento.

<b>CÓDIGO</b>	09-596
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt
<b>RPM</b>	50.000
<b>TORQUE MÁX</b>	8N.cm

**Maior torque do mercado com 8N.cm.**



## Prime E-type

Motor portátil com bateria de alta duração.

- Motor ideal para pequenos ajustes e correções;
- Transportado com facilidade;
- Bateria com longa durabilidade (até 25 horas);
- Rápido tempo de recarga (2h30);
- Encaixe o contra-ângulo com a caneta de sua preferência;
- Caneta ultra leve com apenas 64g.

<b>CÓDIGO</b>	09-528
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt
<b>RPM</b>	30.000
<b>TORQUE MÁX</b>	2N.cm



# Wax Pencil I

Gotejador Wax Pencil I, ideal para todo profissional, estudante e dentista.

**Características:**

- Gotejador com 1 caneta, possibilita agilidade no trabalho de enceramento;
- Temperatura constante, com ajuste entre 50 – 200°C;
- Aumento da temperatura de 1 em 1 grau ou de 10 em 10 graus;
- Temperatura é armazenada ao religar o equipamento;
- Acompanha duas pontas: #1 e #3;
- Possui gaveta para armazenar pontas;
- A reposição das ponteiros é extremamente econômica.



**Aplicações:**

- Enceramento e escultura.



<b>CÓDIGOS</b>	09-311	09-312
<b>PONTEIRAS</b>	#1	#3
<b>VOLTAGENS</b>	110V	220V



# Wax Pencil II

Gotejador Wax Pencil II é um equipamento para enceramento progressivo e escultura. Garante resultados confiáveis e temperaturas precisas mesmo com anos de trabalho.

**Características:**

- Controle individual da temperatura em cada caneta;
- Não altera as propriedades físicas da cera, devido ao alto grau de precisão da temperatura programada;
- Ajuste da temperatura de 1 em 1 grau ou de 10 em 10 graus;
- Aquecimento uniforme (apenas da ponta da caneta), sem oscilação da temperatura;
- 6 formatos de pontas inclusas, com alta durabilidade;
- Formação de "gota" na ponta da caneta, facilitando o enceramento;
- Reposição das ponteiros extremamente econômica.



**Aplicações:**

- Enceramento e escultura.

Veja o vídeo



<b>CÓDIGO</b>	09-301					
<b>PONTEIRAS</b>	#1	#2	#3	#4	#5	#6
<b>VOLTAGENS</b>	Bivolt					

## Unimega

Imersor de cera para agilizar o trabalho de enceramento, perfeito para a confecção de copings através da técnica de imersão.

### Características:

- Derrete rapidamente a cera, mantendo na temperatura ideal;
- Salva a temperatura utilizada por último;
- Temperatura é exibida em um visor LED;
- Aumento da temperatura de 1 em 1 grau ou de 10 em 10 graus.

### Aplicações:

- Enceramento e escultura.

**Dica:** Recomendamos o uso da Cera Dip ArtWax Amarela.



<b>CÓDIGO</b>	09-303
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt

## Multimega

Imersor de cera com 3 reservatórios, para agilizar o tempo de enceramento.

### Características:

- Temperaturas individualizadas em cada reservatório;
- Aumento da temperatura de 1 em 1 grau ou de 10 em 10 graus;
- Não queima as propriedades da cera, temperatura altamente precisa;
- Trabalha com até 3 ceras diferentes;
- Enceramento até 50% mais rápido em uso conjunto com o Gotejador Wax Pencil II.

### Aplicações:

- Enceramento e escultura.



<b>CÓDIGO</b>	09-304
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt

## Megaflame

Descarte o bico de bunsen. Mais segurança ao trabalhar, sem o uso de gás ou álcool.

### Características:

- Esquenta o instrumental instantaneamente;
- Luz vermelha/verde indica o aquecimento;
- Ajuste de intensidade;
- Capa de silicone protetora (acompanha 1 extra).

### Aplicações:

- Aquecedor de instrumentais por indução.

Veja o vídeo



<b>CÓDIGOS</b>	09-321	09-322
<b>VOLTAGENS</b>	110V	220V

# Vibrador de Gesso Power

Qualidade e excelente custo/benefício. Modelos de gesso livres de bolhas e materiais escoados mais facilmente.

## Características:

- Grande área de vibração para acomodar diversas peças de trabalho;
- Vibra somente o material sem espalhar a vibração para a bancada;
- Dois tipos de onda de vibração, curta ou longa;
- Ajuste de intensidade de vibração;
- Capa de borracha removível para limpeza.

## Aplicações:

- Produção de modelos de gesso e escoamento de revestimento.



## Veja o vídeo



<b>CÓDIGOS</b>	09-211	09-212
<b>VOLTAGENS</b>	110V	220V
<b>MEDIDAS (cm)</b>	27x21x10	27x21x10

# Aspirador Ciclone

Aspirador super potente com baixíssimo custo. Alta capacidade de armazenamento de resíduos, baixa geração de ruídos e alto poder de sucção.

## Características:

- Alta sucção de 3.0m<sup>3</sup>/Min.;
- Alta capacidade de armazenagem de resíduos 6L (Úmido) e 10L (Seco);
- Potência do motor de 1150W (na velocidade máxima);
- Ajuste a velocidade da sucção;
- Motor com aproximadamente 1000 horas de uso;
- Rodinhas para facilitar o manuseio;
- Entrada para ligar outros equipamentos no automático.

## Aplicações:

- Aspiração para bancadas e equipamentos.

## Diferencial:

- Devido a sua construção, o equipamento não precisa utilizar saco coletor de resíduos. Os detritos aspirados são depositados no fundo do aspirador, assim gerando uma economia em sacos de poeira.



## Veja o vídeo



<b>CÓDIGOS</b>	09-731	09-732
<b>VOLTAGENS</b>	110V	220V
<b>MEDIDAS (cm)</b>	35 x 35 (base) x 57 (altura)	



## Forno Focus

Fabricado pela Shenpaz, o forno de cerâmica Focus é compacto em seu tamanho e possui grande performance. É um forno que trará resultados excelentes e precisos durante muitos anos de trabalho.

### Características:

- Totalmente programável – 200 programas (+ modo noturno);
- Calibragem de vácuo precisa – Esse recurso mantém uma translucidez precisa e a vitalidade do elemento, elimina brilho em excesso ou a opacidade dos elementos;
- 4 patamares de resfriamento programáveis de acordo com o tipo de cerâmica;
- Elimina qualquer risco de choque térmico;
- Estabilidade de temperatura, com 1 grau de variação máxima;
- Recuperação elétrica - em caso de falta de energia o forno recupera o ciclo que estava.

### Aplicações:

- Forno para queima de cerâmicas.

<b>CÓDIGOS</b>	09-912
<b>VOLTAGENS</b>	220V
<b>MEDIDAS (cm)</b>	23 x 57 x 24

Veja os vídeos



## Bomba de Vácuo 60RVD

Bomba de vácuo importada com incrível potência e baixíssimo ruído. Indicada para todos os fornos de porcelana.

### Característica:

- 250W de potência;
- 63L/min de sucção;
- 1650 RPM/60Hz;
- Vácuo máximo 745 mmHg;
- Design ergonômico;
- Super silenciosa, 51 dB de ruído máximo.

### Aplicações:

- Para forno de porcelana.



<b>CÓDIGOS</b>	09-901
<b>VOLTAGENS</b>	220V
<b>MEDIDAS (cm)</b>	24 x13,9 x11,8

## Solda PUK D5

Com esse equipamento de solda a plasma o técnico em prótese dentária consegue realizar todos os trabalhos de soldagem do laboratório com extrema agilidade.

### Características:

- Operação extremamente simples;
- Soldagem de pino de retenção;
- Solda de fixação, para posicionar o trabalho antes da solda definitiva;
- Incluso microscópio de aumento, com iluminação LED e protetor visual.

### Aplicações:

- Solda todos os tipos de metais de laboratório, níquel-cromo, cromo-cobalto, titânio, aço e todos os metais preciosos e semi precioso;
- Solda de Protocolo, de PPR e de Próteses Fixas.

Veja os vídeos



<b>CÓDIGOS</b>	09-812
<b>VOLTAGENS</b>	220V
<b>MEDIDAS (cm)</b>	17,7x21,4x29,1

MADE IN GERMANY

# Forno Blazir

Forno para sinterização de zircônia Blazir ideal para todo tipo de zircônia, de qualquer fabricante. Otimizado para os blocos ZirkOM Odontomega (programas já inclusos).

## Características:

- Forno com operação incrivelmente facilitada;
- Diversas possibilidades de escolha de rampas de temperatura, manutenção e resfriamento;
- Tela de 7 polegadas, touch screen que facilita a operação;
- Pode ser programado remotamente através do PC, Smartphone ou Tablet.

## Diferencial:

Sistema automático de Fluxo de Ar - Com esse sistema, a mufla do forno se mantém limpa durante a sinterização, mesmo com os corantes utilizados na sinterização de zircônia. Assim o ciclo ocorre livre de impurezas.

## Capacidade de sinterização:

Bandeja para até 30 elementos. Podem ser utilizadas até 4 bandejas ao mesmo tempo, fazendo com que até 120 elementos possam ser sinterizados por ciclo.

## Aplicações:

- Sinterização de zircônia.



Veja o vídeo



<b>CÓDIGO</b>	09-942
<b>VOLTAGEM</b>	220V
<b>MEDIDAS (cm)</b>	40 x 46 (base) x 51 (altura)

# DOF Scanner



Veja o vídeo



DOF Scanner modelo Edge. Digitalize-se.

## Características:

- Rápido;
- Performance;
- Completo.

## Acessórios incluídos:

- Base de escanear oclusão com articulador;
- Base para modelo de gesso;
- Base para 7 troquéis;
- 2 Bases lisas para moldagem;
- Base de calibração;
- 2 Bases para altura.

## Aplicações:

- Modelo de Gesso;
- Múltiplos Casos;
- Articulador;
- Troquéis;
- Planejamento Ortodôntico;
- Placa de Transferência;
- Placa para Scanner de Face;
- Moldagem;
- Abutments;
- Marcas a Lápis.



<b>CÓDIGO</b>	09-130
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt
<b>MEDIDAS (cm)</b>	40x40x27
<b>PESO</b>	18kg



Modelo de Gesso




Múltiplos Casos



Articulador



Troquéis

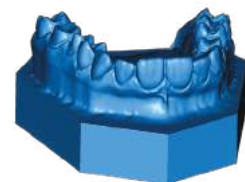

Planejamento Ortodôntico



Placa de Transferência



Placa para Scanner de Face



Moldagem



Abutments



Marcas a lápis

## Sonic Mini 4K

Com a impressora 3D Sonic Mini 4K você vai obter resolução de 35µm e 722 PPI, com uma grande área de impressão de 13 cm por 7,5 cm, produzindo modelos altamente detalhados, exatamente iguais ao seu desenho, independente do tamanho impresso.

Essa é realmente a impressora que vai revolucionar as áreas de impressão em laboratórios de prótese e clínicas odontológicas.

Utilizando a tecnologia de LCD monocromático, o LCD da Sonic Mini 4K funciona por mais de 2.000 horas de uso.

- Modelo de entrada, com construção econômica;
- Excelente confiabilidade e rapidez;
- Luz: 405nm. ParaLED Matrix 2.0;
- Velocidade de impressão: 80mm/h.
- Conexão: USB

<b>CÓDIGO</b>	09-187
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt
<b>MEDIDAS</b>	25x25x32cm
<b>PLATAFORMA</b>	13x7.5x13cm
<b>RESOLUÇÃO XY</b>	35 microns
<b>RESOLUÇÃO Z</b>	10 microns



## Sonic Mighty 4K

Com uma área de impressão estendida de 9,3" e um eixo Z de 22 cm, o Sonic Mighty 4K permite imprimir modelos em quantidades, modelos grandes de estudo, crânios e ossos mandibulares com total precisão 4K. Mas isso não é tudo. A impressora 3D Sonic Mighty 4K imprime modelos em qualidade 4K, oferece impressão de alta resolução a 52 µm e dá vida às suas criações com detalhes incríveis.

### Características:

- Resolução 4K: a 52 µm, o Sonic Mighty 4K imprime construções maiores com resolução extremamente alta.
- Tela LCD monocromática: imprime até quatro vezes mais rápido do que as impressoras 3D tradicionais, levando apenas dois segundos para imprimir uma camada. 2000 horas de trabalho garantidas para todas as telas LCD.
- Compatibilidade multiresina: funciona melhor com Aqua-Gray 4K da Phrozen, também compatível com resinas de terceiros.

<b>CÓDIGO</b>	09-188
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt
<b>MEDIDAS</b>	29x33x47cm
<b>PLATAFORMA</b>	19x12x20cm
<b>RESOLUÇÃO XY</b>	50 microns
<b>ESPESSURA DA CAMADA</b>	0.01-0.30mm



## Sonic 4K

Projetado especialmente para a indústria odontológica, a Sonic 4K oferece parâmetros integrados para aplicações odontológicas que funcionam para imprimir todos os modelos odontológicos de que você precisa com alta precisão e exatidão.

Com uma resolução super elevada de 722 PPI, esta impressora imprime a 35 µm e oferece um amplo espaço de impressão de 6,1". Você também poderá imprimir uma camada em apenas um segundo, o que é duas vezes mais rápido que o Sonic Mini 4K.

### Características:

- Tela LCD monocromática: imprime até 5 vezes mais rápido do que as impressoras 3D tradicionais;
- Design sólido: feito com alumínio e projetado para garantir um processo de impressão silencioso e suave;
- Suporta Transmissões Remotas de Arquivos: Você pode enviar o seu arquivo remotamente e começar a imprimir imediatamente;

<b>CÓDIGO</b>	09-158
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt
<b>MEDIDAS</b>	23x26x46cm
<b>PLATAFORMA</b>	13x7,5x20cm
<b>RESOLUÇÃO XY</b>	35 microns
<b>ESPESSURA DA CAMADA</b>	0.01-0.30mm



## Sonic 4K XL

Especialmente fabricado para a indústria odontológica, a Sonic XL 4K da Phrozen oferece uma área de impressão bem grande de 8,9", 45% maior do que a Sonic 4K, permitindo que você crie modelos dentais com a precisão que você precisa. Com velocidades de impressão de até 200 mm por hora, a Sonic XL 4K também oferece maior produtividade, permitindo a impressão de vários modelos de uma vez.

### Características:

- Tecnologia LCD monocromática: projetada para curar em até 0,2 segundos.
- Alta durabilidade com LCD com 2000 horas de uso constante.
- Resolução 4K: imprime cada pequeno detalhe com facilidade.
- Impressão sem fio.
- Compatibilidade multiresina: ela funciona melhor com resinas Phrozen, também compatível com resinas de terceiros.
- Adequado para profissionais e amadores.

<b>CÓDIGO</b>	09-138
<b>VOLTAGEM</b>	Bivolt
<b>MEDIDAS</b>	29x33x47cm
<b>PLATAFORMA</b>	19x12x20cm
<b>RESOLUÇÃO XY</b>	50 microns
<b>ESPESSURA DA CAMADA</b>	0.01-0.30mm



# printaX

Impressão 3D

## Resinas de modelo



**Resina 3D para modelos dentais com alto poder de detalhamento.**

By Oseias e Isaak Coimbra

- Excelente nível de detalhamento para impressões de 50 a 100 microns;
- Cores diferentes com contraste otimizado para as restaurações;
- Possui alta resistência ao calor para produção de alinhadores ortodônticos;
- Resina TR250LV (Low Viscosity) de baixa viscosidade, fácil limpeza, rápido tempo de impressão;
- Resinas Rapid WW (Water Washable) são laváveis em água, ou seja, não necessitam de limpeza com o álcool isopropílico, o que reduz o cheiro de álcool na sala e também os gastos com esse item.

Baixe os manuais



Baixe os parâmetros das impressoras Phrozen



Resinas	Código	Frasco	Cor	Viscosidade	Densidade	Resistência	Elasticidade	Dureza Shore
TR250LV	21-253	1Kg	Grey	230cps	2.3 g/cm <sup>3</sup>	75 Mpa	950 Mpa	79 D
TR250LV	21-254	5Kg	Grey	230cps	2.3 g/cm <sup>3</sup>	75 Mpa	950 Mpa	79 D
Aqua	21-255	1Kg	Green	125cps	1.25 g/cm <sup>3</sup>	24 Mpa	588 Mpa	86 D
Aqua	21-256	1Kg	Blue	125cps	1.25 g/cm <sup>3</sup>	24 Mpa	588 Mpa	86 D
Aqua	21-257	1Kg	Grey 4K	125cps	1.25 g/cm <sup>3</sup>	24 Mpa	588 Mpa	86 D
Model	21-318	500g	Lilás	1180cps	11.8 g/cm <sup>3</sup>	92 Mpa	1875 Mpa	86 D
Model	21-401	1Kg	Skin	150cps	1.28g/cm <sup>3</sup>	75 mpa	350 mpa	85 D
Model	21-403	1Kg	Yellow	150cps	1.28g/cm <sup>3</sup>	75 mpa	350 mpa	85 D
Model	21-402	1Kg	Grey	150cps	1.28g/cm <sup>3</sup>	75 mpa	350 mpa	85 D
ABS	21-252	500g	White	77cps	0.77 g/cm <sup>3</sup>	95 Mpa	900 Mpa	79 D
WW Rapid	21-258	1Kg	Black	120cps	1.2 g/cm <sup>3</sup>	15 Mpa	111 Mpa	76 D
WW Rapid	21-259	1Kg	Grey	120cps	1.2 g/cm	15 Mpa	111 Mpa	76 D



TR250LV - 21-253



Model Lilás - 21-318



Aqua Green - 21-255



Aqua Blue - 21-256



Aqua Gray 4K - 21-257



Model Gray - 21-402



Skin - 21-401



Yellow - 21-403

### Laváveis em água



WW Rapid Gray - 21-259



WW Rapid Black - 21-258

# Resinas Calcináveis

- Resina 3D para prensagem ou injeção de cerâmicas;
- Resina 3D para fundição de coroas, fixas, estruturas e PPR;
- Utilizar aquecimento lento no forno de anéis;
- Impressão de aproximadamente 500 coroas;
- Excelente nível de detalhamento;
- Resolução de 50 microns.




Resinas	Código	Frasco	Cor	Viscosidade	Densidade	Resistência	Elasticidade	Dureza Shore
<b>Press &amp; Cast</b>	21-216	500g	Azul	200cps	1.1 g/cm <sup>3</sup>	65 Mpa	850 Mpa	75 D
<b>Press &amp; Cast</b>	21-406	500g	Verde	170 cps	1.25g/cm <sup>3</sup>	45 mpa	750mpa	85-88D



# Resinas de Provisórios

- Resina 3D para impressão de restaurações provisórias e temporárias;
- Pode ser maquiada e caracterizada com os stains apropriados;
- Alta dureza de superfície, biocompatível e baixa compressão;
- Ideal para impressoras LCD e DLP;
- Impressão de aproximadamente 500 coroas;
- Excelente nível de detalhamento;
- Resolução de 50 a 100 microns.

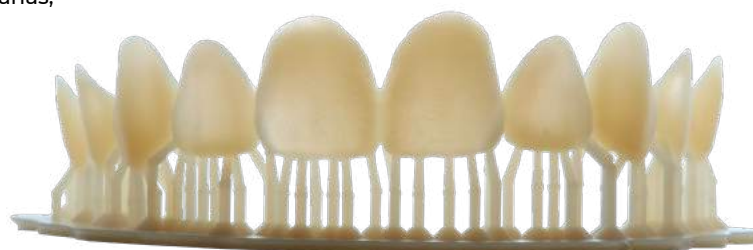

Resinas	Código	Frasco	Cor	Viscosidade	Densidade	Resistência	Elasticidade	Dureza Shore
<b>AA Temp</b>	21-312	500g	A1	498cps	1,11 g/cm	82,35 Mpa	1500 Mpa	84.65 D
	21-313		A2					
	21-314		A3					
	21-310		BL					



## BB Base

- Resina 3D para impressão de bases de Prótese Total;
- Biocompatível com alta resistência e baixa compressão;
- Impressão de aproximadamente 50 bases;
- Excelente nível de detalhamento;
- Resolução de 50 a 100 microns;
- Absorção de água: 26.5µg/mm<sup>3</sup>;
- Solubilidade: <1 µg/mm<sup>3</sup>;
- Monômero residual MMA: 0%.



## CC Tray

- Resina 3D para impressão de moldeiras individuais biocompatíveis;
- Alta resistência de superfície e baixa contração;
- Impressão de aproximadamente 50 moldeiras;
- Excelente nível de detalhamento;
- Resolução de 50 a 100 microns.



## DD Guide


- Resina 3D para impressão de guias cirúrgicas;
- Alta resistência de superfície;
- Impressão de aproximadamente 50 guias;
- Excelente nível de detalhamento;
- Resolução de 50 a 100 microns.



Resinas	Código	Frasco	Cor	Viscosidade	Densidade	Resistência	Elasticidade	Dureza Shore
BB Base	21-315	500g	Rosa Claro	1180	1,17 g/cm	85.2 Mpa	2049 Mpa	87.25 D
	21-316		Rosa Escuro					
CC Tray	21-317	500g	Azul	740	1,16 g/cm	95 Mpa	2397 Mpa	78 D
DD Guide	21-311	500g	Transparente	720	1,12 g/cm	90 Mpa	1907 Mpa	80 D

## Flex

- Resina altamente transparente. Não é facilmente amarelada na pós-cura.
- Recomenda-se usar luz de cura UV de baixa potência para fazer a pós-cura.

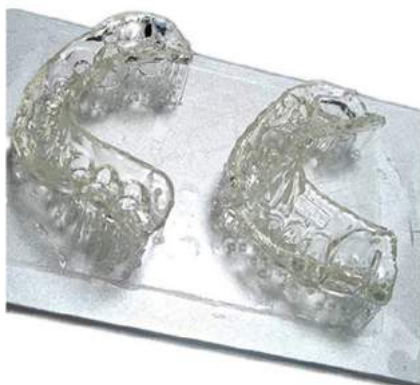

## Gengimask

- A resina Gengimask é ideal para produção de gengivas;
- Ela possui um excelente nível de detalhamento;
- Baixa viscosidade.



Resinas	Código	Frasco	Cor	Viscosidade	Densidade	Resistência	Elasticidade	Dureza Shore
Flex	21-407	500g	Transparente	450 cps	1.25g/cm <sup>3</sup>	50 mpa	900mpa	82D
Gengimask	21-405	500g	Rosa	450 cps	1.25g/cm <sup>3</sup>	60mpa	850 mpa	60D

# Tornado

Torne a sua operação de impressão 3D muito mais simples com esse sistema de limpeza com 2 tanques. O sistema de vórtice agita o agente de limpeza com grande força, limpando a bandeja de impressão e também as peças impressas.

## Vantagens:

- Limpeza completa e total da plataforma e da peça;
- Escolha de tempo de limpeza e de qual tanque irá ser usado;
- Possibilidade de utilizar limpeza “suja” e “limpa”, gerando economia de agente de limpeza;
- O agente de limpeza (álcool isopropílico ou outro) pode ser usado por muito mais tempo;
- Encaixe universal para diversos tipos de material;
- Modo de operação altamente facilitado.



CÓDIGO	09-112
MEDIDAS	24 x 24 x 33cm
VOLTAGEM	Bivolt
QUANTIDADE DE TANQUES	2
TECNOLOGIA	Vórtice de limpeza

Veja o vídeo



# Phrozen Cure V2

- Três ondas de cura com 365nm, 385nm, 405nm para finalizar a cura das camadas internas, médias e externas por completo;
- Também realiza fotopolimerização de resinas compostas;
- Bandeja que gira 360°, eliminando pontos cegos;
- 60W de potência;
- Capacidade interna de 17.5 x 14 x 18.5 cm.

CÓDIGO	09-118
MEDIDAS	21.8 x 19.5 x 28.5 cm
PESO	4.2Kg
CAPACIDADE INTERNA	17.5 x 14 x 18.5 cm
LED	365, 385 e 405nm. 60W no total
VOLTAGEM	100-240V, 50~60Hz

Veja o vídeo



## Phrozen Cure Luna

Conheça nosso maior forno de cura: Phrozen Cure Luna. Como a maior lâmpada de cura UV comercial do mercado, Phrozen Cure Luna é extremamente acessível e trabalha com rapidez para fazer a cura de todos os seus modelos em grande escala.

### Vantagens:

- Grande quantidade de espaço para curar modelos maiores;
- Sem pontos cegos: com uma plataforma giratória de 360°, todas as partes do seu modelo curarão sem dificuldade;
- Fácil de usar: basta colocar seus modelos na unidade, definir o tempo, apertar o botão Iniciar e pronto;
- Chega de curas irregulares: Cure Luna garante a cura de TODOS os seus modelos de maneira uniforme e adequada.

### Especificações:

- Tamanho do produto: 28 x 28 x 40 cm;
- Peso da máquina: 5Kg;
- Capacidade interna: 22 x 22 x 27 cm;
- Intensidade de luz UV: 405 nm;
- Voltagem: 100-240 V, 50-60 Hz.



CÓDIGO	09-114
MEDIDAS	28 x 28 x 40 cm
PESO	5Kg
CAPACIDADE INTERNA	22 x 22 x 27 cm
INTENSIDADE DA LUZ UV	405nm
VOLTAGEM	100-240V, 50~60Hz

## Phrozen Cure XL

- Alta capacidade interna para grandes volumes de impressão, com 29.5 x 29.5 x 45 cm;
- Três ondas de cura com 365nm, 385nm, 405nm para realizar a finalização das camadas internas, médias e externas;
- Devido as diferentes faixas de onda, o Phrozen cure XL também realiza a fotopolimerização de resinas compostas;
- Bandeja que gira 360°, eliminando pontos cegos;
- 150w de potência.



CÓDIGO	09-119
MEDIDAS	33 x 33 x 60 cm
PESO	11Kg
CAPACIDADE INTERNA	29.5 x 29.5 x 45 cm
LED	365, 385 e 405nm. 150W no total
VOLTAGEM	100-240V, 50~60Hz



HASS – Human Aid System Supplier é uma empresa da Coreia do Sul, especialista em pesquisa e desenvolvimento de produtos odontológicos cerâmicos, com foco especialmente em dissilicato de lítio. País com tradição em tecnologia, sede de algumas das maiores fabricantes do mundo de computadores, carros, celulares, robôs e chips de processamento, a Coreia do Sul está sempre à frente em relação a inovação.

Com as linhas de dissilicato de lítio Rosetta e Amber, a HASS conseguiu ganhar o mundo. Hoje os produtos são utilizados em mais de 120 países, através de 91 distribuidores. No Brasil desde 2015, com exclusividade pela Odontomega após a aprovação da Anvisa, já são milhões de restaurações produzidas e entregues.

Sempre inovando, a linha Amber possui uma propriedade única. É o único bloco de dissilicato de lítio do mundo que pode ser cristalizado em diferentes temperaturas, escolhendo assim a translucidez desejada. Com pesquisa e desenvolvimento constantes, novos produtos para facilitar o trabalho de técnicos e dentistas serão sempre o foco da empresa. Aguarde em breve mais novidades importantes para a odontologia.

## Escala de cor Rosetta & Amber

Escala de cor para Rosetta CAD e PRESS e Amber CAD e PRESS. Escala completa com todas cores VITA e também dentes clareados - bleach (W1, W2, W3 e W4). Feita em material cerâmico com brilho e formato perfeito para tomada de cores. Cada cor pode ser removida e facilmente posicionada de maneira que fica simples a tomada de cor.

### Vantagens:

- Determinação da cor com precisão;
- Facilita a comunicação entre laboratório e consultório;
- Dentes em cerâmica;
- Ganhe tempo com maior rapidez na finalização dos trabalhos.



# Rosetta SP - PRESS

Pastilhas de cerâmica de dissilicato de lítio (LiSi<sub>2</sub>) para prensagem. As pastilhas Rosetta SP são ideais para diversos tipos de restaurações. Com uma força biaxial de 460MPa, o dissilicato de lítio (LiSi<sub>2</sub>) atinge uma resistência compressiva superior. Além disso, o dissilicato de lítio (LiSi<sub>2</sub>) proporciona uma qualidade estética diferenciada, devido à formação cristalina de sua matéria prima. A translucidez alcançada é otimizada. A opalescência e a difusão de luz trazem à tona a beleza única de dentes naturais. Ideal para obturações e restaurações metal-free ou em cerâmica pura.

**Diferencial:** As pastilhas Rosetta SP não acinzentam, mesmo na maior translucidez HT. Assim os produtos de média translucidez (MT) não são necessários na linha Rosetta.

## Vantagens Rosetta SP:

- A melhor opção de pastilha de dissilicato de lítio;
- Após a injeção, a camada de reação é mínima;
- Maior resistência compressiva, com 460MPa;
- Ideal para restaurações metal-free ou em cerâmica pura.

**Aplicações:** • Rosetta SP é um sistema aberto, indicado para diversas restaurações, entre elas:



TRANSLUCIDEZ	COR																		
<b>HT (Alta translucidez)</b>	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	W1	W2	W3	W4									
<b>LT (Baixa translucidez)</b>	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	W1	W2	W3	W4
<b>MO (Média opacidade)</b>	MO0	MO1	MO2	MO3	MO4														

## Tabela de Injeção

W: Cores "bleach"

Translucidez	Tamanho	Cor	Anel	Temperatura Inicial	Taxa de calor	Temperatura Final	Manutenção	Vácuo On	Vácuo Off
HT		A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	100g	700 °C	60 °C /min.	900 °C	20 min.	700 °C	900 °C
		W1, W2, W3, W4				910 °C			910 °C
		A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	200g	700 °C	60 °C /min.	910 °C	40 min.	700 °C	910 °C
		W1, W2, W3, W4				920 °C			920 °C
LT		A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4	100g	700 °C	60 °C /min.	890 °C	20 min.	700 °C	890 °C
		W1, W2, W3, W4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4				905 °C			905 °C
		A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4	200g	700 °C	60 °C /min.	900 °C	40 min.	700 °C	900 °C
		W1, W2, W3, W4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4				910 °C			910 °C
MO		MO0, MO1, MO2, MO3, MO4	100g	700 °C	60 °C /min.	915 °C	20 min.	700 °C	915 °C
		MO0, MO1, MO2, MO3, MO4	200g	700 °C	60 °C /min.	920 °C	40 min.	700 °C	920 °C

# Rosetta SM - CAD/CAM

Blocos de dissilicato de lítio (LiSi2) para fresagem em sistema CAD/CAM. O dissilicato de lítio (LiSi2) possui uma resistência compressiva superior após o processo de cristalização, superando 443MPa. As restaurações podem ser feitas de maneira eficiente e com uma estética ideal, ao se usar Rosetta SM em seu sistema CAD/CAM. Esse material proporciona translucidez e opalescência ideais, alcançando grande similaridade aos dentes naturais. Devido as suas características físicas, o tempo de processamento de Rosetta SM é até 20% menor que os demais produtos.

### Vantagens Rosetta SM:

- A melhor opção de blocos de dissilicato de lítio;
- Tempo de processamento até 20% menor;
- Maior resistência compressiva, com 443MPa.;
- Ideal para restaurações metal-free ou em cerâmica pura.

### Aplicações:

- Rosetta SM é um sistema aberto, indicado para diversas restaurações, entre elas:



TRANSLUCIDEZ	COR																		
<b>HT</b> (Alta translucidez)	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	W1	W2	W3	W4									
<b>LT</b> (Baixa translucidez)	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	W1	W2	W3	W4
<b>MO</b> (Média opacidade)	MO0	MO1	MO2	MO3	MO4														

W: Cores "bleach"

### HT Enamel / Incisal



Livre ou preparo mínimo

### LT Dentina



Preparo mínimo

### MO Dentina Opaca



Maior preparo

**Escolha dos blocos e pastilhas de acordo com o tipo de preparo**

Rosetta®	DIMENSÕES (mm)	EMBALAGEM
C12	10 x 12 x 15	5 Blocos
C14	12 x 14 x 18	5 Blocos
C32	14,5 x 14,5 x 32	3 Blocos
C40	15,2 x 15,2 x 38	3 Blocos

# Amber Mill

Blocos em dissilicato de lítio. Liberdade de translucidez. Com os blocos Amber Mill você escolhe a cor. A translucidez é atingida de acordo com a queima de cristalização. Efeitos opalescentes vivos. Fluorescência natural.

### Vantagens:

- Estrutura física densa, com alta resistência mecânica de 450 MPA após a cristalização;
- Blocos livres de translucidez, se torna HT, MT, LT ou MO de acordo com a temperatura;
- Fluorescência única em blocos de dissilicato de lítio;
- Alto efeito opalescente;
- Restaurações com alta estética até sem caracterização.



# Amber Mill Meso

O Amber Mill agora na versão com encaixe para TI Base L ou S.



**Cores disponíveis**

	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	W1	W2	W3	W4
HT																			
MT																			
LT																			
MO																			

## Tabela de Cristalização Recomendada

B °C	S min.	t °C/min.	T °C	H min.	VAC. 1°C/ VAC. 2°C	L °C	tL*
400	3.00	60	HT 815	15.00	HT 550/815	690	HT 21.50
			MT 825		MT 550/825		MT 22.05
			LT 840		LT 550/840		LT 22.20
			MO 860		MO 550/860		MO 22.40

\* A câmara de queima não deve ser aberta durante o resfriamento a longo prazo.

# MegaLink Auto

MegaLink Auto é especial para a cimentação de restaurações indiretas de dissilicato de lítio, cerâmicas feldspáticas, metal-cerâmicas, zircônias e resinas compostas. Auto Adesivo e Auto Condicionante, agiliza o tempo de trabalho e reduz etapas na cimentação. PA fluidez do MegaLink Auto foi pensada para facilitar o trabalho do clínico, escorrendo em velocidade otimizada e facilitando a remoção de excessos.

### Características:

- Não necessita de preparação ácida nem de adesivo;
- Reduz o tempo de trabalho;
- Proporciona alta adesividade da restauração, com incrível força de união mecânica;
- Pode ser polimerizado com fotopolimerizador e também é Dual, ou seja, autopolimerizável;
- Adesividade a todo tipo de substrato;
- Excelente radiopacidade;
- Resistência compressiva 249MPa.;
- Incrível estabilidade de cor.

CÓDIGOS	07-221	07-228	07-230
CORES	Transparente	A2 (Universal)	Opaco
EMBALAGENS	Seringa Dupla com 9,6g		

### Aplicações:

- Inlay/Onlay;
- Coroas;
- Fixas;
- Pinos endodônticos.



TEMPO DE TRABALHO	
Tempo de mistura e trabalho	Aprox. 1min.
Remoção de excessos (sem fotopolimerização)	0:30 - 1:00min.
Tempo de fotopolimerizador para facilitar a remoção	1 - 2s.
Tempo máximo para polimerização intraoral	7min.
Tempo para fotopolimerização	20s ou mais



# MegaLink Esthetic

### Características:

- Ideal para cimentação altamente estética;
- Remoção extremamente facilitada;
- Pastas Try-in com cores exatas ao cimento;
- Aplicação direta, Radiopaco;
- Ideal para ser utilizado com Adesivo Megabond.

### Fluxo de trabalho:

1. Determinar a cor com auxílio do Try-in;
2. Condicionar a restauração com ácido fluorídrico e silanizar;
3. Condicionar o preparo com ácido fosfórico (Megagel);
4. Aplicar o adesivo (Megabond);
5. Cimentar o laminado com 40s no fotopolimerizador (400mW/cm²).

### Aplicações:

- Cimentação de lentes e facetas de dissilicato de lítio, outras cerâmicas e resinas compostas.



CÓDIGOS	07-001	07-301	07-321	07-324	07-327	07-401	07-421	07-424	07-427
CORES	Kit completo	A1	Transparente	Bleach	White	A1	Transparente	Bleach	White
TIPOS	Cimento / Try-in / Adesivo / Silano / Ácido	Cimento	Cimento	Cimento	Cimento	Try-in	Try-in	Try-in	Try-in
EMBALAGENS	Seringas e Acessórios		Seringa com 3,8g						

AI: Cor Escala / Tr: Transparente / Bleach: Claro (Cor clara translúcida) / W: White (Cor clara mais opaca)





## Cimentação de lentes e laminados de dissilicato de lítio e cerâmicas feldspáticas com linha de cimentação Megalink


TR - Transparente	W-White	BL- Bleach	A1 - Cor A1
Função: Cimentação sem ter a necessidade de adequação de cor. O laminado já está na tonalidade ideal.	Função: Aumenta o valor, bloqueia o substrato. Ideal para pacientes que desejam dentes mais claros.	Função: Ajuste leve de valor, corrigindo pequenas manchas no substrato.	Função: Ajuste da cor do laminado em relação ao substrato.
Cimento Cód.: 07-321	Cimento Cód.: 07-327	Cimento Cód.: 07-324	Cimento Cód.: 07-301
Try-in Cód.: 07-421	Try-in Cód.: 07-427	Try-in Cód.: 07-424	Try-in Cód.: 07-401



Remover completamente o cimento temporário e qualquer resíduo. Limpar com pasta isenta de flúor e escovas EVE Unibrush.



Preencher o laminado com Megalink Try-in para verificar a tonalidade que você deseja. Colocar as lentes na posição desejada para simular o resultado final.

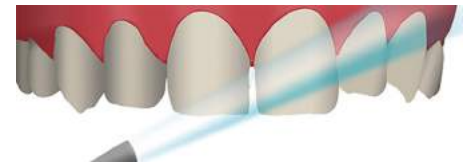

Limpar completamente os resíduos de try-in. Para remoção total do try-in, limpe com spray de água e secar com ar, livre de óleo. Limpar com ácido fosfórico por 15 segundos, enxaguar e secar.



Preparar para cimentação adesiva condicionando o laminado com ácido fluorídrico 5% por 20 segundos. Enxaguar e secar completamente. Aplicar Silano Primer Megabond (1:1), de acordo com as instruções do silano, e secar por 2 min. com ajuda de um secador.



Condicionar o preparo com ácido fosfórico 37% Megagel por 20 segundos. Limpar com spray de água e secar com ar, livre de óleo. Evitar contato com dentes que não serão restaurados e com gengiva exposta.



Aplicar uma camada uniforme de Adesivo Megabond no preparo. O adesivo pode ser polimerizado em conjunto com o cimento caso o aparelho foto tenha potência. Polimerizar o adesivo após a aplicação do mesmo caso tenha dúvidas sobre o aparelho.



Aplicar cimento Megalink Esthetic da cor escolhida no laminado.

Dica: Aplicar o cimento começando na área incisal indo para a área cervical.



Posicionar os laminados em cima do preparo. Com um pince pequeno, limpar os excessos. Caso seja necessário, utilize o fotopolimerizador por 1-2 segundos para facilitar a remoção dos excessos. A limpeza fina de excessos pode ser feita com fio dental.



A fotopolimerização final deve ser feita de todos os lados do laminado, por 40 segundos cada lado. Utilizar as tiras metálicas diamantadas EVE Diastrips para ajustes interproximais. Realizar polimentos finais e ajustes necessários.

# Silano Primer Megabond

Silano Primer Megabond é um sistema para aumentar a adesão entre o cimento e a cerâmica. O sistema consiste em 2 frascos de 3ml, com Ativador e Silano, para ser misturado na proporção 1:1.

### Características:

- Ideal para cerâmicas de dissilicato de lítio e feldspáticas;
- Secagem rápida;
- Livre de acetona.

### Aplicações:

- Cimentação de lentes e facetas de dissilicato de lítio e outras cerâmicas.

### Fluxo de trabalho:

1. Condicionar com ácido fluorídrico;
2. Aplicar de 1 a 2 gotas de ativador e silano na proporção de 1:1 na paleta de mistura e misturar por aproximadamente 15s;
3. Utilizar imediatamente após a mistura;
4. Secar com ar comprimido;
5. Seguir as instruções do cimento utilizado.



<b>CÓDIGO</b>	07-503	
<b>TIPOS</b>	Ativador	Adesivo
<b>EMBALAGENS</b>	1 Frasco 3ml	1 Frasco 3ml

# Megabond Adesivo Foto

Adesivo especial para compósitos. Usado diretamente no esmalte ou dentina. Megabond deve ser usado com condicionante ácido.

### Características:

- Alta força de união;
- Para todos materiais compósitos e cimentos fotopolimerizáveis;
- Excelente união entre o cimento e a dentina ou esmalte;
- Ideal para ser utilizado com Megalink Esthetic.

### Aplicações:

- Esmalte ou dentina.

### Fluxo de trabalho:

1. Condicionar a dentina e o esmalte usando 37% de gel de ácido fosfórico (por exemplo, Megagel);
2. Enxaguar a dentina e remover o excesso de água, mantendo uma camada úmida na superfície da dentina;
3. Aplicar Megabond em toda superfície da dentina por 20s e remover os excessos;
4. Formar uma camada fina e uniforme de Megabond utilizando ar comprimido por 5s;
5. Fotopolimerizar o Megabond por 10s;
6. Utilizar cimento ou resina de acordo com as instruções de uso do produto.



<b>CÓDIGO</b>	07-502
<b>EMBALAGEM</b>	1 Frasco 5ml

# Megagel - Ácido Fosfórico 37%

Megagel é um ácido fosfórico ideal para condicionamento do esmalte e da dentina.

### Características:

- Aplicação facilitada pelas pontas flexíveis;
- Altamente tixotrópico para melhor condicionamento;
- Cor especial para visualização.

### Aplicações:

- Esmalte ou dentina.



<b>CÓDIGO</b>	07-504
<b>EMBALAGEM</b>	1 Seringa 2ml

Tempos de reação	
Esmalte	20 - 60s.
Dentina	≤ 15s.
Dentes com alto teor de fluoreto	50 - 80s.

# Kit Megalink Esthetic



CÓDIGO	07-001 Megalink Esthetic Full kit
CONTÉM	1 Megalink Esthetic TR 3,8g 1 Megalink Esthetic BL 3,8g 1 Megalink Esthetic W 3,8g 1 Megalink Esthetic AI 3,8g 1 Megalink Esthetic Try-in TR 3,8g 1 Megalink Esthetic Try-in BL 3,8g 1 Megalink Esthetic Try-in W 3,8g 1 Megalink Esthetic Try-in AI 3,8g Adesivo Megabond 5ml _ Escovas de aplicação + Bandeja Silano Primer Megabond 2x3ml + Escovas de aplicação Condicionante Ácido Megagel 2ml + Ponta Pontas para aplicação do cimento e try-in



**Prof. Dr. Dickson Fonseca - CRO RN - 1242**

A linha de cimentação do Megalink Esthetic provou que possui grande estabilidade de cor. Uma das grandes vantagens que vimos foi também a fluidez do produto. Para posicionar as lentes é muito fácil. Para remover o excesso a consistência é parecida com um gel, após poucos segundos de polimerização.



**Prof. Dr. Adriano Perini - CRO PR-6342**

O cimento Megalink Auto com certeza é uma ótima opção no dia a dia da clínica. Ser autoadesivo e autocondicionante agiliza imensamente a cimentação dos casos.



**Prof. Dr. Anderson Bernal - CRO SP - 57644**

Megalink é um material versátil, utilizo tanto para estética quanto para grandes reabilitações. Tempo de trabalho dentro dos padrões com viscosidade e coloração adequadas.



**Prof. Dr. Rodrigo Barbosa Lima - CRO SC - 11.213**

Começamos a usar o Megalink Esthetic em conjunto com as pastas Try-in para cimentação de lentes e facetas finas. As pastas são exatamente das cores do cimento, assim, conseguimos uma previsibilidade e estabilidade de cor na hora da aplicação final do cimento.



## InSync MC

InSync MC é o sistema cerâmico para metal ideal para o dia a dia do laboratório.

Cerâmica de feldspático com base em leucita, a fabricação é estabilizada ajustando e otimizando parâmetros internos em materiais cerâmicos. A temperatura de queima é única, queimando a dentina a 880°C os técnicos tem as vantagens de uma cerâmica de alta fusão, porém, sem agredir a estrutura com uma temperatura muito elevada. Cinco tipos e tamanhos de grãos diferentes são utilizados, criando uma densidade muito elevada e um melhor croma. Quanto maior a quantidade diferente de grãos, os espaços entre as partículas são reduzidos, resultando em uma menor contração, maior densidade, melhor croma e maior facilidade de controle de valor. Cores claras e vibrantes mesmo em copings reduzidos.



### Combinação de Cores

COR ENAMEL	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
	57	58	58	60	60	57	58	59	60	58	58	59	60	57	58	59

### Parâmetros de Queima

	Secagem (min.)	Temp. Inicial (°C)	Início do Vácuo (°C)	Elevação (°C/min)	Temp. Final (°C)	Manutenção (min)	Vácuo	Abertura (min)
Wash	4	450	450	80	950	1	Sim	1
Opaque	4	450	450	80	950	1	Sim	1
1. Dentin	4	450	450	60	880	1	Sim	1
2. Dentin	4	450	450	60	870	1	Sim	1
Correction	4	450	450	60	800	1	Não	1
Stains	2	450	450	50	780	1	Não	1
Glaze	4	450	600	50	780	1	Não	1


	Tipo	Classe	CET 2x queima (25-500°C) [*10-6 K-1] + 0,5	CET 4x queima (25-500°C) [*10-6 K-1] + 0,5	Tg 2x / 4x queima [°C] + 20	Solubilidade Química Cerâmica	Resistência Compressiva Flexural [MPa]
Opaque	I	1b	13	13,5	600	<30	≥ 125
Dentin	I	1b	12,5	12,5	570	<30	≥ 75
Enamel, Modifier	I	1b	12,5	12,5	570	<30	≥ 75
Transpa, Clear, Opal	I	1b	12,5	12,5	570	<30	≥ 75
Correction	I	1b	12,5	12,5	540	<25	≥ 75
Stains	I	1b	7,5	-	490	<100	> 50
Glaze	I	1b	7,3 (1x)	-	485 (1x)	<100	> 50




**OPAQUE POWDER**




**MODIFIER**

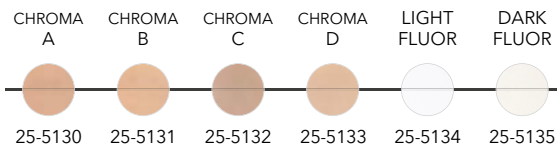


**OPAQUE PASTE**

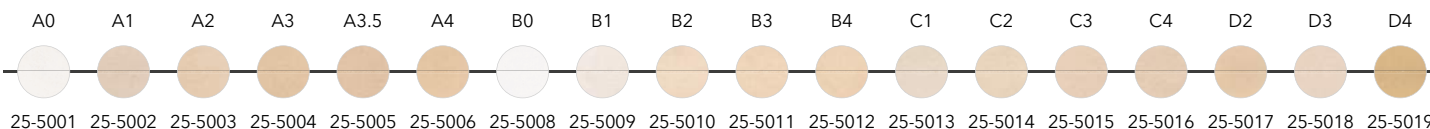


**OPAQUE DENTIN**

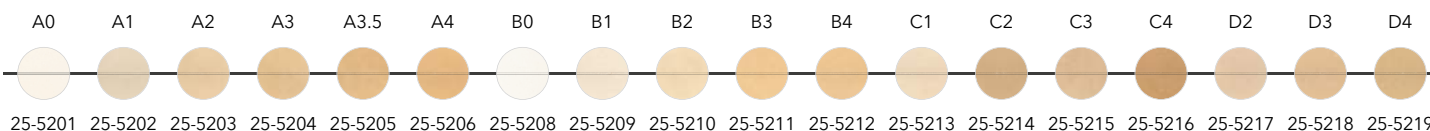


**DENTIN**

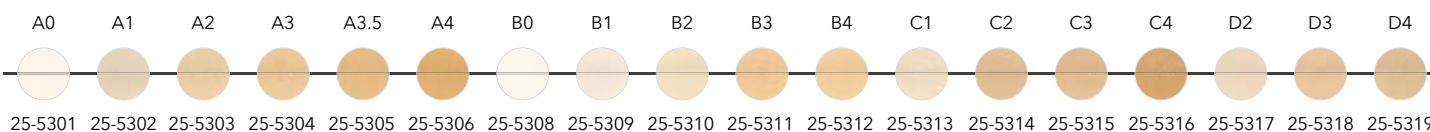


**BLEACH**

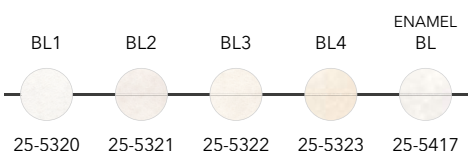


**ENAMEL**

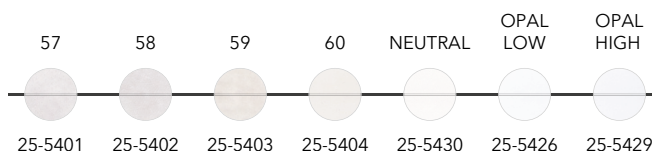


**CORRECTION**

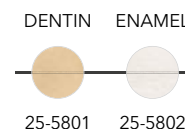


**EFFECT ENAMEL**

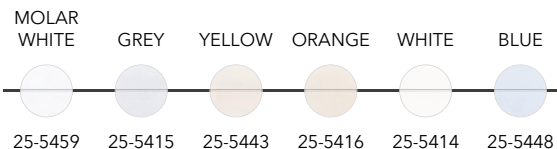


**MAMELONS**

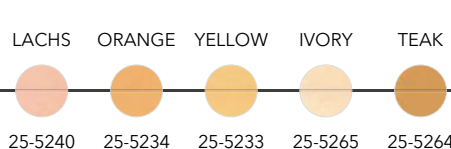


**NECK TRANSPA**

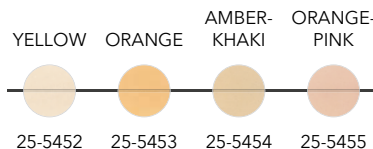


**TRANSLUCENT**

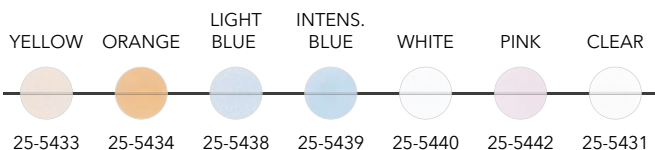


**GINGIVA**

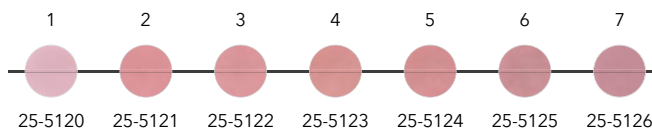

**MONOLAYER**

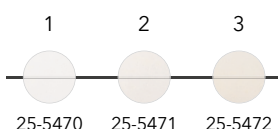

LIQUIDS	KITS
25-3002 Opaque Liquid 25ml	25-0001 Starter Kit InSync MC
23-0803 Modelling liquid 100ml	25-0002 Kit Pro InSync MC

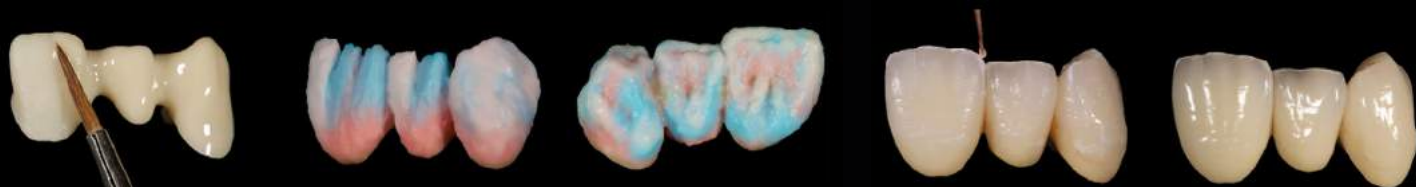

## Cerâmica InSync LiSi2 + ZrO2

InSync é o sistema cerâmico ideal para o trabalho com dissilicato de lítio e zircônia. InSync é fabricado por uma empresa de Liechtenstein, um pequeno país no centro da Europa, entre Alemanha, Suíça e Áustria. Indicado especialmente para dissilicato de lítio (LiSi2) e zircônia (ZrO2). Com excelentes propriedades ópticas e estéticas naturais, o sistema InSync é fácil de ser trabalhado, livre de inconsistências e queima a baixas temperaturas. Possui CET (Coeficiente de expansão termal) muito estável, mesmo após diversas queimas. Com alta translucidez e fluorescência, proporciona resultados altamente estéticos, copiando ao máximo dentes naturais.

## Stain InSync

Sistema de Shades e Stains universal. Ideal para uso com dissilicato de lítio, zircônia ou metalo-cerâmica. Possui características de fluorescência que imitam a natureza. A finalização é transparente, copiando o aspecto de dentes naturais, não acinzentada ou deixa aparência leitosa. **Glaze universal para todas as cerâmicas do mercado.**

Veja o vídeo




	Secagem (min.)	Temp. Inicial (°C)	Início do Vácuo (°C)	Elevação (°C/min)	Temp. Final (°C)	Manutenção (min)	Vácuo	Resfriamento (min)
Liner 1 (ZrO2)	6	400	450	60	970	1	Sim	-
Liner 2 (ZrO2)	6	400	450	60	960	1	Sim	-
Dentina 1	6	400	450	40	765	1	Sim	6
Dentina 2	6	400	450	40	760	1	Sim	6
Correção	6	400	450	45	700	1	Sim	6
Stain/ Glaze pasta	6	400	600	45	730	1	Sim	6
Glaze natural	6	400	-	45	730	1	Não	6
Glaze LiSi2/ZrO2 monolítico	6	400	-	45	760	1	Não	6


	Tipo	Classe	CET 2x queima (25-500°C) [*10-6 K-1] + 0,5	CET 4x queima (25-500°C) [*10-6 K-1] + 0,5	Tg 2x / 4x queima [°C] + 20	Solubilidade Química Cerâmica	Resistência Compressiva Flexural [MPa]
Dentina, Incisal, Transpa, Correção	I	1a	8,5	8,5	530	<20	> 70
Stains/Shades	I	1a	7,5	-	490	<100	> 50
Glaze	I	1a	7,3 (1x)	-	485 (1x)	<100	> 50




**DENTIN**

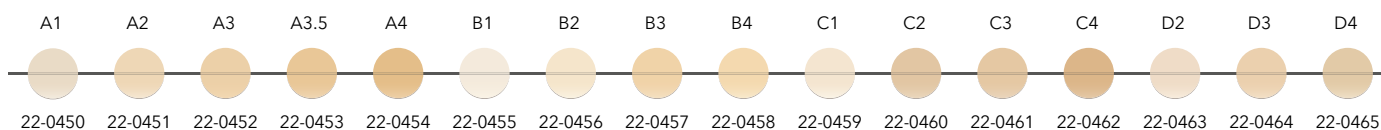


**OPACIOUS DENTIN**

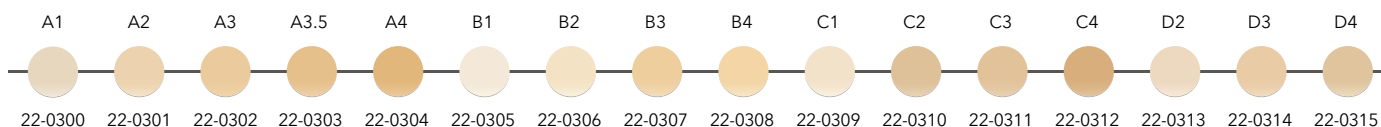


**DENTIN BLEACH - CLAREADOS**

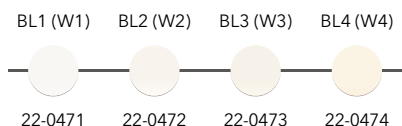


**ENAMEL - INCISAL**

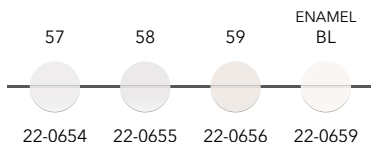


**TRANSPARENTE**

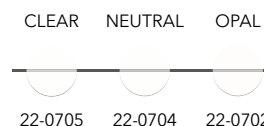


**CORRECTION**

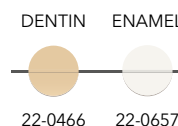


**EFFECT ENAMEL - INCISAL**

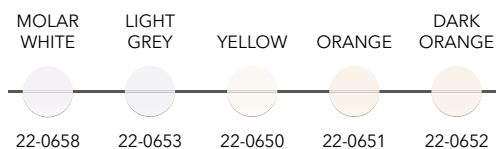


**MAMELOS**

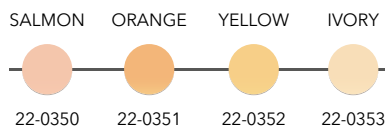


**NECK TRANSPA - CERVICAL**

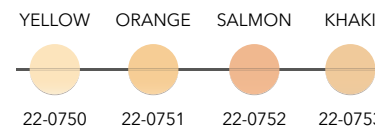


**TRANSLUCENT**

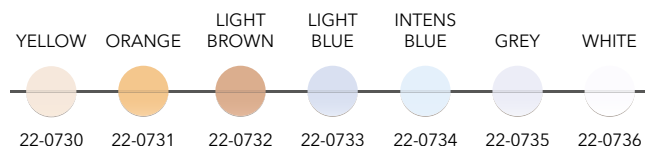


**GINGIVAL**

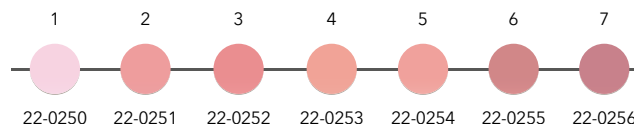


**SHADES**

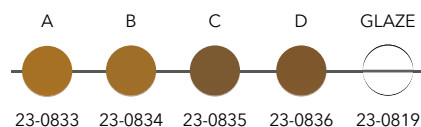

**ZR LINER**

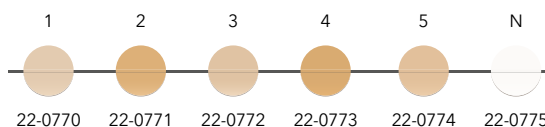

**STAINS**

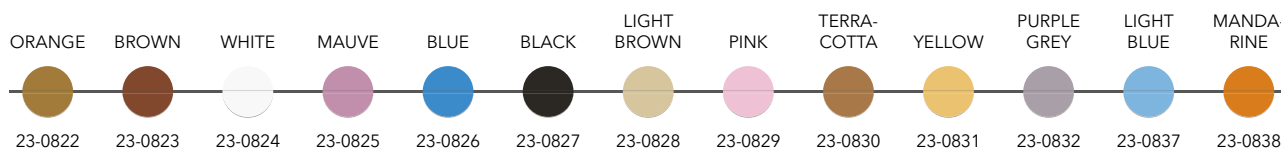

CÓDIGOS	LIQUIDS	KITS
22-0803	Modelling liquid 100ml	22-9991 Kit Starter Cerâmicas InSync 4 potes + 1 líquido
23-0800	Glaze/Stain liquid 25ml	23-0002 Kit Starter Stains & Glaze InSynca 6 potes + 1 líquido
22-0801	Liner liquid 50ml	22-9990 Kit Full Cerâmicas InSync 12 potes + 1 líquido
22-3009	Liner liquid 100ml	23-0000 Kit Full Stains & Glaze InSync 16 potes + 1 líquido



## MiYo

O sistema de acabamento MiYo é a solução para os laboratórios e clínicos que desejam realizar texturas e efeitos nas restaurações. O processo de aplicação é muito simples, igual ao de um Stain ou Pintura/Maquiagem, porém, o material de MiYo permite criar texturas e efeitos em trabalhos monolíticos, o que antes só era possível através de aplicação de cerâmica ou de desgastes manuais.

### Vantagens do sistema

- Identificar formas, cores e texturas antes mesmo da queima, sem surpresas;
- Pastas de estruturas com viscosidade única, ideal para adicionar ou modificar texturas na superfície;
- Adicionar fluorescência, translucidez e opacidade. Modificar contraste e profundidade;
- Rápido processo de aplicação, garantindo mais produtividade no dia a dia;
- Menor contração que cerâmica. Maior estabilidade de cor;
- Controlar valor, tom e croma;
- Encontrar a cor ideal com facilidade.



### Componentes do sistema

Vinte e quatro potes de MiYo e 1 líquido, desenvolvidos para criar restaurações monolíticas em dissilicato de lítio e zircônia.

- Stains com alta opacidade para reproduzir mamelos;
- Stains com média opacidade para criar efeito de "Halo" nas margens incisais;
- Stains translúcidos para replicar a translucidez da incisal e cervical;
- Pastas de estrutura para criar textura e pequenas correções. Estas pastas contêm material de estratificação que se autoglazeiam durante a queima, porém, mantém o detalhe da superfície. As pastas de estrutura possuem um efeito de luz similar a estratificação, porém, com espessura mínima de até 0,1mm, ideais para restaurações monolíticas.

Veja o vídeo







HALO

SPRING AUTUMN



26-0864 26-0865

STAIN

SNOW LINEN FISSURE



26-0857 26-0858 26-0859

TRANSLUCENT

SHADE A SHADE B SHADE C SHADE D



26-0877 26-0878 26-0879 26-0880

GLAZE PASTE

GLAZE



26-0819

TRANSLUCENT

STRAW LOTUS CLEMEN-TINE STORM SMOKE LUMIN LUMIN PLUS SAGE COBALT SLATE SUNFLOWER GARNET



26-0862 26-0861 26-0863 26-0860 26-0875 26-0876 26-0896 26-0893 26-0894 26-0895 26-0950 26-0952

STRUCTURE

WINDOW GHOST ENAMEL ICE BLUSH



26-0869 26-0873 26-0872 26-0870 26-0871

HT WINDOW HT ENAMEL



26-0954 26-0953

MAMELON


WHEAT CORAL PUMPKIN



26-0866 26-0867 26-0868

HIGH OPACITY

FLA-MINGO CRIM-SON PLUM MERLOT SORBET SALMON SABLE THISTLE

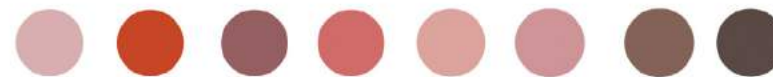

26-0881 26-0881 26-0884 26-0885 26-0886 26-0889 26-0897 26-0898



HIGH TRANSLUCENCY

MID-NIGHT RASP-BERRY COPPER CARNATION



26-0883 26-0887 26-0888 26-0951

STRUCTURE

ORCHID ROUGE FROST



26-0890 26-0891 26-0892

GLAZE PASTE

GLAZE NON FLUOR



26-0821



KITS

26-0001 Kit MiYo Esthetic Full


26-0002 Kit MiYo Pink Full

26-0003 Intro Kit MiYo


	Secagem (min.)	Temp. Inicial (°C)	Início do Vácuo (°C)	Elevação (°C/min)	Temp. Final (°C)	Manutenção (min)	Vácuo
Dissilicato de Lítio	4	450	600	45	730	1	Sim
ZrO <sup>2</sup>	4	450	620	45	760	1	Sim
InSync LiSi Zr	4	450	620	45	730	1	Sim

\*As temperaturas devem ser ajustadas de acordo com o forno utilizado e também de acordo com o tamanho e tipo do trabalho.


Acesse o ebook  
com vários casos

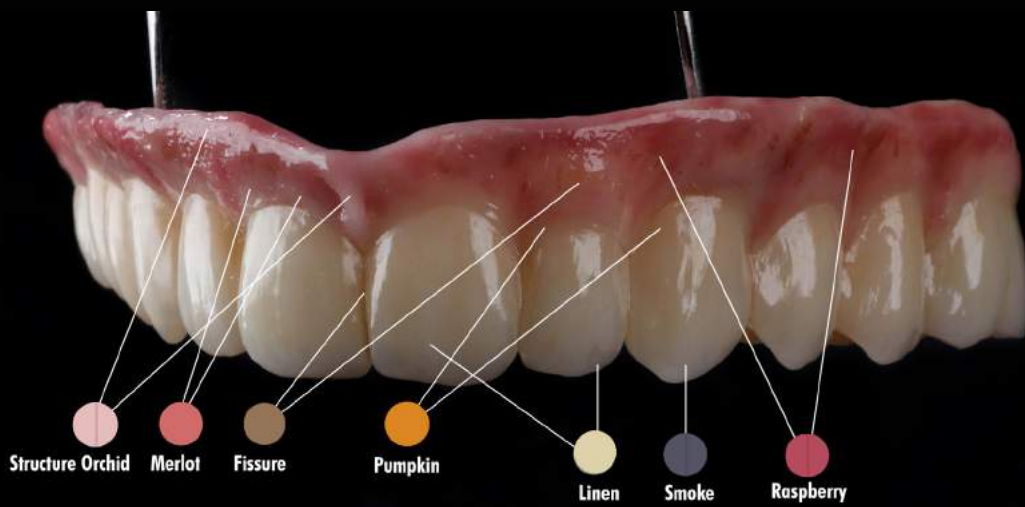

By Danilo Bernardes

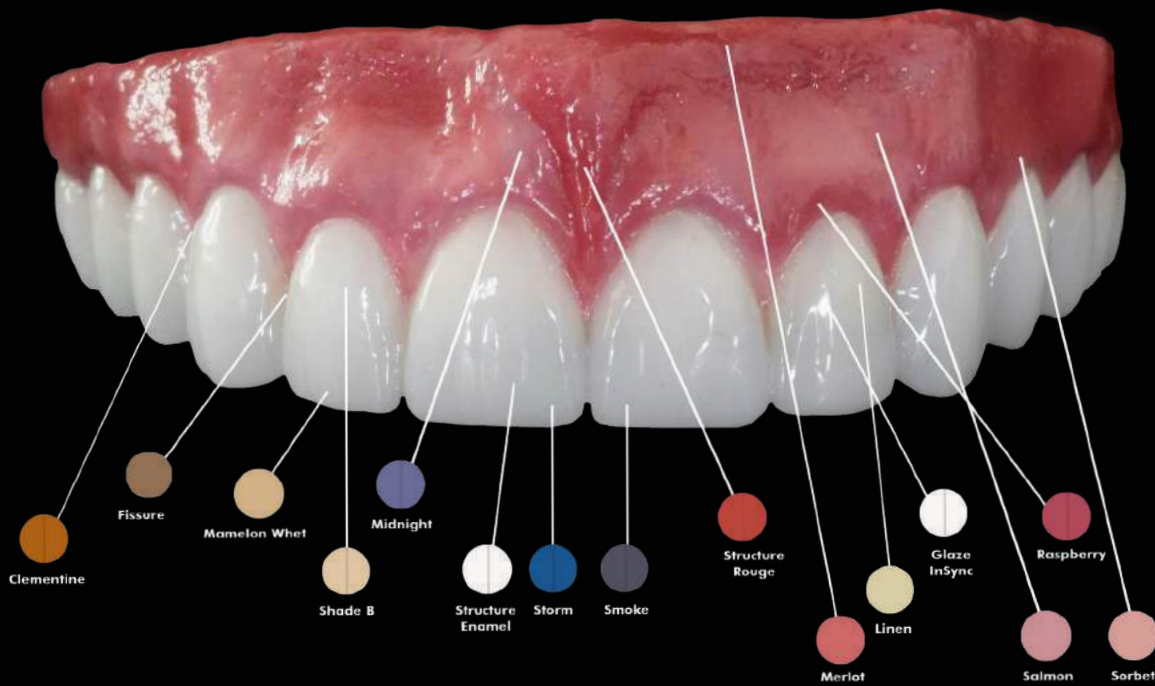

By José Carlos Vaz

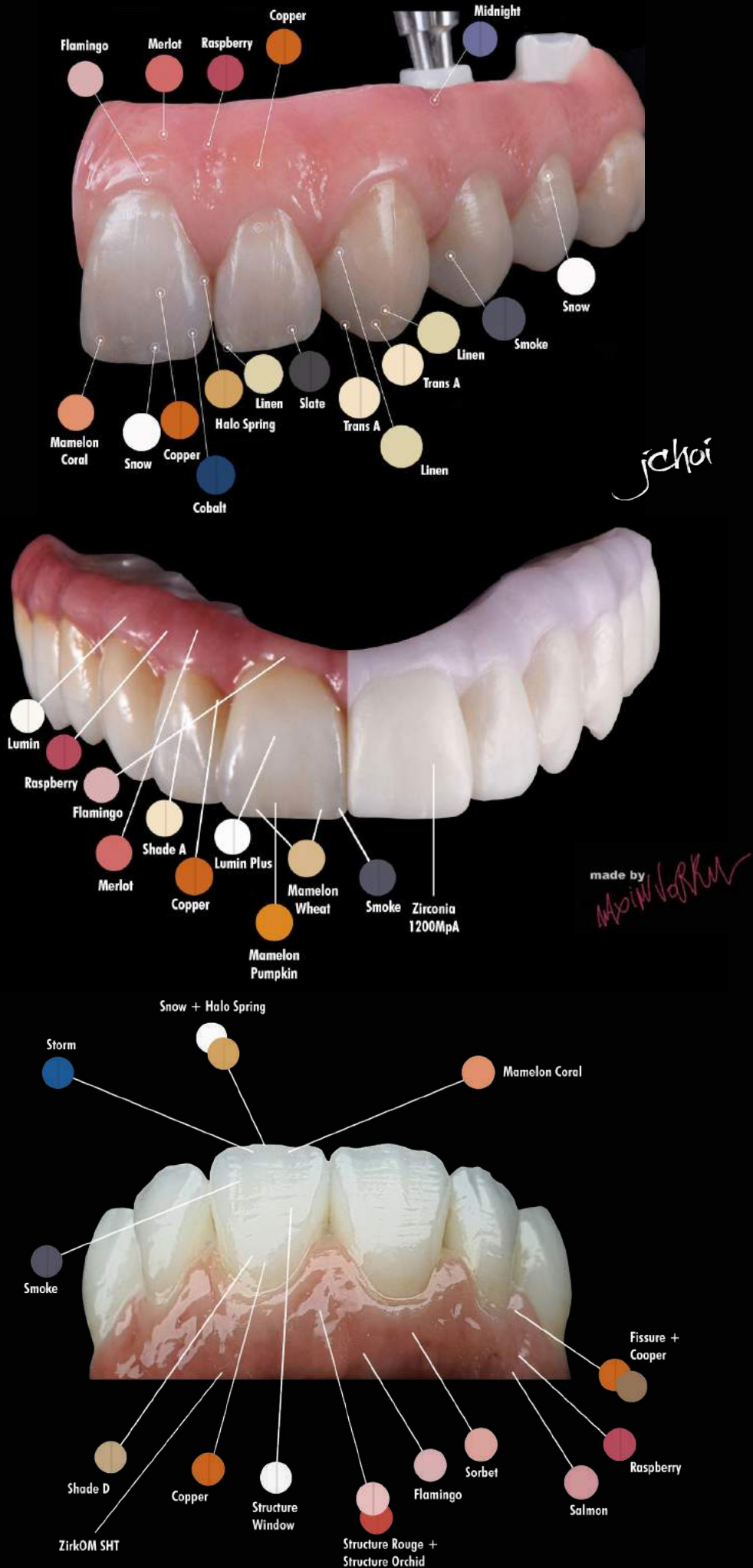



ZirkOM - Aesthetic. Translucent. Color.

Blocos fabricados a partir da melhor matéria prima disponível no mundo (Japão), com prensagem isostática e estabilização com Y-TZP. ZirkOM está disponível em 4 formatos diferentes, para os sistemas CAD/CAM mais utilizados por laboratórios e clínicas no Brasil e no mundo. Blocos em todas as alturas, ideais para diversos casos do dia a dia do laboratório, desde lentes até fixas e implantes.

São 3 tipos de blocos que variam em resistência, coloração, translucidez e multicamadas, veja abaixo:

• **Bloco HS**

A maior resistência compressiva em zircônia ideal para copings e estruturas.

<b>RESISTÊNCIA À FLEXÃO</b>	1450Mpa
<b>TRANSLUCIDEZ</b>	35%
<b>APLICAÇÃO</b>	Copings e estruturas
<b>COLORAÇÃO</b>	Incolor
<b>ALTURAS</b>	12mm, 14mm, 16mm, 20mm e 25mm
<b>SISTEMAS</b>	OP, AG, ZZ e SI

• **Bloco SHT**

Alta translucidez e alta resistência aliadas. Possibilita trabalhos posteriores monolíticos maquiados e estratificação estética em anteriores.

<b>RESISTÊNCIA À FLEXÃO</b>	1100Mpa
<b>TRANSLUCIDEZ</b>	42%
<b>APLICAÇÃO</b>	Coroas e fixas totais (Monolíticas), copings, estruturas, coroas e fixas unitárias
<b>COLORAÇÃO</b>	Incolor, Multi
<b>ALTURAS</b>	12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm e 30mm
<b>SISTEMAS</b>	OP, ZZ, AG e SI

• **Bloco 3D**

A verdadeira zircônia UNIVERSAL. O único bloco que proporciona alta resistência na cervical, ideal para protocolos, com translucidez inigualável na incisal. Surpreenda com a beleza das monolíticas.

<b>RESISTÊNCIA À FLEXÃO</b>	900MPa na cervical até 600MPa na incisal
<b>TRANSLUCIDEZ</b>	57% na incisal até 43% na Cervical
<b>APLICAÇÃO</b>	Todo tipo de trabalho
<b>COLORAÇÃO</b>	A1 Multi e Bleach W2 Multi
<b>ALTURAS</b>	16mm, 25mm
<b>SISTEMAS</b>	OP, ZZ, AG, SI

Blocos ZirkOM para os sistemas CAD/CAM abaixo:



Sistema OP  
98mm



Sistema ZZ  
95mm



Sistema AG  
71mm



Sistema SI  
19, 40, 55, 85mm

Blocos disponíveis nas cores:



Incolor  
(Utilizar líquidos de coloração)



3D  
(Multi resistência e Multi translucidez)

+ |  
TRANSLUCIDEZ | RESISTÊNCIA  
| +

Propriedades Zircônia ZirkOM			
	HS	SHT	3D
Resistência à fratura (MPa)	1450	1100	600 ↔ 900
Translucidez	35%	42%	57 ↔ 43%
Dureza Vickers	1250 HV10	1250 HV10	1250 HV10
Tenacidade à fratura	6,5 MPa.m <sup>1/2</sup>	6,5 MPa.m <sup>1/2</sup>	6,0 MPa.m <sup>1/2</sup>
Módulo de Elasticidade (GPa)	200	200	200
CET (20.900°C)/(°C)	10,6X10 <sup>-6</sup>	10,6X10 <sup>-6</sup>	10,6x10 <sup>-6</sup>


Programas de Sinterização							
A= 1-3 Elementos B= Fixas 4-6 Elementos C= Fixas mais de 6 elementos	HS			SHT			3D
	A	B	C	A	B	C	A
Quantidade de elementos	A	B	C	A	B	C	A
T1 (°C)	25	25	25	25	25	25	25
Rampa 1 (°C)	20	10	5	20	10	5	5
T2 (°C)	900	900	900	900	900	900	900
Manutenção (min)	10	20	30	10	20	30	10
Rampa 2 (°C/min)	10	5	3	10	5	3	2
T3 (°C)	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
Manutenção (min)	120	120	120	120	120	120	120
Resfriamento (°C)	900	900	900	900	900	900	900
T Resfriamento (°C/min)	10	10	10	10	10	10	8

	Lentes e Facetas	Inlays/ Onlays	Coroas reduzidas	Coroas monolíticas Anteriores	Coroas monolíticas Posteriores	Coroa híbrida abutment	monolíticas (até 3 elprágentos)	monolíticas (mais de 4 elprágentos)	reduzidas (até 3 elprágentos)	reduzidas (mais de 4 elprágentos)	Abutments híbridos	Barra de Protocolo
<b>ZIRKOM</b>												
<b>HS</b>												
<b>SHT</b>												
<b>3D</b>												

+ RESISTÊNCIA -  
- TRANSLUCIDEZ +




Como escolher o seu bloco ZirkOM:

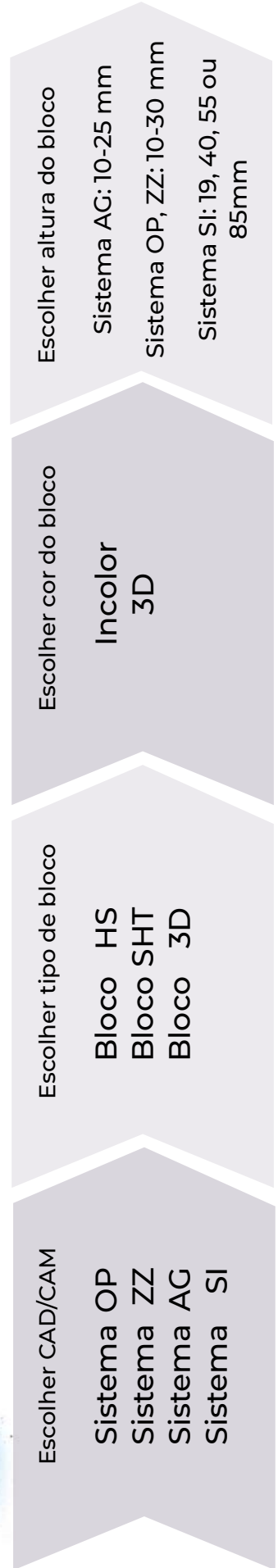

# Caso real de ZirkOM 3D + MiYo

By *Alexson Lima*

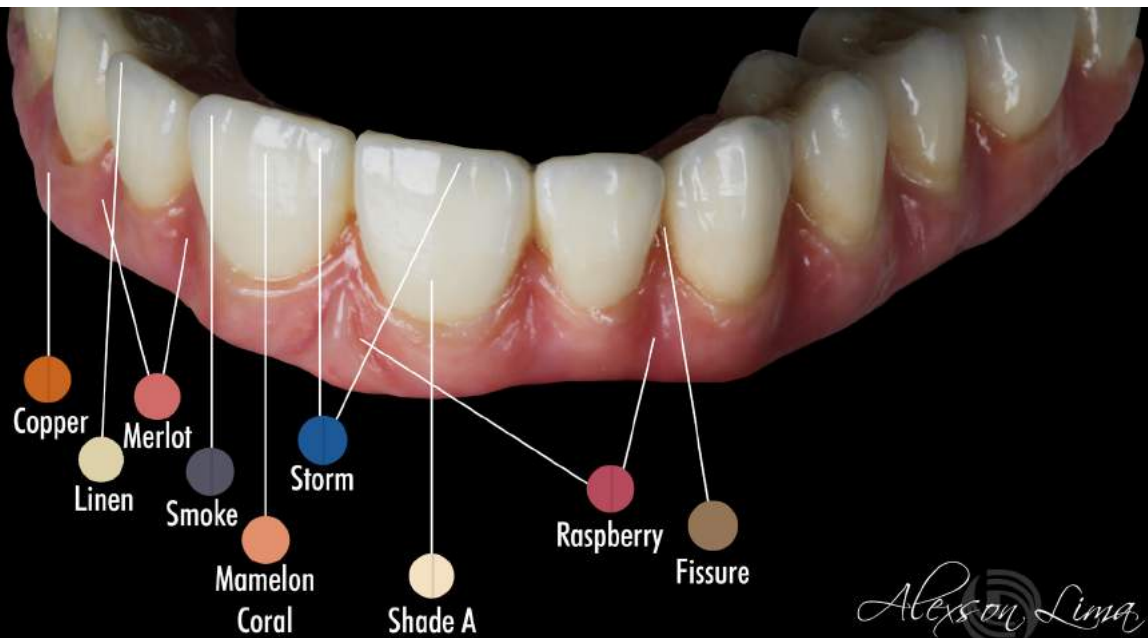

*Alexson Lima*

# Kera Disc

Kera Disc é um bloco de metal a base de Cobalto Cromo, livre de berílio e níquel, para fresagens em máquinas de CAD/CAM.

## Características:

- Anticorrosivo e biocompatível;
- Para coroas e pontes, abutments e implantes supra-suportados;
- Facilidade na soldagem (plasma ou laser);
- Excelente dureza vickers de 285.

## Aplicações:

- Técnica de fresagem em CAD/CAM.



## Propriedades mecânicas

0,2% Elasticidade limite (MPa)	375
Flexibilidade Ductil (%)	14,7
Elasticidade (GPa)	240
Resistência Elástica (Mpa)	525
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	8,55
Temperatura de fundição (°C)	-
Coefficiente de Expansão Térmica (CET) entre 25-500°C	14,5
Dureza Vickers (HV 10/30)	285
Dimensões (mm)	ø 98x3
Tipo (ISO 22674)	≥ Tipo 4

## Composição Química

Co	Cr	W	Si	Mn	Fe	Outros
61,65	27,75	8,45	1,61	0,25	0,2	<0,1

CÓDIGOS	10-908	10-910	10-912	10-913	10-915	10-916	10-920	10-925	10-815
MEDIDAS (mm)	98x08	98x10	98x12	98x13	98x15	98x16	98x20	98x25	95x15
SISTEMAS	Open								ZZ

# Discos de cera ArtWax para CAD/CAM

Cera sintética para fabricação de modelos utilizando fresadora CAD/CAM.

## Características:

- Queimam sem deixar resíduos, ideal para utilização com técnica de injeção de cerâmica;
- Até 30 elementos por disco podem ser fresados.

## Aplicações:

- Técnica de fresagem em CAD/CAM.



PRODUTOS	ArtWax Disc OP					ArtWax Disc AG		ArtWax Disc ZZ			
CÓDIGOS	05-602	05-603	05-604	05-605	05-606	05-620	05-622	05-610	05-611	05-612	05-613
MEDIDAS	10mm	12mm	16mm	20mm	25mm	13mm	20mm	10mm	16mm	20mm	25mm
CORES	Azul										



# Brocas Dianox

## Características:

- Alta durabilidade;
- Incrível poder de corte;
- Grande variedade de modelos.

## Aplicações:

- Zircônia;
- PMMA;
- Ceras.



Sistema AG		Sistema SI MCXL		Sistema SI MCX5		Sistema VHF	
Cód.	Tamanhos	Cód.	Tamanhos	Cód.	Tamanhos	Cód.	Tamanhos
24-104	0.4mm (T6HD)	24-310	1.0mm (SB12)	24-406	0.6mm	24-210	1.0mm
24-110	1.0mm (T3)	24-313	1.35mm (SB12s)	24-412	1.2mm	24-212	1.2mm
24-114	1.4mm (T2)	24-317	1.75mm (CP12s)	24-414	1.4mm	24-226	2.6mm
24-118	1.8mm (T1)			24-422	2.2mm		

# Fresas para CAD/CAM

## Características:

- Incrível precisão e detalhes na fresagem;
- Altíssima durabilidade;
- Diamantação uniforme em toda superfície.

## Aplicações:

- Dissilicato de lítio;
- Cerâmicas feldspáticas;
- Demais cerâmicas híbridas.



Sistema AG		Sistema MCX5		Sistema ZZ			Sistema VHF	
Cód.	Tamanhos	Cód.	Tamanhos	Cód.	Mandril	Tamanhos	Cód.	Tamanhos
24 - 121	T6 HD- 0,3mm	24 - 441	0,5mm	24 - 202	3mm	0,5mm	VZB0314	K4 0,3mm
24 - 122	T3 - 0,6mm	24 - 442	1,0mm	24 - 203	3mm	1,0mm	VZB0607	K4 0,6mm
24 - 123	T2 - 1,0mm	24 - 443	2,5mm	24 - 204	3mm	2,0mm	VZB1014	K4 1,0mm
24 - 124	T1 - 2,5mm			24 - 205	6mm	0,5mm	VZB2016	K4 2,0mm
				24 - 206	6mm	1,0mm	VZB0314A	S1/S2 0,3mm
				24 - 207	6mm	2,0mm	VZB0607A	S1/S2 0,6mm
							VZB1016A	S1/S2 1,0mm
							VZB2020A	S1/S2 2,0mm

## Manuais e Catálogos



Para conhecer mais sobre nossos produtos e acessar nossos outros catálogos, você pode acessar toda a nossa linha de produto através do código Qr ou link.

### Downloads



[odontomega.com.br/downloads](http://odontomega.com.br/downloads)

## Consultores



Se quiser saber onde encontrar um consultor Odontomega, é muito fácil, acesse ao lado:

### Consultores



[odontomega.com.br/consultores](http://odontomega.com.br/consultores)

## Revendas



A Odontomega possui revendas em todo Brasil, pra saber onde tem o lugar mais próximo para comprar o seu produto, acesse:

### Revendas



[odontomega.com.br/revendas](http://odontomega.com.br/revendas)

## Cursos e Eventos



Estar atualizado é muito mais que importante, então a gente conta com uma agenda de cursos com parceiros Odontomega e uma agenda com vários eventos que estaremos presentes, para saber mais sobre toda programação, acesse em nosso site ou pelos links:

### Cursos



[odontomega.com.br/cursos](http://odontomega.com.br/cursos)

### Eventos



[odontomega.com.br/eventos](http://odontomega.com.br/eventos)

## Suporte técnico



A Odontomega conta com um time de especialistas para poder te auxiliar em qualquer problema ou dúvida que surgir ao adquirir um de nossos produtos. Para entrar em contato com o suporte é simples, veja abaixo.

**Sempre que necessitar de ajuda, entre em contato com nosso suporte pelos contatos:**

**E-mail:** [suporte@odontomega.com.br](mailto:suporte@odontomega.com.br)

**Telefone:** (16) 3610.9636 (opção 3)

**Whatsapp:** (16) 98202.6744

Entre em contato



## Vendas



Entre em contato com nosso time de vendas, estamos prontos para te atender.

**E-mail:** [odontomega@odontomega.com.br](mailto:odontomega@odontomega.com.br)

**Telefone:** (16) 3610-9636

**Whatsapp:** (16) 99404-2888

Entre em contato



**ODONTOMEGA**

**Telefone:** (16) 3610-9636 / **Whatsapp:** (16) 99404-2888

**Site:** [www.odontomega.com.br](http://www.odontomega.com.br) / **E-mail:** [odontomega@odontomega.com.br](mailto:odontomega@odontomega.com.br)

**Endereço:** Rua Rui Barbosa, 640 - Centro - Ribeirão Preto - CEP 14015-120



**ODONTOMEGA**